

RACE® EVO




RE1 - 15/.04

800-1000 (1.5 Ncm)



RE2 - 25/.04

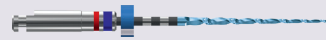

RE3 4% - 30/.04



ES


- Cree un acceso coronal y radicular en línea recta
- Utilice una lima manual ISO 010 para explorar el conducto
- Determine la longitud de trabajo (LT)

IT

- Creare un accesso coronale e radicolare diretto
- Utilizzare una lima manuale ISO 010 per esplorare il canale
- Determinare la lunghezza di lavoro (LL)

PT


- Criar acesso radicular e coronal direto
- Usar uma lima manual ISO 010 para explorar o canal
- Determinar o comprimento de trabalho (CT)

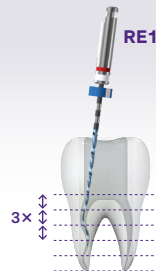

NaOCl



NaOCl

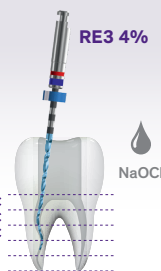

NaOCl

- Introduzca la lima RACE EVO **con movimientos suaves de entrada y salida de 2-3 mm**, aplicando muy poca presión apical y dejando que la lima penetre pasivamente en el conducto. Después de 3 movimientos, extraiga la lima y límpiela, irrigue y repita el proceso
- Realice el preensanchamiento con **RE1** hasta alcanzar la LT
- Inicie el proceso de conformación con **RE2** hasta alcanzar la LT
- Finalice la conformación y la preparación del ápice con **RE3**

En caso necesario, ensanche el ápice con tamaños superiores

- Utilizzare le lime RACE EVO con **leggeri movimenti di 2-3 mm** esercitando una pressione apicale molto lieve, consentendo alla lima di avanzare passivamente lungo il canale. Dopo 3 movimenti, rimuovere e pulire la lima, quindi irrigare; ricapitolare
- Utilizzare **RE1** per eseguire il percorso di scorrimento, fino a raggiungere la LL
- Avviare la procedura di sagomatura mediante **RE2**, fino al raggiungimento della LL
- Utilizzare **RE3** per la sagomatura e la preparazione apicale finale

Se necessario, utilizzare taglie più ampie per l'ampliamento apicale

- Usar as limas RACE EVO com **movimentos suaves de 2-3 mm**, usando uma pressão apical bastante leve e permitindo que a lima progrida passivamente ao longo do canal. Após 3 movimentos, remover e limpar a lima e depois irrigar; repetir
- Usar a **RE1** para realizar o glide path até o CT ser alcançado
- Iniciar o procedimento de preparo usando a **RE2** até o CT ser alcançado
- Usar a **RE3** para preparo apical final

Se necessário, usar tamanhos maiores para um alargamento apical



FKG
swiss endo



- Una vez haya dado forma al conducto, proceda a limpiarlo
- Obtur el conducto con la punta GP y el sellador adecuados

- Al termine della sagomatura detergere il canale
- Otturare selezionando la punta GP e il cemento appropriati

- Depois de o canal ser instrumentado, continuar com a limpeza do canal
- Obturar selecionando a ponta de GP e sealer apropriados



INFO

GLIDE PATH FILE

INITIAL SHAPING FILE

FINAL SHAPING FILE(S)

**Standard
canal**
(most cases)

**Medium
canal**

**Large
canal**

RE3 4%



30/.04

o/o/ou

RE3 6%



25/.06



40/.04



30/.06



50/.04



35/.06

Elija la(s) lima(s) de conformación final en función de su enfoque terapéutico (4% o 6%).

Selezionare la o le lime di sagomatura finale in base all'approccio terapeutico (4% o 6%).

Selecionar a(s) lima(s) de preparo final/finais, dependendo da sua abordagem terapêutica (4 % ou 6 %).

hasta la LT
fino alla LL
até CT

Limpie y
obture
Pulire &
Otturare
Limpar e
Obturar

Radiografías
preoperatorias
Radiografie
preoperatorie
Radiografias
pré-operatórias

Preparación del acceso
Preparazione di accesso
Preparação do acesso

Determinación de la LT
Determinare la LL
Determinação do CT

RE1



15/.04

hasta la LT
fino alla LL
até CT

RE2



25/.04

hasta la LT
fino alla LL
até CT

