

TotalFill® BC Sealer™ & BC Sealer HiFlow™

**Lo “stato dell’arte” nell’otturazione endodontica
è ora disponibile anche per la tecnica a caldo!**

Il clinico può scegliere fra due distinte formulazioni dello stesso sigillante bioceramico premiscelato. Rispetto al sigillante BC Sealer standard, BC Sealer HiFlow è più radiopaco e presenta una viscosità inferiore (maggiore fluidità) quando è riscaldato, quindi è perfetto per la tecnica di otturazione a caldo.



TotalFill BC Sealer 2 g

- Tecnica del sigillo endodontico
- Ottimale per l’otturazione a freddo

NOVITÀ

TotalFill BC Sealer HiFlow 1,5 g


- Tecnica a condensazione
- Ottimale per l’otturazione a caldo
- Minore viscosità quando riscaldato
- Maggiore radiopacità

TotalFill® Bioceramic Otturazione Adesiva



Con TotalFill BC Sealer si può utilizzare la guttaperca standard, ma per un sigillo ottimale si consiglia l'uso dei coni BC points. I coni di guttaperca BC sono impregnati e rivestiti con particelle bioceramiche per ottenere un maggior legame con TotalFill BC Sealer. Il vantaggio dell'utilizzo di BC Sealer e BC Points è che l'otturazione tridimensionale adesiva si può ottenere a temperatura ambiente. Tuttavia, se si preferisce un'otturazione verticale a caldo, si raccomanda l'uso di BC Sealer HiFlow con BC Points HiFlow insieme a BC Pellets riscaldati a 150°C - 220°C.

BC Sealer - reazione di indurimento e adesione


BC Sealer è un sigillante a base di silicato di calcio e fosfato di calcio. Il silicato di calcio si combina con l'acqua per formare idrossido di calcio (pH elevato). L'idrossido di calcio quindi si combina con il fosfato di calcio per formare idrossiapatite.

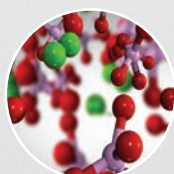

REAZIONI DI IDRATAZIONE (A, B)

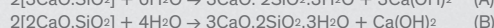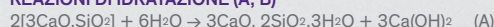

REAZIONE DI PRECIPITAZIONE

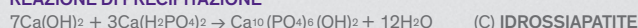

Otturazione adesiva a freddo

- TotalFill BC Sealer
- TotalFill BC Points



TotalFill BC Points
confezione da 60 pezzi

✓ Più rigido per veicolare il sigillante

Cod. colore	Misura	Conicità .02	Conicità .04	Conicità .06
White	15	-	✓	✓
Yellow	20	-	✓	✓
Red	25	✓	✓	✓
Blue	30	✓	✓	✓
Green	35	✓	✓	✓
Black	40	✓	✓	✓
White	45	✓	✓	✓
Yellow	50	✓	✓	✓
Red	55	✓	✓	-
Blue	60	✓	✓	-
Green	70	-	✓	-
Black	80	-	✓	-

Otturazione adesiva a caldo

- TotalFill BC Sealer HiFlow
- TotalFill BC Points & TotalFill BC Pellets



TotalFill BC Points HiFlow
confezione da 60 pezzi

✓ Fonde a 150°C

Cod. colore	Misura	Conicità .04
White	15	✓
Yellow	20	✓
Red	25	✓
Blue	30	✓
Green	35	✓
Black	40	✓
White	45	✓
Red	55	✓



TotalFill BC Pellets
✓ Fonde a 150°C