

A-dec 500

ADVANCED AIR

La perfezione in una turbina.

*Integrato come opzione in esclusiva
sulla nuova faretra odontoiatrica A-dec 500.*

Primea™ Advanced Air® di W&H® è la prima turbina al mondo con velocità della fresa regolabile e capacità di asportazione costante, anche quando la pressione esercitata aumenta. Con un range da 60.000 a 320.000 giri/min, avrai sempre velocità ottimale e massima efficacia per qualsiasi procedura. Un connubio perfetto tra potenza, precisione e controllo in un manipolo leggero e compatto.

“

*Ha l'efficienza di taglio e il controllo
di un micromotore elettrico e la
leggerezza di una turbina.”*

Michael Van Gordon, DMD PC
St. Helens, OR, Stati Uniti



UN UNICO MANIPOLO LEGGERO

MAGGIORE RAPIDITÀ DI TAGLIO DI CORONE E PONTI

Rimuovere e tagliare restauri in ceramica o in metallo può essere una sfida. Primea Advanced Air ti consente di impostare la velocità consigliata per ciascuna fresa e di asportare con precisione e in modo costante.

CARATTERISTICHE SPECIALI:

- Se la pressione sulla fresa durante il taglio aumenta, l'erogazione dell'aria alla turbina aumenta, mantenendo costante la velocità di rotazione della fresa.


ASPORTAZIONE DI OTTURAZIONI IN MODO SICURO ED EFFICIENTE

160.000 giri/min garantiscono il miglior rapporto fra minimo calore sviluppato ed elevata capacità d'asportazione. Dall'amalgama ai compositi, all'ossido di zirconio, Primea Advanced Air consente di asportare vecchie otturazioni in modo rapido e sicuro.

CARATTERISTICHE SPECIALI:

- 5 spray raffreddano costantemente la punta della fresa in qualsiasi posizione di utilizzo.

RANGE VELOCITÀ FRESA OTTIMALI PER PRIMEA ADVANCED AIR

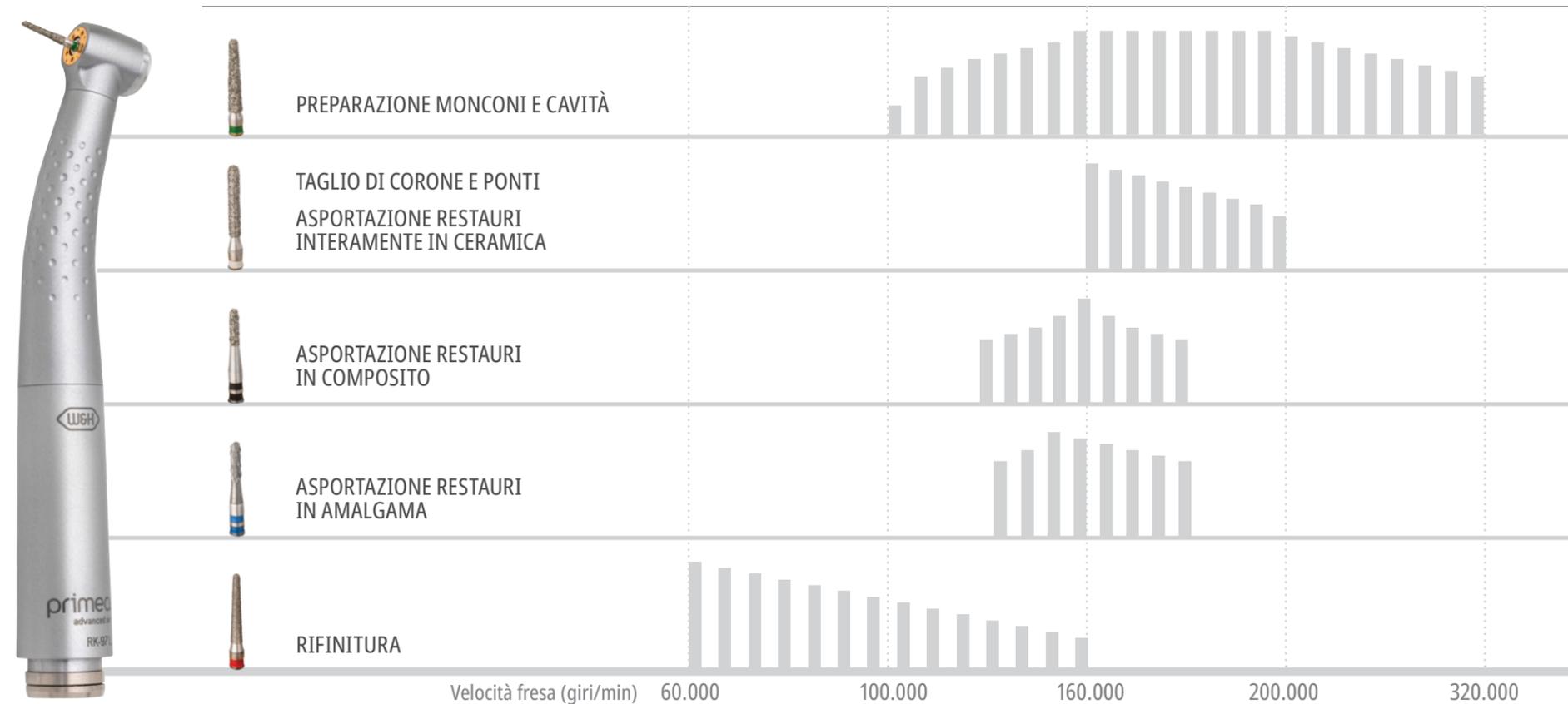

PER MOLTEPLICI PROCEDURE.

CONTROLLO DELLE RIFINITURE

In Modalità tattile, Primea Advanced Air consente di eseguire questa delicata procedura con una velocità della fresa costante di 60.000 giri/min. Sarà possibile profilare le superfici delle preparazioni con la minima invasività e rifinire i margini con un maggiore controllo rispetto a una turbina standard.

CARATTERISTICHE SPECIALI:

- Leggerezza e silenziosità riducono l'affaticamento e forniscono una notevole sensazione tattile.

PREPARAZIONE OTTIMALE DI CAVITÀ E MONCONI

La velocità di fresa costante (fino a un massimo di 320.000 giri/min) consente di eseguire procedure ad alta velocità garantendo prestazioni efficienti, in controllo e precise. Ti sarà possibile aprire facilmente cavità, modellare in modo sicuro monconi e fornire trattamenti ottimali.

CARATTERISTICHE SPECIALI:

- 5 faretti LED+ ad anello garantiscono un'illuminazione senza ombre dell'area da trattare (solo manipolo RK-97L).



MODALITÀ TORQUE

Fornisce immediatamente un elevato torque. Ideale per procedure di asportazione.



MODALITÀ TATTILE

Il torque massimo viene raggiunto gradualmente. Ideale per le rifiniture, quando la sensazione tattile è fondamentale.

CHI DICE CHE NON SI PUÒ RAGGIUNGERE LA PERFEZIONE?



A-dec, il logo A-dec, A-dec Inspire, Cascade, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC, Radius e reliablecreativesolutions sono marchi di A-dec Inc. e sono registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. A-dec 500, A-dec 400, A-dec 300, A-dec 200 e EasyFlex sono inoltre marchi di A-dec Inc. Nessun marchio o nome commerciale presente in questo documento può essere riprodotto, copiato o manipolato senza esplicita approvazione scritta del rispettivo proprietario.

Alcuni dei simboli e delle icone sul touchpad sono di proprietà di A-dec Inc. Ogni uso di tali simboli o icone, nel loro complesso o parzialmente, senza l'espreso consenso scritto di A-dec Inc. è severamente proibito.

Advanced Air®, Alegria®, Endea®, Proxeo®, Synea® e W&H® sono marchi di W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH (Austria). Anche Primea™ è un marchio di W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH (Austria).

©2019 A-dec Inc. Tutti i diritti riservati. 85.0861.04/BB/1M/04-19/Rev A

Integrando Advanced Air® nella nuova faretra A-dec 500 sarà possibile espandere le funzionalità di ogni sala operatoria.

**PER TOCCARE CON MANO LA DIFFERENZA, CONTATTARE
IL RIVENDITORE AUTORIZZATO A-DEC.**

Sede centrale A-dec

2601 Crestview Drive | Newberg, Oregon 97132 Stati Uniti

Tel: 1.800.547.1883 (solo USA/ Canada)

Tel: +1.503.538.7478 (fuori da USA/ Canada)

Fax: 1.503.538.0276

a-dec.com/500experience

A-dec Australia

Tel: 1.800.225.010 (solo Australia)

Tel: +61.(0)2.8332.4000 (fuori dall'Australia)

A-dec Cina

Tel: 400.600.5434 (solo Cina)

Tel: +86.571.89026088 (fuori dalla Cina)

A-dec Regno Unito

Tel: 0800.233285 (solo Regno Unito)

Tel: +44.(0)24.7635.0901 (fuori dal Regno Unito)

