

*Just your lab!*  
CONDOR**LAB**



*Evolution!*

Miglioramento  
costante,  
qualità garantita.

*Constant improvement,  
quality guaranteed.*

Ci piacciono le trasformazioni silenziose. Quelle che lasciano davvero il segno, perché sono il frutto di una lunga storia, di una paziente e costante ricerca tecnologica e di design. Da 50 anni, Rossicaws rappresenta un punto di riferimento nel mondo del dentale, un'azienda apprezzata in oltre 20 Paesi per le qualità dei suoi prodotti e per la capacità di studiare e realizzare soluzioni personalizzate in termini di forma e colore, con una straordinaria rapidità di risposta ed esecuzione. Rossicaws si evolve costantemente, per migliorare il tuo lavoro. Con la concretezza silenziosa ed efficace di chi conosce bene le tue esigenze, le accompagna e asseconda quotidianamente.

*We love silent transformations. Those that really leave a mark, because they come at the end of a long journey of patient and continuous research into technology and design. For the last 50 years, Rossicaws has been a globally recognised name in the world of dentistry. The company is renowned in over 20 countries for the quality of its products and its ability to devise and create personalised solutions in terms of colour and shape, with extraordinary response and implementation times. Rossicaws is constantly evolving to improve your business. We move with the silent, effective decisiveness of a partner who understands your needs, adopts them and strives to meet them on a daily basis.*



*New design!*  
La concretezza  
di sempre, con quel  
tocco di stile in più.

Traditional effectiveness,  
with that extra touch of style.

Ogni vero rinnovamento poggia sulle basi solide della tradizione.  
La nuova linea Condor Lab di Rossicaws conserva la solidità che l'ha resa  
un compagno di lavoro fidato per tanti odontotecnici, con una combinazione  
vincente di ergonomia, immediatezza e tecnologia, per prestazioni eccezionali.  
Ogni suo elemento si combina in un design semplice e pulito, che da oggi  
si arricchisce di un tocco di stile che non lascia spazio al superfluo.  
Una bellezza semplice ed essenziale, al servizio del tuo lavoro quotidiano.

*All true changes are built on the solid foundations of tradition.  
The new Condor Lab line from Rossicaws maintains the solidity that has made  
it a trusted workplace ally for so many dental technicians, its winning combination  
of ergonomics, immediacy and technology ensuring exceptional performance.  
This is all brought together with a simple, clean design, which is now being enhanced  
with a stylish touch that leaves no room for the superfluous.  
Simple, stripped-down beauty at the service of your day-to-day working life.*

# > Ergonomia ed efficacia? Semplicemente, Condor Lab.

*Ergonomics and effectiveness? Look no further than Condor Lab.*



Uno spazio di lavoro quotidiano deve accogliere i tuoi movimenti e i tuoi gesti con naturalezza, quasi fosse la loro naturale prosecuzione. Costruire le condizioni perché questo si realizzi è l'obiettivo di Rossicaws, da sempre. Banchi, box, mobili, accessori: ogni elemento della linea laboratorio va a comporre un sistema in cui funzioni tecnologicamente evolute si sposano con un comfort eccezionale, per una efficacia senza compromessi.

*Your daily workplace must naturally accommodate your movements and actions, acting as the natural extension of them. Rossicaws has always worked tirelessly to make this objective a reality. Desks, boxes, furniture, accessories: each individual element of our laboratory line comes together in a system combining hi-tech functions with exceptional comfort. The result? Uncompromising effectiveness.*



CONDORLAB



*Personality!*

I banchi di lavoro  
con il tuo stile.

*Workbenches with your style.*

I banchi di lavoro della linea Condor Lab hanno un carattere fresco e dinamico e sono progettati per rispondere alle specifiche esigenze di ogni professionista, assicurando praticità ed efficienza. Singoli, doppi o angolari, si adattano a ogni spazio e lo valorizzano, rendendo il lavoro più confortevole.

*The Condor Lab workbenches have a fresh, dynamic feel and have been designed to meet the specific needs of every dental professional, ensuring practicality and efficiency at all times. Whether they're single, double or corner units, they effortlessly adapt to any space, enhancing it and making work a more comfortable experience.*




**Banco di lavoro a un posto** con 4 cassetti, impianto di aspirazione (BL1+AC AS), lampada a Led e mensola (AC LED+AC MBL1)

**Single station workbench** with 4 drawers, suction system (BL1+AC AS), Led lamp and with shelf (AC LED+AC MBL1)

**Banco di lavoro angolare** per ceramica per un operatore con impianto di aspirazione (BL1A+ AC AS), lampade a Led e mensole (AC LED+AC MBL1)

**Double station corner workbench** (one operator) for ceramic work with suction system (BL1A+AC AS), Led lamps with shelves (AC LED+AC MBL1)

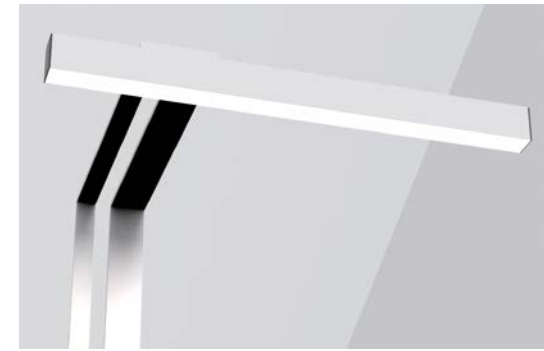

03



**Banco di lavoro ridotto** con impianto di aspirazione (BL+AC AS), lampada a Led e mensola (AC LED+AC MBL)

**Reduced single station workbench** with suction system (BL+AC AS), Led lamp with shelf (AC LED+AC MBL)



**Banco di lavoro a due posti** completi di impianto di aspirazione (BL2+ AC AS), modulo scorrevole (BLSERV) lampade a Led e mensola (AC LED+AC MBL2)


**Double station workbench** with suction system (BL2+AC AS), mobile unit (BLSERV) Led lamps with shelf (AC LED+AC MBL2)

01



- 01. Le bacinelle sono incluse nei cassetti
- 02. Il pannello dei comandi permette il controllo completo dell'impianto di aspirazione
- 03. La lampada utilizza Led a basso consumo

02

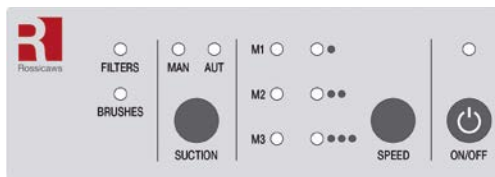

- 01. Plastic insert are included with drawers
- 02. A control panel allows full suction system control
- 03. The lamp uses low-power Leds

# > Una gamma di accessori completa

Full range of accessories

Un ottimo livello di personalizzazione, per costruire l'ambiente di lavoro migliore, in ogni dettaglio.

*Fantastic scope for personalisation means you can build the best possible work environment, down to the smallest detail.*

## Ripiani *Worktops*



1. Ripiano in laminato grigio completo di canale tecnico (AC LP) / Grey laminate worktop with technical channel (AC LP)

2. Ripiano in faggio (SRF) / Beechwood worktop (SRF)

## Lampade e mensole *Lamps and shelves*



1. Lampada Led a basso consumo, 5000K / 2046Lux (AC LED) / Low-power Led lamp, 5000K / 2046Lux (AC LED)

2. Lampada a luce fredda 2x8W 5300K con braccio snodato (AC LAS) / Cold-light lamp 2x8W 5300K with adjustable arm (AC LAS)

3. Mensola in metallo verniciato per banco singolo/doppio (AC MBL/AC MBL1/AC MBL2) / Steel shelf for single/double station bench (AC MBL/AC MBL1/AC MBL2)

# > Il comfort del lavoro efficace

*The comfort of effective working*



## Cassettiere

*Drawers*

Cassettiera supplementare a 2 o 4 cassetti (BLCS/BLCS2) / Additional 2 or 4 drawers element (BLCS/BLCS2)

## Servomobile

*Mobile unit*

Modulo scorrevole a 4 cassetti / 4 drawers mobile unit (BLSERV)



1.



2.

## Seggiolini

*Stools*

1. Seggiolino con sedile e schienale in faggio, regolazione a gas (ACSF) / Stool with beechwood seat and back and gas spring (AC SF)

2. Seggiolino con sedile e schienale in poliuretano nero, regolazione a gas (ACSP) / Stool with black polyurethane seat and back and gas spring (AC SP)



1.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità di filtraggio 99,99% alla velocità dell'aria di 0,056 m/s. Superficie di filtraggio: 18,8 dm<sup>2</sup> Certificato BIA n° 9706730/6210

### TECHNICAL DETAILS

Filtering capacity 99.99% at an air speed of 0.056 m/s. Filtered surface: 18.8 dm<sup>2</sup> BIA certified no. 9706730/6210



2.



3.



4.



5.

## Sistema di aspirazione

*Suction system*

1. Impianto di aspirazione con regolatore elettronico della velocità, avvio automatico con micromotore e controllo efficienza del filtro (AC AS) / Suction system with electronic speed regulator, automatic start through micromotor and filter efficiency control (AC AS)

2. Impianto di aspirazione DUSTINET con filtro a lunga durata (AC ASD) / Suction system DUSTINET with long-life Filter (AC ASD)

3. Gruppo per aspirazione frontale con cuneo magnetico e schermo di protezione (ACCASPP) / Front suction unit equipped with magnetic peg and protection screen (AC CASPP)

4. Caviglia aspirante con schermo di protezione (AC CASP) / Suction peg with protection screen (AC CASP)

5. Coppia poggia braccia in legno (ACPB) / Pair of wooden arm-supports (ACPB)



# Clever!

## Per lavorare bene, in un ambiente pulito.

*Work well in a clean environment.*

Solido e dal design essenziale, BLbox (disponibile anche nella versione Easy) è la soluzione pensata da Rossicaws per aiutarti a lavorare in modo efficace e confortevole, mantenendo l'ambiente di lavoro più pulito. Il box permette infatti di ridurre la dispersione di polvere nelle lavorazioni particolarmente sensibili a questo fattore, come quella del gesso o le lavorazioni di taglio, lucidatura e finitura metalli. Prestazioni rese ancora più efficienti dal sistema di aspirazione Dustinet.

*Solid and simple in its design, BLbox (which is also available in the Easy version) is Rossicaws' solution to help you work effectively and comfortably, ensuring your workspace is as clean as possible. BLbox enables you to reduce the dispersion of dust during particularly sensitive processes, such as those involving gypsum as well as cutting, polishing and metal finishes. Performance is made even more efficient thanks to the Dustinet suction system.*



### 01. **Impianto di aspirazione Dustinet**

Un sistema esclusivo, con filtri a lunga durata.

### 02. **Due punti di aspirazione**

L'aspiratore superiore orientabile garantisce una capacità di aspirazione efficace.

### 03. **Siringa aria compressa**

Facilita le operazioni di pulizia dell'abitacolo a fine giornata.



### 01. **Dustinet suction system**

Exclusive suction system, with long-life filter

### 02. **Two intake points**

The upper suction swivel ensures an effective suction capacity

### 03. **Compressed air syringe**

Easier cleaning operation at the end of the day

BLbox



Aspirazione Dustinet, due punti aspiranti, manometro, siringa aria (BLBOX) / *Dustinet suction system, two intake points, pressure gauge, air syringe (BLBOX)*

BLbox easy




Aspirazione con Filtro in microfibra, siringa aria (BLBOX EASY) / *Suction system with microfibre filter, air syringe (BLBOX EASY)*

# > Sistema Dustinet

## Dustinet system

BLbox monta il rivoluzionario sistema di aspirazione Dustinet, firmato Dental Art. Caratteristiche costruttive e funzionali senza precedenti assicurano un comfort mai visto e il filtro a lunga durata al posto del tradizionale sacchetto lo rende un dispositivo unico, pratico ed ecologico. Dustinet è disponibile anche per gli altri banchi, in alternativa al sistema di aspirazione standard.

*BLbox is compatible with the revolutionary Dustinet suction system from Dental Art. The system's unprecedented assembly and functional characteristics ensure the highest levels of comfort ever seen, while the long-lasting filter replaces the traditional bag to make this a truly unique and eco-friendly piece of equipment. Dustinet is also available with other workbenches, as an alternative to the standard suction system.*

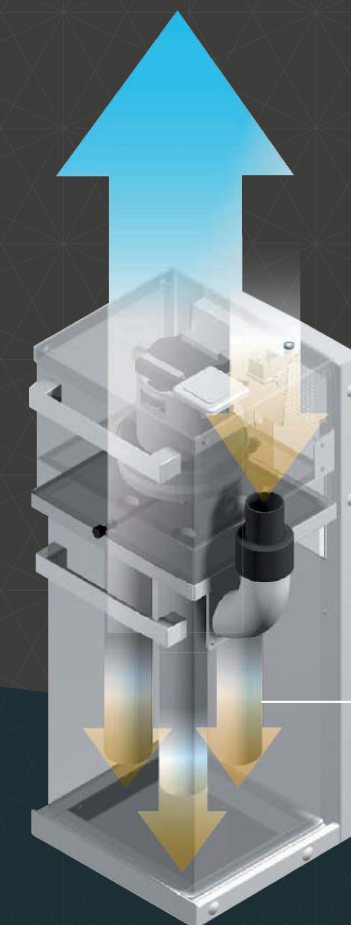

### Filtro:

Il segreto è nel filtro. Non si tratta infatti del classico sacchetto per la polvere, da sostituire periodicamente, ma di un sistema che protegge il motore e filtra l'aria nell'ambiente. Può essere pulito semplicemente, con un pennello, e mantiene così più a lungo tutta la sua efficienza. In questo modo, ovviamente, anche i costi di manutenzione vengono drasticamente ridotti. La polvere si raccoglie all'interno di un contenitore metallico di grande capacità, facile da asportare, svuotare, ricollocare.

### Filter:

*The secret is in the filter. This is no classic dust bag that needs to be regularly emptied, but a system working to protect the motor and filter the surrounding air. It is easy to clean using a brush, meaning it maintains full effectiveness for longer while drastically reducing maintenance costs. Dust is collected in a high-capacity metal container, which is easy to remove, empty and replace.*

### Scheda elettronica:

Predisposta per lavorare con i diversi micromotori presenti nel mercato, assorbe una potenza massima di 300 Watt. È dotata di 3 livelli di regolazione del volume di aria aspirata (20, 30 o 40 V/sec). Attiva la partenza automatica dell'aspirazione con il micromotore e aumenta sicurezza ed efficienza, grazie a due allarmi: uno per l'usura delle spazzole (la prima sostituzione va eseguita dopo 850 ore di lavoro) e uno per l'intasamento del filtro con interruzione del funzionamento di aspirazione e micromotore. Infine, consente un settaggio manuale o in autoapprendimento per i diversi modelli di micromotore.

### Electronic details:

*Compatible with the many different micromotors on the market, it has a maximum input power of 300 Watt. Equipped with three levels for regulating air suction (20, 30 or 40 V/sec). The micromotor automatically activates suction, while two alarms ensure maximum safety and efficiency: one alerts the user to worn brushes (these only need to be replaced after 850 hours' use) and the other denotes a filter blockage and will interrupt the suction function and stop the micromotor. Finally, the system also allows for manual setting or self-learning for the various models of the micromotor.*

*Comfort!*

Completa  
il tuo ambiente  
di lavoro!

*Complete your workspace!*

I pratici mobili di servizio integrano e implementano la funzionalità del laboratorio, offrendo la possibilità di scegliere tra differenti soluzioni cromatiche e di materiali e garantendo in tutte le loro versioni lo spazio ideale per lavorare in modo confortevole e ordinato.

*Our practical service furniture completes and enhances the functionality of your laboratory, giving you the chance to choose between different colours and materials. No matter which version you opt for, they'll help you create the ideal space for you to work in comfort and order.*



La gamma di moduli disponibili rende possibile costruire la propria configurazione su misura, a partire dalle caratteristiche dello studio e dalle sue effettive necessità.

*The range of available modular parts makes it possible to create a bespoke set-up, tailored to fit the characteristics and needs of your dental surgery.*



**Composizione a 4 moduli**, ripiano in laminato e vetrine portalavori con piani in vetro regolabili  
**4 modules cabinet**, laminated worktop and wall unit with adjustable glass shelves



**Linea gesso (CGD1+CGL1)**, ripiano in acciaio inox con tramoggia. Cassetti portagesso completi di bacinelle  
**Plaster line (CGD1+CGL1)**, stainless steel worktop with drain hole. Plaster drawers with basins included

# > Tutti i dettagli per ogni esigenza

Every detail for every need

## Ripiani Worktops



1. Ripiano in laminato grigio completo di canale tecnico (ACLP) / Grey laminate worktop with technical channel (AC LP)
2. Ripiano in faggio (SRF) / Beechwood worktop (SRF)
3. Ripiano in laminato grigio / faggio bordato in PVC colore nero per esecuzioni curve o sagomate (SRB/SRFB) / PVC black edged grey / beech laminate worktop for shaped or curved tops (SRB/SRFB)
4. Ripiano acciaio inox con alzatina abbinata (SRAX) / Stainless steel worktop with back rim (SRAX)

## Lavelli Sinks



1. Lavello inox completo di miscelatore (ACLAX) per ripiani in laminato / Stainless steel sink with mixer tap (ACLAX) for laminate worktops
2. Lavello grande in acciaio inox (SLIN) per ripiani acciaio inox / Large stainless steel sink (SLIN) for stainless steel worktops


## Decantatori Plaster Traps

1. Vasca di decantazione in ABS per modulo lavello lineare/angolare (ACVD/ACVDA) / ABS plaster trap for linear/corner sink units (AC VD/ACVDA)
2. Vasca di decantazione in acciaio inox a estrazione frontale con oblò di controllo (ACVDX) / Front extractable stainless steel plaster trap, with inspection window (AC VDX)



## Vetrine Wall units

1. Vetrina con 2 ante scorrevoli in vetro satinato e 2 ripiani in vetro regolabili (CV1) / Wall unit with sliding opaque glass doors and 2 adjustable glass shelves (CV1)
2. Vetrina a due ante in metallo con 3 ripiani in vetro regolabili (CV2) / Wall unit with doors and 3 adjustable glass shelves (CV2)

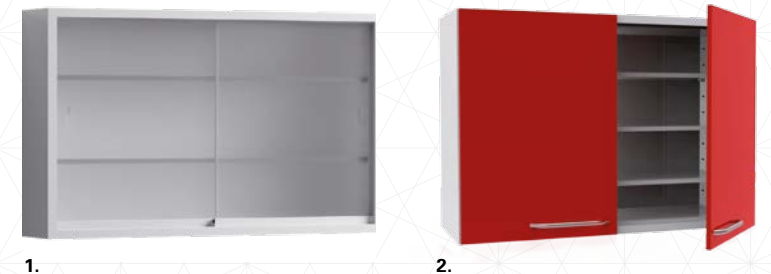

## Altri accessori Other accessories



1. Rastrelliera portalavori per 12/24 bacinelle (AC RPLP/AC RPLG) / Articulator insert rack for 12/24 plastic inserts (AC RPLP/AC RPLG)
2. Bacinelle porta-articolatori. Colori bianco, rosso, giallo, verde, blu (AC BPA) / Articulator plastic inserts in white, red, yellow, green, blue colours (AC BPA)

# > Completa la tua configurazione

*Complete your set-up*



## Fornello Stove

Fornello a gas in acciaio inox da incasso (AC FG) / Built-in stainless steel gas stove (AC FG)

## Pulitrice Polishing

Gruppo aspirante per pulitrice doppia completo di bacinelle, lampada e paraspruzzi in vetro (CKP3) / Suction hood for double polishing unit with basins, lamp and safety glass protection (CKP3)



## Cappe aspiranti Fume hoods

Disponibili in due larghezze diverse, le configurazioni prevedono anche l'integrazione con i molti accessori disponibili a catalogo.

*Available in two different lengths, all versions can be integrated with the available array of accessories.*

Cappa per forni da 125/150cm completa di aspiratore con filtro metallico e predisposizione per filtro a carboni attivi (CMK1V/CMK2V) / Fume hood for furnaces, L=125/150cm, equipped with air extractor, metallic prefilter and active carbon filter (CMK1V/CMK2V)



Cappa aspirante pensile da 120/170cm in acciaio inox completa di aspiratore con filtro metallico (CKP/CKP1) / Hanging stainless steel fume hood, L=120/170cm, equipped with air extractor with metal filter (CKP/CKP1)

> VARIETY

*It's up to you!*  
Non ti resta che  
scegliere la tua  
combinazione.

*All you have  
to do is choose  
your combination.*




# > Moduli


Modules

## Banchi laboratorio


Workbenches

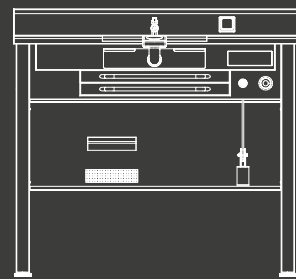


**BL** L=109 / H=92 / D=65cm

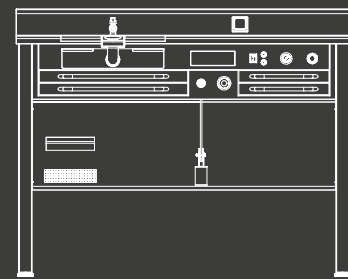


**BL1** L=129 / H=92 / D=65cm

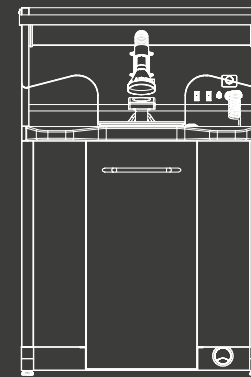



**BLBOX** L=82 / H=121 / D=65cm

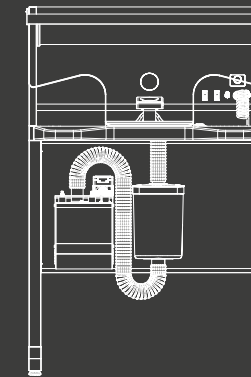

**BLBOX EASY** L=82 / H=121 / D=65cm

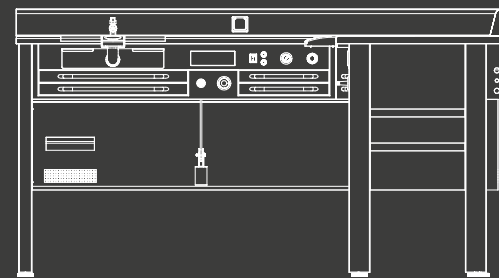

**BL1A** L=197/192 / H=92 / D=65cm

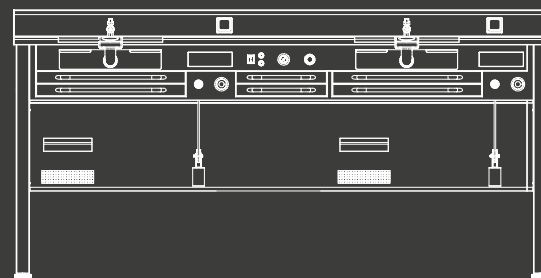
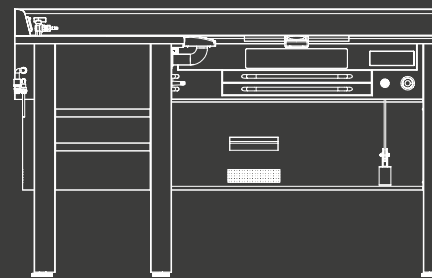


**BL2** L=205 / H=92 / D=65cm

## Mobili di servizio

Storage cabinets

L=200 / H=98 / D=65cm

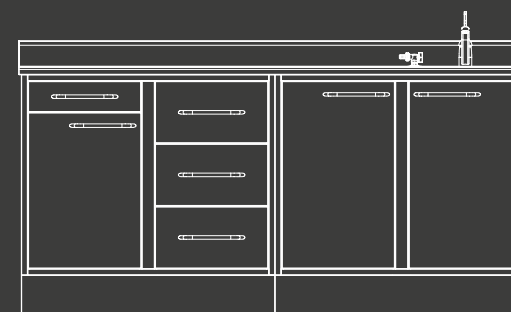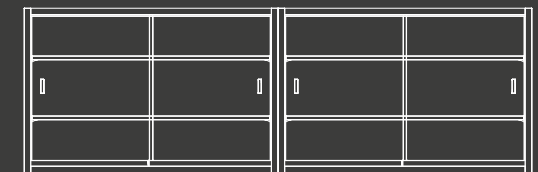



Dental Art group



**Rossicaws srl**

via dell'Artigianato 3, 36030 Montecchio Precalcino, Vicenza - Italy  
tel. +39 0445 334836 - info@rossicaws.it - www.rossicaws.it

More  
than **50**  
years

MADE IN ITALY