


MADE IN ITALY

OSMO STERIL MONO

IL GENIO DELL'IGIENE GLOBALE




**LA SOLUZIONE DEFINITIVA APPLICABILE A TUTTI I
RIUNITI CONTRO IL RISCHIO DI :**

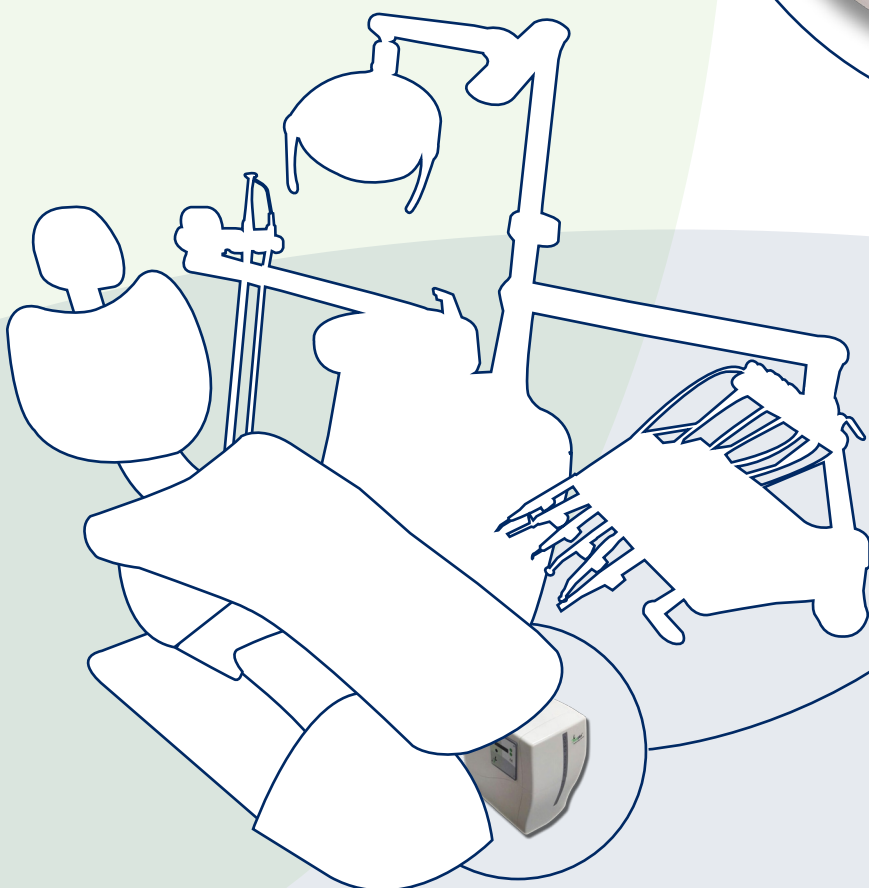

**PIÙ SICUREZZA
PIÙ SALUTE
PIÙ RISPARMIO**

PERCHÉ USARE OSMO STERIL ?

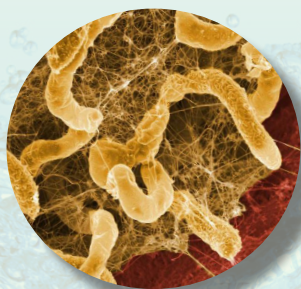

PER ELIMINARE IL BIOFILM

Il **biofilm** è causa di **proliferazione batterica**, che porta ad **infezioni crociate** e all' **inquinamento della rete idrica**.

PER TUTELARE LA SALUTE DI PAZIENTI E OPERATORI

COME FUNZIONA OSMO STERIL ?



- 1. FILTRA L'ACQUA DELLA RETE IDRICA CON IL SISTEMA DELL'OSMOSI INVERSA E PRODUCE H₂O PURA** priva di batteri, calcare ed altri inquinanti
- 2. DISINFETTA IN CONTINUO LA RETE IDRICA DEL RIUNITO ODONTOIATRICO CON BISSIDO DI CLORO STABILIZZATO (ClO₂)** scientificamente riconosciuto come il disinfettante più efficace, virucida, battericida, in grado di penetrare il biofilm e dissolverlo
- 3. FORNISCE AUTOMATICAMENTE ACQUA PURA E SICURA A STRUMENTI, BICCHIERE E BACINELLA**

VANTAGGI

- **LA DISINFEZIONE È OPERATORE FREE:** occorre solo ripristinare il Biossido di Cloro ogni 30 giorni
- **SICUREZZA E RISPARMIO:** utilizza il miglior disinfettante al minor costo
- **FAVORISCE UNA GUARIGIONE PIÙ RAPIDA** dei pazienti sottoposti ad interventi odontoiatrici
- **TAGLIA I COSTI DELL'ASSISTENZA TECNICA:** elimina le ostruzioni dovute al calcare a manipoli, siringhe e turbine
- **EVITA PROBLEMI E COSTI LEGALI** per malattie da infezioni crociate

INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE sui riuniti nuovi o già in uso

DIMENSIONI MACCHINA

Altezza	cm	43
Larghezza	cm	24
Profondità	cm	42
Peso	kg	6

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	V-Hz	230 - 50/60
Potenza Assorbita	W	25
Pressione lavoro massima	bar - kPa	10 -1000
Pressione minima acqua di rete	bar - kPa	2,5 - 250
Portata minima acqua di rete	l/h	250
Produzione media a 25°	l/h	10
Campo dosaggio ClO ₂ (min-max)	mg/l	0,1 - 2

**PER MAGGIORI
INFORMAZIONI RICHIEDI
UNA CONSULENZA GRATUITA**