

The Premium Class

MELAG

Vacuquick®

Finalmente la soluzione ideale per la **sterilizzazione dei manipoli** fra un paziente e l'altro...
...ma non solo!



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
DA DNV UNI EN ISO 9001:2000



CE 0124

NOVAXTEAM



Qualità e innovazione

Il nostro credo è quello di essere sempre all'avanguardia e di mantenere la qualità al primo posto.

L'obiettivo è fidelizzare il cliente, per poterlo sorprendere sempre con prodotti innovativi e di lunghissima durata.

Siamo in grado di offrire i nostri prodotti rapportando in modo concreto innovazione, qualità produttiva e competenza senza perdere di vista il prezzo.

Le innovazioni hanno un valore solamente se possono aumentare i benefici del cliente! Questo principio si adatta alla premium-class, poichè fornisce autoclavi di livello superiore con **velocità**, **prestazioni** ed un **design** unici.

SPEED **COMFORT** **DESIGN**

Nuove caratteristiche

Più velocità, poichè molti strumenti specifici e costosi devono essere sempre pronti per l'uso in breve tempo

Più comfort, perchè le autoclavi devono essere operativamente più semplici ed affidabili.

Migliore design, perchè la ricerca della massima sicurezza sia visibile all'utilizzatore.

Due sistemi

Le autoclavi **Vacuquick®13-B e 14-B** combinano i vantaggi della velocità con quelli delle ridotte dimensioni. Sono sufficientemente compatte da essere utilizzate per la sterilizzazione veloce di strumenti non imbustati, con un ciclo rapido di soli 7 minuti, rispettando le normative europee di sterilizzazione con vuoto frazionato, garantendo cicli di classe "B".

Ma sono comunque sufficientemente grandi da poter essere utilizzate per tutti i processi di sterilizzazione, con un carico massimo fino a 4 kg di strumenti imbustati.

Vacuquick®13

Sono autoclavi "stand alone" con sistema di raffreddamento brevettato.

Vacuquick®14

La esclusiva pompa del vuoto ad anello liquido richiede il collegamento alla rete idrica per alimentazione e scarico.

Questa tecnologia particolarmente consigliata per chi effettua diversi cicli continui durante la giornata, controlla l'emissione di calore che viene mantenuta a livelli minimi.

Vacuquick®13-B e 14-B

Entrambi i modelli possono essere collegati al produttore di acqua demineralizzata MELAdem®40.

Le **Vacuquick®** rispondono pienamente alla normativa europea EN 13060 offrendo cicli di classe "B".

MELAG

The Premium Class



Muoversi in libertà con CF Card

Le autoclavi premium class sono inoltre dotate di uno slot per CF Card. Tutti i dati relativi alla sterilizzazione sono trascritti automaticamente sulla CF Card e possono essere letti direttamente in qualsiasi PC e conservati sotto forma digitale.



Nero su bianco

Il collegamento della stampante MELAprint®42 tramite l'adattatore Ethernet consente la stampa periodica su carta dei dati memorizzati.



Collegamento alla rete

Le Vacuquick® sono dotate di un collegamento Ethernet e possono quindi essere collegate direttamente alla rete informatica dello studio senza alcuna conversione, adattatore o programma gestionale speciale.

The Premium Class

MELAdem®40 – Un sistema che garantisce qualità e risparmio di tempo (optional)

Le *Vacuquick*® utilizzano acqua demineralizzata pulita per ogni ciclo di sterilizzazione, acqua che può essere prodotta in studio in modo economico con il dispositivo MELAdem®40, risparmiando anche tempo e denaro per l'acquisto, il trasporto e lo stoccaggio dell'acqua nonché per lo smaltimento dei contenitori di plastica vuoti.



Le *Vacuquick*®14-B (con collegamento alla rete idrica) lavorano ottimamente con il MELAdem®40. L'acqua necessaria viene alimentata automaticamente: dal rubinetto passa nel MELAdem®40 e poi nell'autoclave per essere infine eliminata nello scarico della rete idrica.

Anche le *Vacuquick*®13-B “stand-alone” possono essere collegate al MELAdem®40 per avere sempre acqua demineralizzata di elevata qualità.

MELAdem®40 può essere anche montato a muro.

E' possibile risciacquare gli strumenti con la pistola MELAJet® dopo la disinfezione e la pulizia.



Documentazione – Per la vostra sicurezza

La norma che regola l'utilizzo delle apparecchiature medicali di sterilizzazione e l'RKI (Robert Koch Institute) richiedono che l'operatore documenti la sterilizzazione degli strumenti. Questo consente di avere indicazioni certe in caso di presunte infezioni nello studio o nella clinica. In occasione di controlli da parte del Ministero della Sanità o di ispezioni negli studi medici o dentistici, il controllo della documentazione e la raccolta dei dati sono considerati criteri fondamentali.

MELAcontrol® - Test di controllo della penetrazione del vapore

La norma EN 867-5 prevede un test specifico per le autoclavi di “classe B” che simula le condizioni più difficili di sterilizzazione degli strumenti cavi. Il sistema MELAcontrol® consiste in un test campione (“Helix”) che contiene un indicatore. Questo deve essere datato dopo il termine della sterilizzazione ed archiviato come evidenza dell'avvenuto processo e della sua correttezza..



lato aperto

indicatore

MELAcontrol® Helix

The Premium Class

Facilità di utilizzo

L'utilizzo delle Vacuquick® è intuitivo: una volta accesa, l'autoclave comunica con l'operatore eliminando la necessità di leggere lunghi manuali di istruzione. Il grande display visualizza tutte le fasi in svolgimento e le informazioni sullo status dell'apparecchio in modo chiaro e organizzato.

Chiusura automatica dello sportello

La nuova funzione consente di chiudere lo sportello semplicemente con una leggera pressione, avvicinando lo sportello all'apparecchio: il bloccaggio avviene poi in modo autonomo e quindi sicuro.

Per gli studi di tutte le dimensioni

Le Vacuquick® sono gli apparecchi **ideali per la sterilizzazione super-veloce dei manipoli fra un paziente e l'altro ... ma non solo!** Strumenti imbustati e non, strumenti cavi e tessuti, tutto può essere sterilizzato nelle autoclavi Vacuquick®.

Grazie alle dimensioni contenute, sono facilmente inseribili negli spazi modulari dei piccoli studi odontoiatrici.

Le Vacuquick® restano comunque ideali anche per i grandi studi con elevata mole di lavoro, che necessitano **cicli di sterilizzazione veloci, con la sicurezza del processo di vuoto frazionato ...** in tempi da record!

Utilizzo ottimale dello spazio

Le Vacuquick® vengono fornite con il supporto per 4 tray (19 x 14 cm) che può alloggiare anche due cassette per sterilizzazione (20 x 14 x 5 cm) semplicemente asportando le due guide laterali.



Supporto con 4 tray










Supporto con 2 cassette per sterilizzazione



The Premium Class

Programmi per tutte le necessità

Tutte le autoclavi premium class offrono cinque programmi di sterilizzazione e due programmi di test. I programmi di test possono controllare e documentare le funzioni dell'autoclave nello studio medico in qualsiasi momento. Dopo avere selezionato ed avviato il programma desiderato, il moderno microprocessore controlla e monitorizza automaticamente l'intero processo.

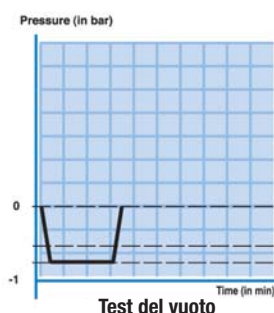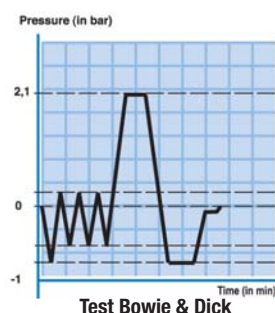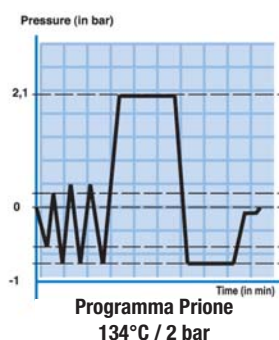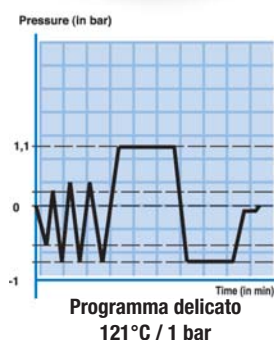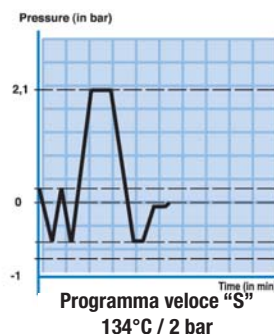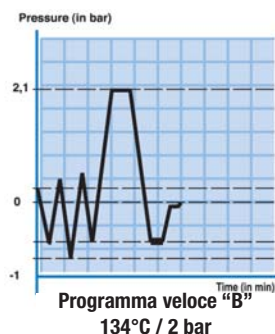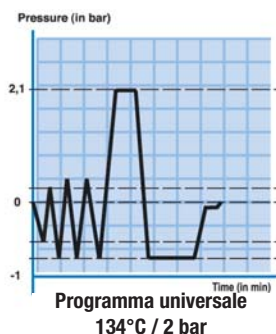

Programmi	Veloce "S"*	Veloce "B"	Universale	Delicato	Prione
Vacuquick®14-B					
Avvio a caldo – 0,5 kg strumenti	07	//	13,40	28	29,30
Avvio a caldo – 4,0 kg strumenti	09	11 (max 1,5kg)	16	32	33
Asciugatura	01	06	15	15	15
Tempo di preriscaldamento	05	05	05	05	05
Vacuquick®13-B					
Avvio a caldo – 0,5 kg strumenti	07	//	15	29	30
Avvio a caldo – 4,0 kg strumenti	10	12 (max 1,5kg)	21	36	35
Asciugatura	01	06	15	15	15
Tempo di preriscaldamento	05	05	05	05	05

* Non imbustati

Tempi operativi espressi in minuti

Dati tecnici

	Vacuquick®13-B "stand alone"	Vacuquick®14-B collegamento rete idrica
misura camera (p x Ø)	23 x 18 cm	
volume camera	5,7 lt	
quantità carico max.	4 kg strumenti 0,7 kg tessuti	
dimensioni (l x h x p)*	35 x 38 x 62 cm	35 x 38 x 57 cm
peso	39 kg	41 kg
alimentazione	230 V 50Hz	
consumo	2900 W	

* Piedini delle macchine posizionabili su un tavolo di 50 cm - Altezza compreso display di 40 cm

Garanzia: 2 anni



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV UNI EN ISO 9001:2000
NOVAXA SpA via Aquileja, 49
 20092 Cinisello Balsamo MI
 Tel. 02.618651 - Fax 02.66012921- n. verde 800.912562
 www.novaxa.it - e-mail: vendite@novaxa.it



Z45VAKQ/0408