



EDGEENDO®



CATALOGO PRODOTTI

SICURO, FACILE, CONVENIENTE


La combinazione tra innovazione, alta qualità ed efficienza

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

EDGEENDO.COM

INDICE

EdgeFile® X7	5
EdgeX7 Utopia™	6
EdgeGlidePath™	7
EdgeOne Fire Glidepath™	7
EdgeTaper Platinum™	8
EdgeTaper Blaze Utopia™	9
EdgeTaper™	10
EdgeOne Fire™	11
EdgeOne-R Utopia™	12
Otturatori	13
Punte di Guttaperca	14
Punte di Carta	15
FAQ	16

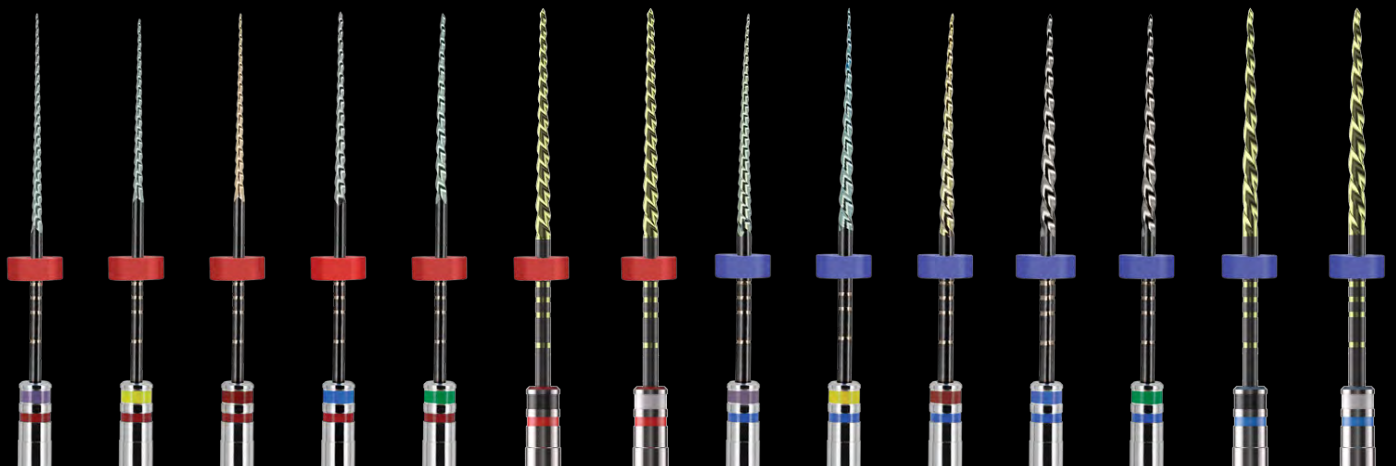

Creato da un Endodontista per gli Endodontisti EdgeEndo® porta il successo nella Comunità Endodontica.

Fondata nel 2012 dall'endodontista americano Charles Goodis, EdgeEndo® è stata creata con la visione di realizzare trattamenti canalari sicuri, facili ed economici superando le carenze dei produttori che offrono una tecnologia obsoleta ad un prezzo elevato.

La soluzione – Innovazione combinata con un'alta qualità ed efficienza dei costi per supportare la crescita dell'endodonzia clinica, risparmiando tempo alla poltrona e offrendo risultati eccezionali per i pazienti.

In soli dieci anni, EdgeEndo® ha rivoluzionato il settore endodontico negli Stati Uniti diventandone il leader. Circa l'80% degli endodontisti americani ha collaborato con EdgeEndo® per condividere questo successo!

Rivoluziona le tue procedure endodontiche con EdgeEndo: il partner che stavi cercando!



Sicuro – Pazienti sani – Dentisti felici. Le soluzioni EdgeEndo® sono sviluppate per le esigenze del paziente. Il nostro trattamento termico FireWire fornisce una resistenza incomparabile alla fatica ciclica e flessibilità per seguire accuratamente il canale, preservandone la dentina e l'anatomia canalare consentendo procedure più rapide. Il tutto per una maggiore sicurezza e produttività.

Facile – Cambiare le abitudini è sempre una sfida per qualsiasi professionista dentale. Le nostre soluzioni sono progettate per essere facili da usare e sono compatibili con tutte le tecniche endodontiche. EdgeEndo® continua ad espandere la propria offerta di prodotti per coprire l'intera procedura endodontica: diagnosi, strumentazione, otturazione e restauro. Non c'è bisogno di molteplici soluzioni e complessità. Lo abbiamo reso semplice per te.

Conveniente – EdgeEndo® ha dimostrato che la qualità del prodotto non deve essere associata ad un prezzo elevato. I professionisti del settore dentale hanno vissuto decenni in cui le aziende non hanno messo al centro della loro attenzione i propri clienti. Il nostro obiettivo è rendere i trattamenti canalari accessibili a chiunque, senza compromessi.

EdgeEndo conferma la sua missione di fornire prodotti e soluzioni rivoluzionari

Innovazione – La linea EdgeEndo® unisce in un'unica soluzione strumenti con trattamento termico brevettato FireWire e FireWire Blaze, che conferisce una maggiore flessibilità e resistenza alla fatica ciclica.

Qualità – Migliaia di medici si affidano a EdgeEndo® e alla volontà di offrire un'esperienza fluida e coerente con tutti i nostri prodotti. Il controllo dei processi produttivi è la nostra priorità e tutte le nostre linee di strumenti sono prodotte negli Stati Uniti, in Svizzera e in Francia e sottoposte ai più severi standard di qualità.

L'evoluzione continua

Il prossimo obiettivo? EdgeEndo® si impegna a supportare il lavoro degli endodontisti e dentisti in tutto il mondo e collabora con Henry Schein con l'obiettivo di raggiungere più di 1 milione di professionisti del settore dentale a livello mondiale. Crediamo che i dentisti e i pazienti meritino alta qualità e soluzioni endodontiche convenienti. EdgeEndo® è ora uno dei maggiori fornitori di strumentario rotante in NiTi al mondo e offre ai nostri partner file di qualità superiore in 35 mercati diversi.

Migliore endodonzia

Non solo prodotti – Il nostro obiettivo è realizzare un'endodonzia migliore! Crediamo che sostenere la comunità dentale sia fondamentale per ottenere risultati clinici migliori in futuro. EdgeEndo® sta collaborando con endodontisti, dentisti e scuole per fornire e garantire una migliore endodonzia. EdgeEndo® è un partner attivo dell'American Association of Endodontics e della Società Europea di Endodonzia (ESE).



Corporate Partner



Condividi le tue idee – Unisciti alla comunità INT-ENDO, sostenuta da Henry Schein, e aiutaci a preservare in modo più naturale i sorrisi dei pazienti, rendendo la tua attività un vero successo.



UNISCITI ALLA NOSTRA COMUNITÀ ENDODONTICA



**SEGUICI SUI
SOCIAL MEDIA**



Scarica i Casi Clinici



Scopri di più

Eccellente resistenza e flessibilità

La soluzione più riconosciuta e comprovata

- Il sistema di file più venduto a livello globale. File più utilizzato dagli endodontisti
- Processo di trattamento termico brevettato: FireWire NiTi™
La lega crea resistenza e flessibilità senza pari
- Design brevettato disponibile nelle versioni .04 e .06
Conicità costante
- Passo variabile
- Il diametro massimo del passo delle spire è di 1 mm per una preparazione minimamente invasiva
- Punta non tagliente a sezione trasversale parabolica
- Massimizza l'efficienza del taglio dei file
- Lunghezza del manico ridotta per un miglior accesso nei settori posteriori
- Misure disponibili in punta ISO 17-45
- Lunghezze disponibili: 21, 25 e 29 mm

Blister STERILE da 6 strumenti	ISO	Conicità	Lunghezza		
			21 mm	25 mm	29 mm
	17	04	10056676	10056683	10056690
		06	10056697	10056704	10056711
	20	04	10056677	10056684	10056691
		06	10056698	10056705	10056712
	25	04	10056678	10056685	10056692
		06	10056699	10056706	10056713
	30	04	10056679	10056686	10056693
		06	10056700	10056707	10056714
	35	04	10056680	10056687	10056694
		06	10056701	10056708	10056715
	40	04	10056681	10056688	10056695
		06	10056702	10056709	10056716
	45	04	10056682	10056689	10056696
		06	10056703	10056710	10056717
Assortimento da 6 strumenti 2x 20, 2x 25, 2x 30	20, 25, 30	04	10056719	10056720	10056721
	20, 25, 30	06	10056722	10056723	10056725



Sezione trasversale parabolica



Flessibilità elevata



Efficienza di taglio elevata



Nessun ritorno



Resistenza elevata



"Secondo me, l'X7 è il miglior sistema di file rotanti per la terapia endodontica mininvasiva. Il trattamento termico brevettato e il diametro massimo ridotto della scanalatura consentono una migliore efficienza e sicurezza nei casi complessi."

Prof. Gianluca Gambarini,
Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Italia



Maggiore efficienza di taglio

- Disponibile nelle conicità .04 e .06 fino ad un diametro massimo di 1 mm
- A conicità variabile
- Il diametro massimo della spira consentito è di 1 mm per una preparazione minimamente invasiva
- Punta non tagliente a sezione trasversale parabolica
- Massimizza l'efficienza del taglio dei file
- Lunghezza del manico ridotta per un miglior accesso nei settori posteriori
- Misura punta ISO 17-45
- Lunghezze disponibili: 21, 25 e 29 mm
- Trattamento termico brevettato FireWire Blaze
- Blister sterile
- Alternativa valida a EdgeFile® X7
- Stessa tecnica di EdgeFile® X7
- Manico sicuro ULTRA-FIT
- Ottima finitura

			Lunghezza		
Blister STERILE da 6 strumenti	ISO	Conicità	21 mm	25 mm	29 mm
	15	04 e 06	Coming Soon		
	17	04	10061463	10061470	10061477
		06	10061484	10061491	10061498
	20	04	10061464	10061471	10061478
		06	10061485	10061492	10061499
	25	04	10061465	10061472	10061479
		06	10061486	10061493	10061500
	30	04	10061466	10061473	10061480
		06	10061487	10061494	10061501
	35	04	10061467	10061474	10061481
		06	10061488	10061495	10061502
	40	04	10061468	10061475	10061482
		06	10061489	10061496	10061503
	45	04	10061469	10061476	10061483
		06	10061490	10061497	10061504
Assortimento da 6 strumenti 1x 17, 1x 20, 2x 25, 1x 30, 1x 35		04	10062637	10062638	-
		06	10062639	10062640	-



Sezione trasversale parabolica



Efficienza di taglio elevata



Ottima finitura



Nessun ritorno



Resistenza elevata



"Prezzo basso per un'ottima qualità costruttiva. Il nuovo trattamento termico della lega e la migliorata capacità di taglio sono due caratteristiche che migliorano il posizionamento sul mercato di EdgeEndo files."

Dott. Roberto Fornara,
Roma, Italia

Tecnologia avanzata. Manico ergonomico sicuro.

NiTi CON TRATTAMENTO TERMICO FIREWIRE™

- Utilizzato con la stessa tecnica del ProGlider®
- Sostituisce fino a 8 strumenti per creare un glidepath più agevole e sicuro
- Sostituisce i file manuali n. 15, 20, 25, 30 e 35 nella tecnica step back e le frese di Gates Glidden n. 1, 2 e 3

Blister STERILE da 4 strumenti	ISO	Lunghezza		
		21 mm	25 mm	31 mm
	19	10056925	10056926	10056927

EDGE ONE FIRE™ GLIDEPATH

NiTi CON TRATTAMENTO TERMICO FIREWIRE™

- Utilizzato con la stessa tecnica del Glider del sistema WaveOne Gold
- Sostituisce fino a 8 strumenti per creare un glidepath più veloce, con minor sforzo e con un diametro massimo della spira di 1 mm
- Processo di trattamento termico brevettato: FireWire NiTi™
 - La lega crea resistenza e flessibilità senza pari
- Sostituisce i file manuali n. 15, 20, 25, 30 e 35 nella tecnica step back e le frese di Gates Glidden n. 1, 2 e 3
- Punta ISO che parte da una conicità minima di .02 e aumenta fino ad una conicità massima di .06 sulla parte lavorante di 16 mm
- Prepara il canale con movimento reciprocante

Blister STERILE da 3 strumenti	ISO	Lunghezza		
		21 mm	25 mm	31 mm
	19	10057445	10057446	10057447

EDGETAPER PLATINUM™

NiTi CON TRATTAMENTO TERMICO FIREWIRE™

Sequenza Edge codificata per una maggiore flessibilità di utilizzo

- Utilizzabili con la stessa tecnica di ProTaper Gold®
- Processo di trattamento termico brevettato
- La lega FireWire™ NiTi migliora la resistenza alla fatica ciclica
- Sezione triangolare convessa (a sezione piena), con punta a croce
 - Massimizza l'efficienza del taglio dei file
- Nessun ritorno della lega per preservare l'anatomia del canale
- Eccellente flessibilità, segue anche le curvature più accentuate
- Misure disponibili: SX, S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5
- Lunghezze disponibili: 21, 25 e 31 mm

Blister STERILE da 6 strumenti	Misura	ISO	Lunghezza		
			21 mm	25 mm	31 mm
	SX	19	10057013 - solo 19 mm		
	S1	17	10057007	10057008	10057009
	S2	20	10057010	10057011	10057012
	F1	20	10056990	10056992	10056993
	F2	25	10056994	10056995	10056997
	F3	30	10056998	10056999	10057000
	F4	40	10057001	10057002	10057003
	F5	50	10057004	10057005	10057006
Assortimento					
1x SX, 1x S1, 1x S2, 1x F1, 1x F2, 1x F3			10057020	10057022	10057023



Sezione triangolare convessa
(a sezione piena)



Flessibilità
elevata



Nessun
ritorno



Resistenza
elevata



"Adoro EdgeEndo: è conveniente, affidabile, predicibile, taglia velocemente e non si deforma. Mantiene la sua forma ed è migliore di WaveOne. Anche l'otturazione risulta più semplice dopo il passaggio a EdgeOne Fire."

Jackson Allen DDS,
West Jordan, UT, US

Maggiore efficienza di taglio

- Stessa tecnica dei ProTaper Gold® ed EdgeTaper Platinum™
- Migliore efficienza di taglio
- Resistente alla deformazione
- Sezione trasversale a forma di triangolo
- Punta non tagliente
- Conicità variabile
- Tecnologia FireWire Blaze
- Manico sicuro ULTRA-FIT
- Ottima finitura con rivestimento color oro
- Sterile
- Misure disponibili: SX, S1, S2, F1, F2, F3
- Lunghezze disponibili: 21, 25 e 31 mm

			Lunghezza		
Blister STERILE da 6 strumenti	ISO	Conicità	21 mm	25 mm	31 mm
SX 	19	04	10061517 - solo 19 mm		
S1 	18	03	10061518	10061519	10061520
S2 	20	04	10061521	10061522	10061523
F1 	20	07	10061524	10061525	10061526
F2 	25	08	10061527	10061528	10061529
F3 	30	09	10061530	10061531	10061532
Assortimento: 1x SX, 1x S1, 1x S2, 1x F1, 1x F2, 1x F3			10061533	10061534	10061535



Sezione trasversale
a forma di triangolo



Efficienza
di taglio
elevata



Ottima
finitura



Resistenza
elevata



“La qualità dei file è visivamente migliorata; la lega è il giusto compromesso di elasticità, ottima efficienza di taglio e stelo ridotto per un utilizzo ergonomico nelle aree posteriori. Il nuovo trattamento termico rappresenta il giusto compromesso di flessibilità che aumenta il feeling durante la sagomatura.”

Dott. Roberto Fornara,
Roma, Italia

Non trattati termicamente

Sequenza Edge più resistente alla fatica

- Utilizzabili con la stessa tecnica dei ProTaper® Universal
- Punta a sezione trasversale triangolare convessa (a sezione piena)
- Massimizza l'efficienza di taglio dei file
- Trattamento elettrochimico di superficie che aumenta la scorrevolezza, la resistenza e la flessibilità
- Nessun ritorno della lega per preservare l'anatomia canalare
- Misure disponibili: SX, S1, S2, F1, F2, F3
- Lunghezze disponibili: 21, 25 e 31 mm

Blister STERILE da 6 strumenti	ISO	Conicità	Lunghezza		
			21 mm	25 mm	31 mm
SX 	19	012	10057060 - solo 19 mm		
S1 	17	09	10057054	10057055	10057056
S2 	20	06	10057057	10057058	10057059
F1 	20	05	10057031	10057032	10057033
F2 	25	05	10057034	10057035	10057036
F3 	30	04	10057037	10057038	10057039
F4 	40	05	10057048	10057049	10057050
F5 	50	05	10057051	10057052	10057053
Assortimento					
1x SX, 1x S1, 1x S2, 1x F1, 1x F2, 1x F3			10057061	10057062	10057063



Sezione trasversale triangolare convessa
(a sezione piena)



Resistenza
elevata

Eccellente resistenza e flessibilità

Un nuovo standard nel movimento reciprocante

- EdgeOne Fire™ è progettato per sagomare i canali con il movimento alternato simile a WaveOne® Gold
- EdgeOne Fire™ può essere utilizzato con lo stesso motore e impostazioni del manipolo su WaveOne® Gold
- EdgeOne Fire™ presenta il nostro trattamento termico Fire-Wire™
- Eccellente flessibilità, capace di seguire le curvature più accentuate
- Nessun ritorno per preservare l'anatomia del canale
- Misure: Piccola (20), Primaria (25), Media (35) e Grande (45)
- Lunghezze disponibili: 21, 25 e 31 mm

			Lunghezza		
Blister STERILE da 3 strumenti	ISO	Conicità	21 mm	25 mm	31 mm
Piccola 	20	05	10057064	10057065	10057066
Primaria 	25	06	10057067	10057068	10057069
Media 	35	04	10057070	10057071	10057072
Grande 	45	03	10057073	10057074	10057075
Assortimento					
Misure: Piccola, Primaria e Media			10057076	10057077	10057078



Sezione trasversale
a forma di parallelepipedo



Flessibilità
elevata



Nessun
ritorno



Resistenza
elevata



"EdgeEndo sono senza dubbio i migliori strumenti rotanti presenti sul mercato! La flessibilità e la durata sono impareggiabili! È stato un cambiamento intuitivo, la separazione del file non è più un problema."

James A. Wealleans, D.M.D.

American Board Certified Endodontist, Adj Professor, Clinician
Sydney, Australia

Maggiore efficienza di taglio

- Alternativa agli strumenti reciprocanti Reciproc®
- Sagoma i canali con movimento reciprocante
- Codifica colore ISO
- Sezione trasversale a forma di S
 - Migliore rimozione dei detriti
- Punta non tagliente
- Lunghezza del manico ridotta per un miglior accesso nei settori posteriori
- Lunghezze disponibili: 21, 25 e 31 mm
- Tecnologia FireWire Blaze
- ULTRA-FIT manico ergonomico
- Trattamento termico color oro
- In blister STERILE
- Misure disponibili: R-Glide, R-20, R25, R40 e R50

			Lunghezza		
Blister STERILE da 6 strumenti	ISO	Conicità	21 mm	25 mm	31 mm
	14	04	10064548	10064549	10064550
	20	08	10062641	10062642	10062643
	25	08	10061505	10061506	10061507
	40	06	10061508	10061509	10061510
	50	05	10061511	10061512	10061513
Assortimento: 4x R25, 1x R40, 1x R50			10061514	10061515	-
Assortimento V2: 2x R20, 2x R25, 1x R40, 1x R50			10064551	10064552	10064553



Sezione trasversale a forma di S



Efficienza di taglio elevata



Ottima finitura



Resistenza elevata



Caso clinico che è stato realizzato utilizzando R25

Prof. Gianluca Gambarini,
Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Italia



EDGECORE™

Otturatore termico con anima in guttaperca rosa



- Facile da posizionare
- Facile da rimuovere
- Facilità nella creazione del Post space
- Per EdgeTaper™, EdgeTaper Platinum™, EdgeFile® X7, EdgeOne Fire™
- Facile da ritrattare come le punte di guttaperca

EDGEFILL™

Otturatore termico con anima in plastica




- La guttaperca trattata facilita, grazie alla fase alfa, un eccellente riempimento in 3D
- Rivestimento preciso per una maggiore precisione e una pulizia più semplice
- Dimensioni ISO per la versatilità del sistema
- Per EdgeTaper™, EdgeTaper Platinum™, EdgeFile® X7, EdgeOne Fire™

Blister da 5 Otturatori + 1 Verificatore		
	ISO	Codice
EdgeTaper Family		
F1	20	10050506
F2	25	10050512
F3	30	10050513
F4	40	10050514
F5	50	10050515
X7 Family		
	20	10056779
	25	10056780
	30	10056781
	35	10056782
	40	10056783
	45	10056784
	50	10056785
EdgeOne Fire Family		
	Piccola	10053638
	Primaria	10053639
	Media	10053640
	Grande	10053641

Blister da 6 otturatori		
	ISO	Codice
EdgeTaper Family		
F1	20	10050507
F2	25	10050508
F3	30	10050509
F4	40	10050510
F5	50	10050511
X7 Family		
	20	10056786
	25	10056787
	30	10056788
	35	10056789
	40	10056790
	45	10056791
	50	10056792
EdgeOne Fire Family		
	Piccola	10053642
	Primaria	10053643
	Media	10053644
	Grande	10053645

PUNTE DI GUTTAPERCA

- Codifiche colore sulla lunghezza per facilitare l'otturazione del canale radicolare
- Tecnica a cono singolo
- Lunghezza standard: 29 mm +/-1
- Elevata biocompatibilità
- Maggiore radiopacità rispetto al GP normale: 30-40% in più
- I coni sono sottoposti ad un processo di irrigidimento brevettato per migliorare il posizionamento e ridurre le deformazioni in punta
- Ottime da utilizzare con sigillanti di ogni genere: facilita l'adesione
- Indicatore di lunghezza con codifica colore: calibrato a 16 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 22 mm e 24 mm

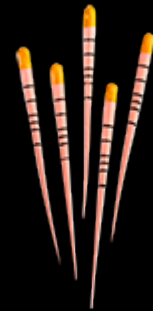

Confezione da 60 pezzi

	ISO	Codice
X7 Family .04		
.04	15	10063785
	20	10063787
	25	10063789
	30	10063791
	35	10063793
	40	10063795
	45	10063797
	50	10063799
Assortimento: 10x 20, 10x 25, 10x 30, 10x 35, 10x 40, 10x 45		10064624
X7 Family .06		
.06	15	10063786
	20	10063788
	25	10063790
	30	10063792
	35	10063794
	40	10063796
	45	10063798
	50	10063800
Assortimento: 10x 20, 10x 25, 10x 30, 10x 35, 10x 40, 10x 45		10064625
EdgeOne Fire Family		
EdgeOne Fire™	Piccola	10063801
	Primaria	10063802
	Media	10063803
	Grande	10063804
Assortimento: 20x Piccola, 20x Primaria, 10x Media, 10x Grande		10064626
EdgeTaper Family		
F1	20	10063780
F2	25	10063781
F3	30	10063782
F4	40	10063783
F5	50	10063784
Assortimento: 10x F1, 10x F2, 20x F3, 10x F4, 10x F5		10064634

Confezione da 60 pezzi

	ISO	Codice
X7 Utopia Family .04		
.04	17	10064491
	20	10064493
	25	10064495
	30	10064497
	35	10064499
	40	10064501
	45	10064503
Assortimento: 10x 17, 10x 20, 10x 25, 10x 30, 10x 35, 10x 40		10064505
X7 Utopia Family .06		
.06	17	10064492
	20	10064494
	25	10064496
	30	10064498
	35	10064500
	40	10064502
	45	10064504
Assortimento: 10x 17, 10x 20, 10x 25, 10x 30, 10x 35, 10x 40		10064506
EdgeOne R Utopia Family		
	20	10064628
	25	10064629
	35	-
	40	10064630
	45	-
	50	10064632
Assortimento: 10x R20, 10x R25, 10x R35, 10x R40, 10x R45, 10x R50		10064633

PUNTE DI CARTA

- Codifiche colore sulla lunghezza per un inserimento accurato
- Le punte hanno una lunghezza standard di 29 mm +/-1



	ISO	Conicità	Codice
Per EdgeOne-R Utopia, Edge X7 Utopia e EdgeFile X7 .04 (confezione da 100 pezzi)			
.04	15	04	10064473
	20	04	10064475
	25	04	10064477
	30	04	10064479
	35	04	10064481
	40	04	10064483
	45	04	10064485
50	04	10064487	
Assortimento da 100 pz: 20x 20, 20x 25, 20x 30, 10x 35, 20x 40, 20x 45			10064489
Per EdgeOne-R Utopia, Edge X7 Utopia e EdgeFile X7 .06 (confezione da 100 pezzi)			
.06	15	06	10064474
	20	06	10064476
	25	06	10064478
	30	06	10064480
	35	06	10064482
	40	06	10064484
	45	06	10064486
50	06	10064488	
Assortimento da 100 pz: 20x 20, 20x 25, 20x 30, 10x 35, 20x 40, 20x 45			10064490
EdgeOne Fire Family (confezione da 60 pezzi)			
EdgeOne Fire™	Piccola		10063810
	Primaria		10063811
	Media		10063812
	Grande		10063813
Assortimento da 100 pz: 40x Piccola, 40x Primaria, 10x Media, 10x Grande			10064627
EdgeTaper Family (confezione da 60 pezzi)			
F1	20		10063805
F2	25		10063806
F3	30		10063807
F4	40		10063808
F5	50		10063809
Assortimento da 100 pz: 20x F1, 20x F2, 20x F3, 20x F4, 20x F5			10064635



Vantaggi

- I file EdgeEndo non hanno memoria di forma, quindi non tendono a raddrizzare il canale (ad eccezione di EdgeTaper che non è trattato termicamente) riducendo così al minimo il rischio di trasportare il canale.
- Deformazione: come caratteristica di sicurezza, i file sono progettati per deformarsi. Sono etichettati come sicuri perché i file si deformano prima di rompersi. Quando i file iniziano a deformarsi segnalano al medico che la lima è usurata e potrebbe rompersi se si continua nell'utilizzo.

Domande

1. Cosa significano "Fire-Wire" e "FireWire Blaze"?
 - Trattamento termico del Nichel Titanio, brevettato da EdgeEndo.
2. Cos'è il "Trattamento termico (AHT)"?
 - Ritratto termicamente più volte a caldo.
3. A quale coppia/velocità dovrebbe essere impostato il motore endodontico?
 - La nostra raccomandazione è di utilizzare le impostazioni esistenti utilizzate con gli attuali file rotanti e/o reciprocanti. Consultare le istruzioni d'uso.
4. Il rapporto torque/velocità cambia a seconda delle linee EdgeEndo utilizzate?
 - Sì, consultare le istruzioni d'uso.



**SEGUICI SUI NOSTRI
SOCIAL MEDIA**

©2025 EdgeEndo LLC All Rights Reserved. Intended for Healthcare Professionals only.

Distribuito da:



A HENRY SCHEIN® COMPANY

Dental Trey srl – Via Partisani, 3 47016 Fiumana – Predappio (FC) Italia
T +39 0543 929111 – F +39 0543 940659
commerciale@dentaltray.it – www.dentaltray.it