

ULTICLEAN 500L



Scaler dentale + Air Polisher

POTENZA




PERFORMANCE



PRECISIONE

B.A.INTERNATIONAL



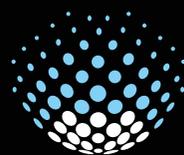

ULTICLEAN 500L

Un approccio moderno alla prevenzione,
igiene e trattamenti di profilassi a bassa invasività.

LUCIDATURA AD ARIA

+ TRATTAMENTO PARODONTALE

+ TRATTAMENTO ENDODONTICO



+ MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

+ RIMOZIONE DELLA PLACCA
EFFICACE E CONFORTEVOLE

Tecnologia di precisione

Il protocollo di salute orale di riferimento




ULTICLEAN
500L

Identificazione della modalità
di procedura

Automatica

Riconosce automaticamente la funzione richiesta quando si impugna uno dei due manipoli.

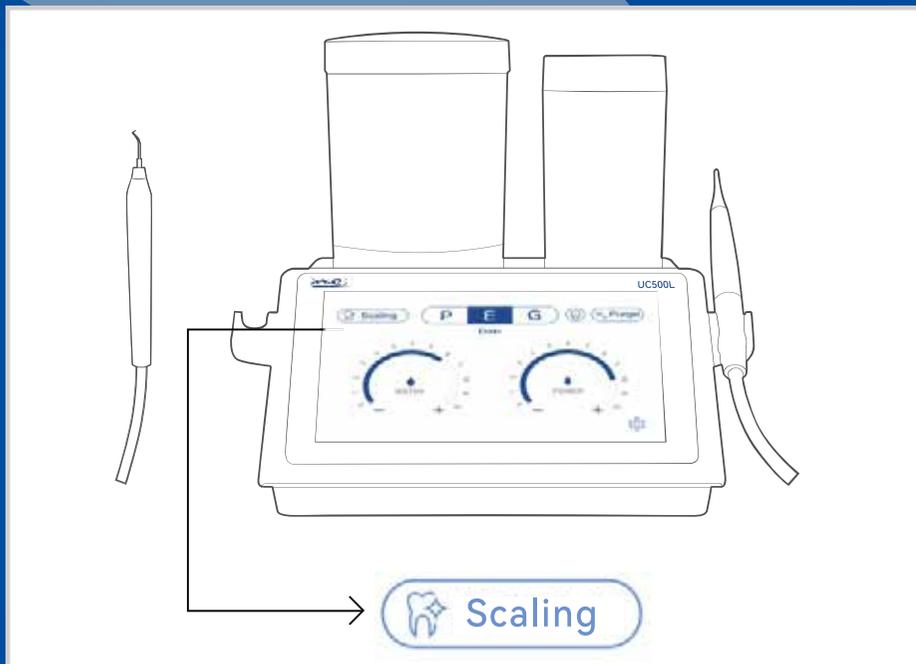

Esempio di detartrasi.



Prima



Dopo



ULTICLEAN 500L

Vibrazione **ellittica**

La traiettoria di vibrazione ellittica può raggiungere un angolo di 0° tra la punta e la superficie del dente, consentendo l'effetto lucidatura.


Questo disperde la forza d'impatto tra la punta e i denti per ottenere una detartrasi più confortevole.

utilizzo semplice + utilizzo avanzato

Ottieni

360°

precisione di detartrasi

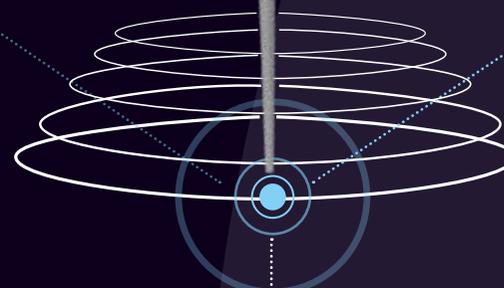

Punta in lega di titanio



Trattamento ultrasonico parodontale

Il trattamento di detartrasi a ultrasuoni sopragengivale e subgengivale con vibrazione ellittica disperde la forza d'impatto tra la punta e i denti.

La durezza della punta in lega di titanio è inferiore a quella del cemento e dello smalto, e quindi i denti non vengono danneggiati.

IMMAGINE	CODICE ARTICOLO	DIMENSIONI	TIPO DI PROCEDURA	DESCRIZIONE
	BA150180	BAC33E	Parodontale	Rimuovere il tartaro in profondità nella tasca parodontale e sciacquare la tasca parodontale.
	BA150181	BAC50RE	Parodontale	Per il rilevamento del tartaro subgengivale e la detartrasi subgengivale.
	BA150182	BAC50LE Punta	Parodontale	Per il rilevamento del tartaro subgengivale e la detartrasi subgengivale.
	BA150184	BAC59E	Parodontale	Per il rilevamento del tartaro subgengivale e la detartrasi subgengivale.
	BA150183	BAC52E	Detartrasi	Per la detartrasi sopragengivale e la rimozione del tartaro dentale e della placca.
	BA150185	BAC56E Punta	Detartrasi	Per la rimozione sopragengivale del tartaro più spesso.
	BA150195	BAC60E Punta	Endodontica	Per la preparazione e l'irrigazione del canale radicolare.
	BA150196	BAC62E Punta	Endodontica	Per l'irrigazione del canale radicolare.
	BA150188	BAC90E Punta	Impianto	Per la pulizia di impianti e ricostruzioni.
	BA150186	BAC94E Punta	Impianto	Per la pulizia di impianti e ricostruzioni.
	BA150187	BAC95E Punta	Impianto	Per la pulizia di impianti e ricostruzioni.

Air - polishing

La lucidatura ad aria è un processo che prevede l'utilizzo di aria compressa per erogare con precisione polvere e acqua per rimuovere efficacemente le sostanze superficiali (come placca dentale, pigmenti, biofilm, ecc.) e lucidare la superficie del dente.

La gamma di polveri Ulticlean comprende una polvere perio che consente una pulizia subgengivale che contribuisce a proteggere la superficie dei tessuti molli.

In questo modo si ottiene un trattamento efficace e confortevole garantendo un'esperienza piacevole per il paziente.

La lucidatura ad aria è meno aggressiva per lo smalto dei denti con un'abrasione minima rispetto alle tecniche convenzionali di detartrasi e lucidatura.

Rimozione della placca **accurata**


La lucidatura ad aria consente di ottenere un effetto significativo sulla superficie occlusale, la superficie adiacente, i brackets ortodontici e altre aree difficili da pulire.

Riduce l'adesione della placca e dei pigmenti

Dopo la detartrasi a ultrasuoni o la detartrasi manuale, i pazienti possono percepire la superficie dei denti ruvida e irregolare.

La funzione principale della lucidatura ad aria è quella di lucidare e pulire la superficie dei denti.

Dopo la lucidatura, la superficie del dente diventa più levigata e pulita, rendendo meno probabile l'adesione di placca e pigmenti ai denti.

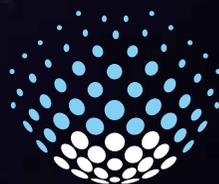

ULTICLEAN
500L



Controllo

Pulizia **sottogengivale** ad aria

Efficace per il controllo delle infiammazioni del dente naturale, dei tessuti molli e delle perimplantiti, e consente di ridurre la profondità di penetrazione.

Rispetto alla detartrasi tradizionale la lucidatura ad aria pulisce meglio la superficie dentale nonché la struttura complessa e la superficie degli impianti.



ULTICLEAN
500L





Controllo della placca

Il puntale di piccolo calibro consente una lucidatura con aria più concentrata e una più efficiente rimozione della placca.

L'elevata concentrazione di acqua e aria permette di ottenere un buon rivestimento di polvere tramite l'acqua e riduce la nebulizzazione della polvere.



ESTERNO: ACQUA


Lavaggio, raccolta e regolazione

ESTERNO: ACQUA


Fornisce protezione e acqua calda

INTERNO: ARIA E POLVERE

Aria compressa e polvere
Rimuove pigmenti, placca, biofilm e tartaro di recente formazione

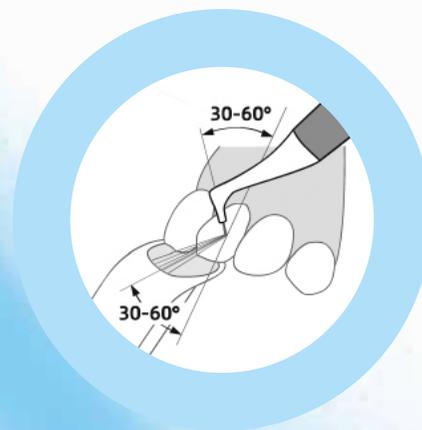

Angolo raccomandato
30° - 60°

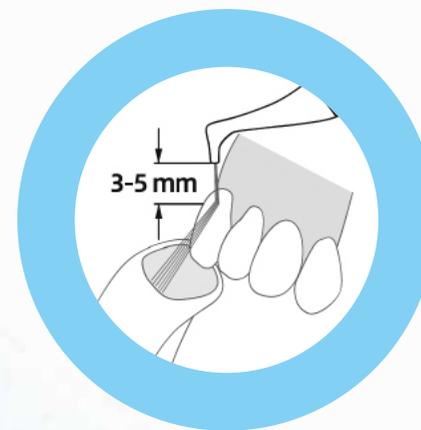

Distanza di lavoro consigliata
3 - 5 mm

Sistema con carrello completo appositamente progettato per l'unità Ulticlean UC500L che consente un maggiore controllo ed efficienza.

Design compatto ed esclusivo

Il sistema di gestione dei cavi elegante ed efficiente consente di avere una stazione di lavoro estremamente igienica e funzionale.

Movimento senza interruzioni - 360

Grazie al sistema di ruote di alta qualità, il nostro carrello è progettato per consentire la migliore manovrabilità intorno allo spazio di lavoro.

Ergonomico



Gestione efficace dello spazio grazie agli alloggiamenti frontali che consentono un facile accesso alle polveri e al dispenser Ulticlean.

Parte anteriore:

826,5 mm di altezza x 330 mm di larghezza nella parte bassa x 220 mm di larghezza nella parte superiore

Parte laterale:

826,5 mm di altezza x 361 mm di larghezza nella parte bassa x 286 mm di larghezza nella parte superiore

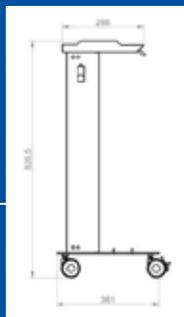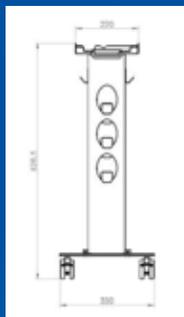

Dimensioni

CARRELLO - BA150300





ULTRACLEAN
500L

Semplice + elegante



Pedale multifunzione



Modalità di alimentazione
senza acqua



Modalità boost



Modalità di lavaggio



Modalità di alimentazione
standard

Doppia alimentazione idrica

Dotato di due flaconi per l'acqua (600 ml, 1400 ml) realizzati in materiali anticorrosivi, che possono contenere sostanze chimiche speciali come clorexidina, perossido di idrogeno e ipoclorito di sodio. È inoltre disponibile un'alimentazione idrica esterna. L'unità di riscaldamento dell'acqua rende il trattamento più duraturo.





Orn

DALLE PRESTAZIONI ALLA TRANQUILLITÀ...



confezione



ULTICLEAN 500L

Tutto ciò di cui avete bisogno per avere sicurezza clinica in **un unico pacchetto**:

Il centro di assistenza di B.A. International è uno dei più grandi d'Europa.

Abbiamo integrato le più recenti tecnologie di lucidatura ad ultrasuoni e ad aria in un'unica unità, in modo da eliminare efficacemente il biofilm, riducendo così la necessità di strumentazione manuale e meccanica.

- Unità UC500L
- 4 manipoli
- 14 punte incluse nella confezione
- 2 scatole di polvere Ulticlean
- Carrello elegante ed ergonomico
- Servizio di installazione professionale
- 3 anni di garanzia
- 12 mesi di assistenza
- Questa confezione include anche: chiave dinamometrica, scatole di sterilizzazione, ago di pulizia, connettori per compressore e parti di ricambio.



Profilassi BA Ulticlean

Serie di polveri

Polvere per profilassi Ulticlean STANDARD
(confezione da 4). Per uso sopragengivale.

Polvere per profilassi Ulticlean Perio PLUS
(confezione da 4). Per uso sub e sopragengivale.



		STANDARD	STANDARD	PERIO PLUS
CODICE ARTICOLO		9796714	9796715	9796716
AROMA		LIMONE	MENTA	NEUTRO
MATERIE PRIME DI BASE		BICARBONATO DI SODIO	BICARBONATO DI SODIO	TAGATOSIO
Ø DELLA DIMENSIONE DELLE PARTICELLE		40 µm	40 µm	15 µm
pH		A 20 °C: 8,1- 8,4	A 20 °C: 8,1- 8,4	A 20 °C: 6- 8
DENTE	DISCROMIE E DENTI GIOVANI	✓	✓	✓
	SMALTO	✓	✓	✓
	MACCHIE BIANCHE SULLO SMALTO	✓	✓	✓
	DENTINA	✓	✓	✓
GENGIVA	GENGIVA	✓	✓	✓
	LINGUA E PALATO	✓	✓	✓
RIPRISTINO	COMPOSITO IBRIDO	✓	✓	✓
	VETROIONOMERO	✓	✓	✓
IMPIANTO	IMPIANTO E MUCOSITE	✓	✓	✓
ORTODONZIA	BRACKET E APPARECCHI	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓

Tre sezioni manipolo per
lucidatura ad aria

Pulizia più semplice



Il design del manipolo è leggero

e aiuta a evitare le ostruzioni, favorendo
così una maggiore durata.

Accessori

Unità principale + scatola per
sterilizzazione ad aria compressa
e polvere e scatola per
sterilizzazione a ultrasuoni

Scatola per sterilizzazione ad aria compressa
e polvere

Per la sterilizzazione e la conservazione del
manipolo di lucidatura ad aria e dell'ago di pulizia

Scatola per sterilizzazione a ultrasuoni

Per la sterilizzazione e la conservazione del
manipolo per ultrasuoni e dell'ago di pulizia

Confezione esterna

Per la conservazione di tutti gli accessori UC500L

MATERIALE	GLICINA	DENTINA	ERITRITOLO	BICARBONATO DI SODIO	SMALTO
MOHS*	2	2- 2,5	2,5	2,5	4,5

Configurazione standard

MANIPOLO A ULTRASUONI BAC5L	x2	SCATOLA DI STERILIZZAZIONE	x2	SERBATOIO POLVERI	x2
IMPUGNATURA PER LUCIDATURA AD ARIA (BAC5P x 1) (BAC5B x 1)	x2	BOTTIGLIA PER ACQUA	x2	TUBO DELL'ACQUA/TUBO PNEUMATICO	x2
CHIAVE DINAMOMETRICA	x2	PEDALE MULTIFUNZIONE	x1	AGO	x2

La selezione delle punte a ultrasuoni include:

BAC33E/BAC50RE/BAC50LE/BAC59E/BAC56E/BAC60E/BAC62E	x2
BAC94E/BAC95E	x1

CODICE ARTICOLO

BA150100	Scaler dentale Complete Ultimate UC500L e unità di profilassi
BA150150	Manipolo per lucidatura ad aria BAC5P per trattamento sopragengivale
BA150155	Manipolo per lucidatura ad aria BAC5B per trattamento subgengivale
BA150160	Manipolo per ultrasuoni BAC5L
BA150160	Ugelli monouso (confezione da 10) (punte per dispositivo di lucidatura ad aria subgengivale)

*Scala di durezza dei minerali - misura della resistenza relativa ai graffi, misurata graffiando il minerale contro un'altra

sostanza di durezza nota sulla scala di durezza Mohs.



ALIMENTAZIONE

PRESTAZIONI

PRECISIONE



ULTICLEAN 500L



B.A. International Unit 7-10, Kingsthorpe Business Centre, Studland Road, Kingsthorpe, Northampton NN2 6NE, Inghilterra.

+44 (0)1604 777 700 | sales@bainternational.com | www.bainternational.com