

# RIUNITI



Riuniti Planmeca: creati per una cura migliore del paziente .....	4
Accesso agevole, consulto comodo.....	6
Ergonomia ideale .....	8
Paziente rilassato.....	10
Progettato per durare.....	12
I dettagli che fanno la differenza.....	14
Colori in evidenza.....	16
Il controllo delle infezioni ha la massima priorità .....	18
Utilizzo ottimizzato delle apparecchiature con Planmeca Insights™.....	20
<b>Scegliete la vostra comparazione migliore .....</b>	<b>22</b>
Planmeca Pro50™ .....	24
Provate il livello avanzato dei riuniti .....	24
Planmeca Compact™ i5 .....	26
Fatto per operare con efficienza.....	26
Planmeca Compact™ i Classic.....	28
Il classico moderno dell'odontoiatria.....	28
Planmeca Compact™ i3 .....	30
Compatto, rapido e intelligente .....	30
Planmeca Pro50™ Chair.....	32
La poltrona per un comfort senza eguali.....	32
<b>Specifiche tecniche .....</b>	<b>34</b>

# Qualità e design ergonomico eccezionali

## Presentazione del nostro Presidente



“Sono lieto di presentarvi la nostra straordinaria gamma di riuniti che unisce il meglio dell’ergonomia ad un comfort eccezionale per il paziente. Sono davvero orgoglioso dei nostri prodotti innovativi: già da mezzo secolo lavoriamo a stretto contatto con i professionisti del settore per creare nuovi riuniti all’avanguardia che stabiliscono nuovi standard nel settore.

Ciò che ci differenzia dalla concorrenza è che l'intero sviluppo del prodotto di base e la produzione avvengono in Finlandia, garantendo una qualità ineguagliabile e un'attenzione ai dettagli in ogni fase del processo. Il nostro obiettivo è di rendere il vostro lavoro più sicuro e piacevole, fornendo ai vostri pazienti la migliore esperienza di trattamento possibile.

E dietro le quinte disponiamo anche di un team di professionisti dedicato alla ricerca e allo sviluppo, tutti concentrati nel creare prodotti di alta qualità per soddisfare le vostre esigenze cliniche. Sono quindi entusiasta di invitarvi a scoprire i nostri riuniti avanzati e trovare la soluzione perfetta che fa al caso vostro.”

**Heikki Kyösti**  
Presidente e fondatore  
Planmeca Group

# Riuniti Planmeca: creati per una cura migliore del paziente

*Rinomati per la loro bellezza, durevolezza e ingegnosità tecnica, i riuniti Planmeca sono progettati tenendo presente il personale odontoiatrico e il paziente. Lo sviluppo dei nostri prodotti è sempre guidato da quattro valori fondamentali: ergonomia, sicurezza, comfort ed estetica. Aderendo a questi valori in tutto ciò che facciamo, siamo stati in grado di creare soluzioni che consentono ai dentisti di concentrarsi sul fornire la migliore cura del paziente, mentre la tecnologia si prende cura del resto. Vi invitiamo ad esplorare le qualità eccezionali che sono un denominatore comune di tutti i nostri riuniti.*



# Accesso agevole, consulto comodo

*I nostri riuniti offrono un accesso agevole ai pazienti di tutte le età e corporature e forniscono posizioni comode per le discussioni pre-trattamento e post-trattamento.*



## Accesso/uscita agevoli

Il poggiambe pieghevole facilita l'ingresso e l'uscita dalla poltrona – un aspetto particolarmente importante per gli anziani ed i pazienti disabili. Per supportare ulteriormente l'ingresso e l'uscita del paziente, la poltrona può essere dotata di braccioli girevoli.

## Consulto faccia a faccia

I nostri riuniti consentono al paziente di vivere la prima visita in una comoda posizione a sedere, pur mantenendo il contatto visivo. Ciò contribuisce a creare un'atmosfera rilassante e a infondere fiducia. Le distrazioni, quali la consolle strumenti, sono tenute al di fuori della linea di contatto visivo diretto del paziente.

# Ergonomia ideale

*Lavoriamo a stretto contatto con i professionisti delle cure dentali e introduciamo le migliori modalità per garantire il massimo comfort e un flusso di lavoro omogeneo. I nostri riuniti consentono di lavorare a due o a quattro mani – supportando sempre un'ottima ergonomia e rendendo il vostro lavoro più semplice ed efficiente.*

## Supporto del flusso di lavoro ergonomico

I nostri riuniti sono stati progettati per rendere il lavoro di tutti i giorni più agevole e meno stressante. La poltrona sospesa con lo schienale avvolgente e la base piccola del gruppo idrico consentono un accesso ideale alla zona da trattare, consentendo di mantenere una posizione operativa ergonomica per tutta la giornata, senza movimenti o sforzi inutili. I movimenti del braccio dispensatore lineari e ampi consentono di scegliere la posizione operativa preferita, mentre i braccetti strumenti bilanciati garantiscono un utilizzo ergonomico degli strumenti, poiché per utilizzarli sono necessari solo piccoli movimenti. Ciò riduce al minimo lo sforzo su braccia, polsi e spalle.

## La posizione operativa preferita: adattabilità perfetta

- Ideale per l'odontoiatria a due e quattro mani
- Si adatta a tutte le posizioni tra la posizione 7 e 3 ore
- Consente di lavorare nella posizione seduta o in piedi



# Paziente rilassato

Design moderno  
e slanciato

*Le nostre straordinarie innovazioni rendono le sedute di trattamento più comode e rilassanti per i pazienti, agevolando il vostro lavoro. Grazie al posizionamento e al supporto accurati, i nostri riuniti consentono di concentrarsi sull'erogazione di un trattamento clinico di alta qualità.*

## **Poltrona progettata ergonomicamente**

Il design della poltrona segue la forma del corpo del paziente e fornisce un supporto stabile e confortevole. I nostri riuniti possono anche essere dotati di braccioli per offrire un supporto paziente supplementare.

## **Comfort imbattibile per il paziente**

La selleria del Planmeca **Ultra Relax™** è adatta al peso e al calore corporeo del paziente per un comfort superiore del paziente stesso. Ciò è particolarmente apprezzato nelle sessioni di trattamento più lunghe. Un paziente posizionato comodamente è più rilassato, consentendovi di concentrarvi sul trattamento clinico.

# Progettato per durare

*Il nostro forte impegno nella ricerca e nello sviluppo guida tutto ciò che facciamo. Siamo appassionati di design e diamo sempre la massima priorità al comfort, alla sicurezza e alla facilità d'uso rispetto a tutto il resto – e lo facciamo senza compromessi. I nostri riuniti leader del settore sono pratici, funzionali e hanno un design accattivante.*

**Solidi,  
in alluminio  
resistente  
e riciclabile**

## Design leggero

Tutti i riuniti Planmecca sono caratterizzati dal nostro inconfondibile design, semplice ed elegante. Grazie all'ampio spazio disponibile su ogni lato, le nostre unità altamente compatte consentono al personale odontoiatrico di lavorare liberamente e comodamente nella posizione preferita.

## Superfici lucide, durata eccellente

Utilizziamo parti in alluminio e una verniciatura epossidica per la massima durevolezza. Le loro superfici senza soluzione di continuità e verniciate a polvere soddisfano i più severi requisiti per il controllo delle infezioni.

## Modularità perfetta

Tutti i nostri riuniti sono progettati a prova di futuro. Ecco perché è facile aggiornarli con le ultime funzionalità e innovazioni nel campo odontoiatrico.

## Design pluripremiato

Il nostro obiettivo è di creare prodotti durevoli e dal design accattivante che resisteranno alla prova del tempo – con un'attenzione senza precedenti ai dettagli. Ogni prodotto che sviluppiamo è di altissima qualità per contribuire a trasmettere un'immagine professionale del vostro studio odontoiatrico e infondere fiducia nei vostri pazienti.



reddot winner 2020

FENNIAPRIZE 20  
HONOURABLE MENTION



reddot award 2016  
winner

# I dettagli che fanno la differenza



## Documentazione del paziente semplice

È possibile accedere in modo agevole a tutti i dati clinici rendendo la documentazione del paziente semplice e diretta.

## Vasto campo luminoso

La lampada operativa Planmeca Solanna® assicura un'eccellente visibilità in ogni angolo della zona da trattare.

## Posizioni di lavoro confortevoli

L'ampio intervallo di regolazione in altezza consente di lavorare comodamente nella posizione eretta, mentre la posizione della poltrona molto bassa consente anche di trattare i pazienti nella posizione semi-reclinata.

## Ampio spazio per le gambe

Il piccolo piedistallo della poltrona e il piccolo gruppo idrico ottimizzano lo spazio per le gambe, sia per il dentista che per l'assistente – consentendo all'intero team di avvicinarsi il più possibile al paziente.

## Consolle strumenti progettata con eleganza

Il nostro posizionamento agevole della consolle consente di inserire gli strumenti nella posizione ergonomica ottimale. La consolle può anche essere spostata sul lato assistente per un flusso di lavoro veloce ed efficiente. Gli strumenti con connettori rapidi sono intercambiabili dall'utente.

## Impostazioni personali facilmente disponibili

Planmeca PlanID™ consente di accedere alle impostazioni personali di qualsiasi riunito in clinica facendo passare semplicemente una scheda.

## Facile da usare

L'intuitivo touch panel è semplice e facile da usare grazie alle funzioni personalizzabili del riunito, alle posizioni del trattamento e alle impostazioni dello strumento.

## Impugnatura comoda e sforzi ridotti al minimo

I braccetti strumento di classe mondiale offrono un bilanciamento ottimale e supportano l'uso ergonomico degli strumenti.

## Poggiagambe pieghevole

Il poggiagambe automatico agevola l'ingresso e l'uscita del paziente dalla poltrona, garantendo un flusso di lavoro regolare. Offre anche un eccellente comfort al paziente ed è pratico per le consultazioni medico-paziente e i trattamenti protesici.

## Accesso illimitato dell'operatore

La parte superiore stretta dello schienale consente al personale odontoiatrico di avvicinarsi il più possibile alla zona da trattare.



## Lampade operative Planmeca

Nelle cure dentali ogni dettaglio conta ed è per questo che la lampada operativa è uno strumento di lavoro essenziale. Le nostre lampade operative offrono un'illuminazione superiore, grande ergonomia, un utilizzo igienico e a mani libere nonché molte funzioni intelligenti che garantiscono un flusso di lavoro omogeneo.

## Planmeca Solanna®

Perfetta visibilità su tutta l'area da trattare grazie alla luminosità e alla temperatura di colore regolabili.



## Planmeca Solanna® Vision

Una lampada intelligente con telecamere 4K e microfoni integrati che consente di acquisire sia immagini fisse che video di alta qualità in modo agevole. Un ottimo strumento di documentazione, consultazione e comunicazione.



# Colori in evidenza

Per completare lo splendido design del dentale ci vuole il tocco personale dato dai vostri colori preferiti. Selezionate i colori perfetti della nostra suggestiva collezione e create il look dei vostri sogni!

## Sellerie di alta qualità per un comfort durevole

Le sellerie **Comfy™** sono in ecopelle durevole. La forma sottile assicura un facile raggiungimento dell'area da trattare e il design senza soluzione di continuità consente una facile pulizia e migliora la prevenzione dalle infezioni.

Le sellerie **Ultra Relax™**, fabbricati in ecopelle estremamente durevole e in spugna viscoelastica, si adattano perfettamente all'anatomia del paziente, consentendo il rilassamento anche durante le sedute di trattamento più lunghe.

## Colori intensi e brillanti

Le sellerie Comfy e Ultra Relax sono disponibili in un'ampia gamma di colori alla moda.

Le nostre tonalità metalliche aggiungono un tocco luminoso al riunito. La collezione Gem propone colori che riflettono la luce, per un effetto prezioso. Le tonalità metalliche e la collezione Gem sono disponibili per le sellerie Ultra Relax.



Fucsia	Ultra Relax ✓	Comfy ✓
Cassis	Ultra Relax ✓	
Purple	Ultra Relax ✓	Comfy ✓
Red	Ultra Relax ✓	Comfy ✓
Carnival	Ultra Relax ✓	
Sun	Ultra Relax ✓	
Lime	Ultra Relax ✓	Comfy ✓
Green Bean	Ultra Relax ✓	
Metallic Pine	Ultra Relax ✓	
Petrol	Ultra Relax ✓	Comfy ✓
Sky	Ultra Relax ✓	Comfy ✓
Azure	Ultra Relax ✓	Comfy ✓
Steel Blue		Comfy ✓
Deep Sea Blue		Comfy ✓
Metallic Blue	Ultra Relax ✓	
Baltic	Ultra Relax ✓	
Dark Blue		Comfy ✓
Diplomat Blue	Ultra Relax ✓	
Gem Midnight Blue	Ultra Relax ✓	
Hazel		Comfy ✓
Walnut	Ultra Relax ✓	
Coffee		Comfy ✓
Metallic Gold	Ultra Relax ✓	
Metallic Sand	Ultra Relax ✓	
Gem Champagne Sparkle	Ultra Relax ✓	
Metallic Silver	Ultra Relax ✓	
Urban Grey		Comfy ✓
Graphite	Ultra Relax ✓	Comfy ✓
Black	Ultra Relax ✓	Comfy ✓
Gem Carbon Black	Ultra Relax ✓	



I campioni di colore sono solamente indicativi e potrebbero differire leggermente dai colori veri e propri della selleria.

# Il controllo delle infezioni ha la massima priorità

Il controllo delle infezioni e l'acqua pulita sono sempre stati elementi essenziali per il design e lo sviluppo dei nostri prodotti. Anni di stretta collaborazione con le principali facoltà odontoiatriche nel campo della microbiologia hanno generato soluzioni scientificamente e complessivamente collaudate per il controllo delle infezioni del riunito, sia internamente, sia esternamente.



Utilizzo senza sforzi



## La più facile protezione possibile contro le infezioni esterne

Le superfici lisce e uniformi dei nostri riuniti agevolano la pulizia, garantendo un controllo impeccabile delle infezioni esterne. Le superfici metalliche sono estremamente durevoli e resistenti ai detergenti. Tutti i componenti critici possono essere autoclavati e la bacchetta può essere rimossa per agevolare la pulizia.

## Acqua pulita - sempre

Le nostre soluzioni per il trattamento dell'acqua garantiscono che tutta l'acqua che entra nella bocca del paziente sia pulita, offrendo un ambiente sicuro sia ai pazienti, sia al personale odontoiatrico.

## Risultati superiori per tubi di aspirazione più puliti

Abbiamo progettato un sistema innovativo per la pulizia dei tubi di aspirazione e dei filtri. Il sistema di pulizia dei tubi d'aspirazione (STCS) di Planmeca semplifica e automatizza notevolmente il processo di disinfezione dei riuniti – garantendo un ambiente di trattamento sicuro e la pulizia complessiva del sistema di aspirazione.

L'efficienza del STCS di Planmeca è stata stabilita da uno studio\* indipendente condotto presso la clinica odontoiatrica universitaria di Dublino.

\* Boyle MA, O'Donnell MJ, Russell RJ, Galvin N, Swan J, Coleman DC. Overcoming the problem of residual microbial contamination in dental suction units left by conventional disinfection using novel single component suction handpieces in combination with automated flood disinfection. Journal of Dentistry. 2015; 43(10):1268-1279. doi: 10.1016/j.jdent.2015.07.018. PMID: 26248229.

# Utilizzo ottimizzato delle apparecchiature con Planmeca Insights™

Massimizzate l'efficienza della vostra clinica grazie a dati e informazioni fruibili dal vostro parco di apparecchiature Planmeca. Dai singoli dispositivi ai poliambulatori multisede, Planmeca Insights™ offre informazioni in tempo reale sullo stato, sull'utilizzo e sulle esigenze di manutenzione del dispositivo.

## Migliore pianificazione, formazione e processo decisionale

I dati completi del dispositivo possono essere utilizzati per verificare che la vostra preziosa apparecchiatura sia sottoposta a una manutenzione corretta, in linea con le prassi concordate. Inoltre, le informazioni dettagliate sull'utilizzo offrono una visione su come e quando i dispositivi vengono utilizzati per prendere decisioni più consapevoli. I protocolli di pulizia specifici del dispositivo possono essere monitorati attraverso la piattaforma. I dati possono anche essere confrontati tra più sedi per migliorare la gestione clinica e ottimizzare i flussi di lavoro.





## Riduzione al minimo dei tempi di inattività del dispositivo

I messaggi automatici sugli stati del dispositivo o sui problemi riscontrati possono essere programmati per avvisare le persone giuste, come il personale addetto alla manutenzione. I dati dei singoli dispositivi possono essere utilizzati per ottimizzare i tempi di manutenzione e risolvere i problemi, persino prima che si verifichino. Se necessario, i registri dei dispositivi possono essere utilizzati per un'analisi più dettagliata del loro funzionamento.

Planmeca Insights™ supporta in modo completo i dispositivi Planmeca. Per i riuniti Planmeca, la piattaforma offre una gamma di funzionalità intelligenti, come ad esempio:

- Stati e attività attuali del dispositivo
- Informazioni sulla manutenzione
- Dati sull'utilizzo
- Informazioni sul flusso di lavoro
- Messaggi di aiuto e di errore
- Monitoraggio dei protocolli di pulizia specifici del dispositivo

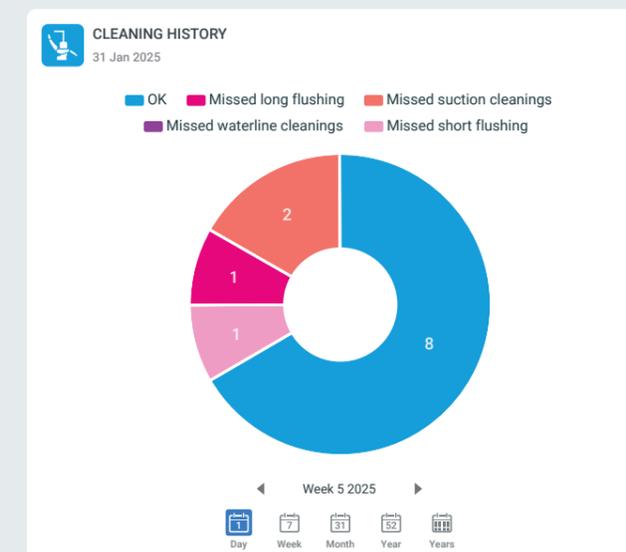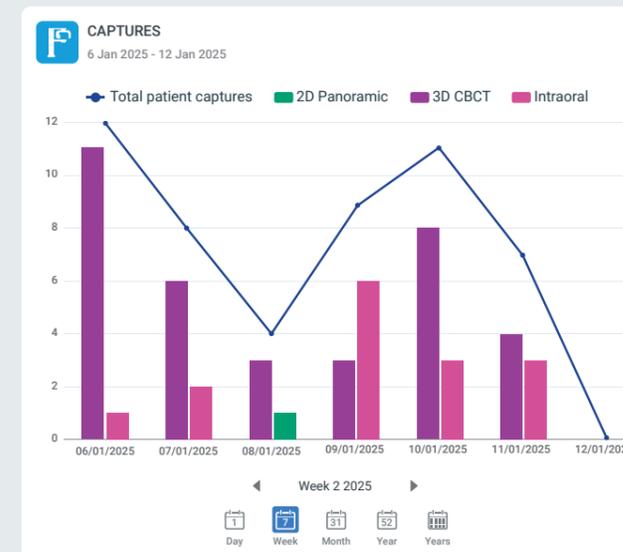

# Scegliete la vostra comparazione migliore

La nostra rivoluzionaria gamma di riuniti e poltrone conta già decine di migliaia di utenti soddisfatti in tutto il mondo ed è in continua evoluzione per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di cliniche e specializzazioni dentali. La nostra linea di prodotti include cinque opzioni tra cui è possibile scegliere, ognuna delle quali è stata progettata per offrire la migliore ergonomia al personale odontoiatrico e la più piacevole esperienza di trattamento per pazienti di tutte le età e corporature.



Planmecca Pro50™



Planmecca Compact™ i5



Planmecca Compact™ i Classic



Planmecca Compact™ i3



Planmecca Pro50™ Chair

Qual è il modello più adatto alle vostre esigenze?

## Planmecca Pro50™

Il riunito di livello premium è stato progettato per dare risalto al livello successivo dei riuniti, quelli dotati di tecnologia, ergonomia simmetrica, qualità e controllo delle infezioni all'avanguardia. Le funzionalità intelligenti offrono all'utente un'esperienza di alto livello senza precedenti.

## Planmecca Compact™ i5

Planmecca Compact™ i5 è un riunito elegante e raffinato. L'ultima generazione della nota famiglia Compact è progettata per durare nel tempo e realizzata per ottenere prestazioni di alto livello.

## Planmecca Compact™ i Classic

Il classico moderno dell'odontoiatria: una scelta funzionale che offre tutte le funzionalità necessarie per un flusso di lavoro omogeneo e confortevole.

## Planmecca Compact™ i3

La nostra unità più piccola, un vero salvaspazio, consente ai professionisti dell'odontoiatria, sia destrorsi che mancini, di lavorare comodamente in ogni posizione.

## Planmecca Pro50™ Chair

La nostra poltrona, robusta ma elegante al tempo stesso, unisce funzionalità, flessibilità e massimo comfort per il paziente.



« Quando si lavora con un ottimo riunito, non è nemmeno necessario prestarci attenzione perché consente di concentrarsi sul proprio lavoro. Impercettibile in senso positivo: questo è ciò che sono i riuniti di Planmecca.

Dr Johanna Kukila  
Helsinki, Finlandia

# Planmeca Pro50™

## Provate il livello avanzato dei riuniti

Con oltre 50 anni di esperienza nella progettazione e nella produzione di apparecchiature odontoiatriche, Planmeca è impegnata nello sviluppo continuo e nell'eccellenza artigianale. Il nuovo riunito **Planmeca Pro50™** è il risultato di uno sviluppo continuo: un riunito senza precedenti.

## Ergonomia dinamica

La poltrona a sollevamento verticale del riunito **Planmeca Pro50™**, unica nel suo genere, è regolabile in altezza da 39 a 89 cm. Inoltre, è possibile ruotare il gruppo idrico da entrambi i lati della poltrona, per garantire la stessa esperienza di lavoro sia per gli utenti mancini sia per quelli destrorsi. Ciò consente ai professionisti delle cure dentali di qualsiasi statura, alti o bassi, di lavorare nella posizione che preferiscono, sia seduti che in piedi.

Lo schienale sottile della poltrona e il suo piccolo piedistallo offrono un ampio spazio di lavoro intorno al riunito, garantendo che il medico e l'assistente possano essere il più vicini possibile alla testa del paziente. I braccetti strumento bilanciati garantiscono un uso ergonomico degli strumenti.



## Esperienza utente intuitiva

Il touch screen da 7" dell'unità, facile da usare, garantisce una navigazione agevole attraverso l'interfaccia utente intuitiva. Per coloro che desiderano una visione più ampia e una maggiore flessibilità, l'interfaccia può essere estesa al touch screen interattivo **Planmeca Halo™**. Semplifica tutti gli aspetti delle attività cliniche quotidiane, dall'accesso ai dati dei pazienti alla gestione del riunito. Inoltre, il monitor è un ottimo strumento per l'educazione dei pazienti e consente di aggiornare in tempo reale i registri dentali durante i trattamenti.



## Design accattivante

Nel corso degli anni, i riuniti Planmeca hanno ricevuto diversi premi per il loro design funzionale e riconoscibile. In un contesto clinico, un riunito dal design sapientemente realizzato e dall'aspetto moderno trasmette un'immagine di alta qualità, instaura fiducia e consente ai pazienti di rilassarsi.

**Planmeca Pro50™** offre tutti i migliori dettagli di design per cui i nostri prodotti sono noti. Rappresenta il design finlandese al suo meglio: compatto, elegante, leggero, silenzioso, confortevole, robusto, adattabile e durevole.



# Planmecca Compact™ i5

Fatto per operare con efficienza

Il raffinato ed elegante Planmecca Compact™ i5 è stato progettato sulla base di diversi decenni di ricerca ed esperienza. Combinando una tecnologia rivoluzionaria con dettagli di design di lusso, questa unità intelligente soddisfa anche le richieste più esigenti. Leggero ma potente, è il riunito sognato da tutti.

## Il flusso di lavoro più armonico

Planmecca Compact™ i5 è stato progettato per fornire il flusso di lavoro più armonico per l'intero personale odontoiatrico. Il suo design leggero e i movimenti fluidi aiutano a mantenere una posizione operativa ergonomica per tutta la giornata. Tutto è facilmente a portata di mano, rendendo il lavoro quotidiano meno faticoso e il più piacevole possibile.

## Operazioni di routine più veloci per un flusso dei pazienti maggiormente efficiente

In Planmecca Compact i5 tutte le funzioni essenziali per il controllo delle infezioni sono integrate e organizzate in modo razionale nei rispettivi scomparti. Le procedure di pulizia sono automatizzate e l'indicatore LED sul riunito informa sul loro stato di avanzamento. Queste funzioni aiutano ad accelerare il controllo delle infezioni, che a loro volta significano un flusso di pazienti più veloce e un migliore controllo qualità. Planmecca Compact i5 è la risposta perfetta alle sempre maggiori esigenze dell'odontoiatria di oggi.

## Cinque generazioni di miglioramento continuo

La nostra gamma di riuniti Planmecca Compact™ viene utilizzata da decine di migliaia di utenti in tutto il mondo, i quali ci hanno fornito un feedback continuo e prezioso consentendoci di perfezionare il nostro riunito in modo che soddisfi le esigenze attuali e future dei professionisti del settore. Planmecca Compact i5 è il culmine di cinque generazioni dedicate al miglioramento continuo.



« Uno dei motivi per cui ho scelto Planmecca Compact™ i5 è il suo bellissimo design. La maggior parte dei riuniti sono grandi e pesanti, mentre il mio riunito sembra molto moderno e sottile, anche se è robusto e stabile.

**Dr Thomas Rosner**  
Grigioni, Svizzera



## LE MODALITÀ DI LAVORO CHE AVETE SEMPRE DESIDERATO

Esistono tante preferenze di lavoro quanti sono i professionisti dell'odontoiatria. Planmecca Compact i5 offre numerosi tipi di braccio dispensatore e una vasta gamma di strumenti che potete scegliere per soddisfare le vostre esigenze e requisiti specifici.

- 1 Braccio dispensatore transtoracico da 520 mm con strumenti bilanciati
- 2 Braccio dispensatore transtoracico da 340 mm con strumenti bilanciati
- 3 Braccio dispensatore transtoracico con strumenti a tubi pendenti
- 4 Braccio dispensatore laterale con strumenti a tubi pendenti
- 5 Carrello dispensatore con strumenti a tubi pendenti
- 6 Carrello indipendente con strumenti a tubi pendenti



# Planmecca Compact™ i Classic

## Il classico moderno dell'odontoiatria

*Planmecca Compact™ i Classic è il classico moderno della nostra gamma di riuniti: una scelta funzionale che offre tutte le caratteristiche e gli strumenti necessari per un flusso di lavoro omogeneo. Costruito per il comfort e la facilità d'uso, combina i migliori vantaggi delle nostre soluzioni di design ergonomiche e pratiche.*

### Facile da imparare, facile da usare

Planmecca Compact™ i Classic è stato progettato per un flusso di lavoro omogeneo e una facilità d'uso superiore. Analogamente a tutti i nostri riuniti, è dotato di un touch panel semplice e intuitivo che guida l'utente nella lingua preferita e consente di regolare tutte le funzioni essenziali del riunito, dello strumento e del controllo delle infezioni. Il riunito e gli strumenti possono anche essere azionati direttamente dalla pedaliera, lasciando le mani libere per il trattamento del paziente.

### Uso ergonomico degli strumenti

I braccetti strumenti bilanciati garantiscono un flusso di lavoro ergonomico, poiché sono necessari solo piccoli movimenti per utilizzare gli strumenti. Ciò riduce al minimo lo sforzo su braccia, polsi e spalle. Il riunito può anche essere dotato di strumenti a tubi pendenti. Gli strumenti liberamente intercambiabili e i facili movimenti della console consentono di adattare rapidamente l'unità per soddisfare le preferenze personali.



« La selleria **Ultra Relax™** aiuta i pazienti a sentirsi a proprio agio, e spesso lo menzionano anche loro. In quanto utente, mi sento molto a mio agio, e l'interfaccia touch screen è semplicemente ideale per me.

**Dr Narimen Djerbi**  
Tunisi, Tunisia

### Un'esperienza di trattamento rilassante per il paziente

Planmecca Compact i Classic supporta sempre un'esperienza di trattamento rilassante, anche nelle visite più lunghe. Il design della poltrona segue la forma del corpo del paziente e offre un supporto stabile e confortevole, mentre il poggiatesta a doppia articolazione consente un posizionamento comodo della testa del paziente. I poggibraccia possono essere muniti di un ulteriore supporto. La selleria **Ultra Relax™**, realizzata in pelle artificiale resistente e spugna viscoelastica, garantisce il massimo comfort.



# Planmecca Compact™ i3

## Compatto, rapido e intelligente

Riteniamo che un'ergonomia eccezionale, un flusso di lavoro omogeneo e la facilità d'uso siano una necessità, non un lusso. Il riunito **Planmecca Compact™ i3**, compatto, rapido e intelligente, è la scelta ideale per qualsiasi dentista alla ricerca di una soluzione poco ingombrante. La serie di movimenti flessibili del braccio dispensatore dell'unità consente ai professionisti dell'odontoiatria, sia destrorsi che mancini, di lavorare comodamente in ogni posizione.

## Semplicità senza rinunciare all'efficienza

Planmecca Compact™ i3 è stato progettato per semplificare l'odontoiatria quotidiana. Facile da imparare e utilizzare, è dotato di un touch panel intuitivo che guida l'utente nella propria lingua preferita. Grazie al design essenziale di quest'unità, è semplice eseguire anche le procedure di controllo delle infezioni esterne. L'unità è personalizzabile in base alle preferenze individuali e si può potenziare con funzionalità a propria discrezione, quali uno scanner intraorale integrato.

## Dall'uso destrorso al mancino e viceversa in soli 10 secondi

Planmecca Compact i3 può passare dall'utilizzo destrorso a quello mancino in appena 10 secondi, semplicemente spostando la consolle strumenti, senza muovere la lampada operativa. È quindi una soluzione funzionale per tutte le cliniche dove numerosi dentisti usano lo stesso riunito e lo spazio è limitato.



Scegli la tua opzione di consegna preferita

## Una soluzione rapida e salvaspazio

Planmecca Compact i3 è un'unità di cure dentali realmente flessibile, perfetta per qualsiasi studio, comunque sia disposto al suo interno. Grazie al design per nulla ingombrante e allo schienale stretto, lo spazio di lavoro attorno all'unità è molto ampio e consente all'equipe di lavorare comodamente, sia seduti che in piedi. La piccola consolle strumenti può essere posizionata sopra al paziente, rendendo più semplice mantenere una posizione ergonomica per tutta la giornata. La funzione di rotazione dell'unità è utile per effettuare regolazioni di precisione in base alle proprie preferenze.

## Una scelta ottimale soprattutto per i grandi studi con molti utenti

Il sistema di autenticazione dell'utente **Planmecca PlanID™**, unico nel suo genere, consente ai dentisti di accedere istantaneamente alle proprie impostazioni personali su qualsiasi riunito, con una semplice scheda flash. Ciò consente agli studi di ottimizzare le risorse e usare le proprie apparecchiature in modo flessibile perché i riuniti non devono più essere assegnati a utenti specifici. Le informazioni sull'utilizzo vengono archiviate nel software **Planmecca Romexis®** in modo da offrire il vantaggio ai grandi studi e alle catene di sapere quando, come e da chi è stata usata l'unità.



## Un riunito effettivamente flessibile

- Dall'uso destrorso a mancino in soli 10 secondi
- Ampio intervallo di movimenti del braccio dispensatore
- Spazio di lavoro circostante esteso
- Comode posizioni operative da ore 7 a ore 3
- Funzione di rotazione per regolazioni di precisione



Ideale per l'odontoiatria a due e quattro mani



« Planmecca Compact™ i3 è ergonomico, comodo e semplice da usare con un'ampia gamma di movimenti. Dato che in passato ho avuto problemi alla spalla, stavo cercando un'unità con braccio dispensatore transtoracico e Planmecca aveva la soluzione migliore per me. Mi piace la bellezza e semplicità del design. Anche la conversione da destra a sinistra è molto pratica.

**Dr Esther Azoulay**  
Parigi, Francia

# Planmeca Pro50™ Chair

La poltrona per un comfort senza eguali

La poltrona **Planmeca Pro50™ Chair** è un'ottima combinazione di funzionalità, flessibilità e dettagli a prova di futuro, il tutto racchiuso in un design piacevole e senza tempo. È l'opzione ideale per chi cerca una poltrona robusta ma leggera che offra la migliore ergonomia per il personale odontoiatrico e il massimo comfort per i pazienti. *Prego, si accomodi!*

## Silenziosa e robusta

**Planmeca Pro50™ Chair** è una poltrona moderna e senza tempo caratterizzata dal design leggero ed elegante per cui sono noti i prodotti Planmeca. I motori per uso medico integrati nella poltrona ne rendono i movimenti fluidi e silenziosi, assicurando un ambiente di lavoro tranquillo per il personale odontoiatrico e un'esperienza di trattamento rilassante per il paziente. La poltrona è costruita in alluminio resistente e la sua selleria è disponibile in un'ampia gamma di colori divertenti e accattivanti.

## Eccellente ergonomia

La poltrona **Planmeca Pro50 Chair** offre un'ampia gamma di altezze: l'altezza del sedile del paziente può essere regolata tra 39 cm e 89 cm. Ciò rende la poltrona adatta a diversi utenti e stili di lavoro, consentendo ai professionisti di qualsiasi corporatura di lavorare seduti (su un normale seggiolino o un seggiolino sella) o in piedi. La piccola base della poltrona lascia molto spazio per due paia di gambe, nonché per la pedaliera e per altri dispositivi. Lo spazio aggiuntivo, unito allo schienale sottile e stretto della poltrona, consente al personale odontoiatrico di avvicinarsi al paziente, sempre nella posizione di lavoro più ergonomica.

## Un flusso di lavoro lineare e flessibile

Per i professionisti che lavorano con un mobiletto o un tray a ore 12, l'esclusivo meccanismo di sollevamento della poltrona assicura che la distanza dal poggiatesta rispetto al mobiletto rimanga la stessa ad ogni altezza e che la lampada operativa non debba essere regolata nuovamente al variare dell'altezza della poltrona. Inoltre, la poltrona ha una base mobile opzionale, che agevola il trasferimento in una nuova sala operativa quando necessario.



Prego,  
si accomodi!

## Massimo comfort del paziente

La poltrona **Planmeca Pro50 Chair** è dotata di un poggiatesta pieghevole che facilita l'ingresso e l'uscita e il posizionamento faccia a faccia, una caratteristica molto apprezzata nella comunicazione medico-paziente. Poiché i pazienti hanno diverse altezze e corporature, il peso massimo che può sorreggere la poltrona è di 185 kg. La selleria **Ultra Relax™** si adatta perfettamente alle forme del corpo del paziente, garantendo comfort e relax anche durante le sessioni di trattamento più lunghe.

## Dalla Finlandia

Tutti i prodotti **Planmeca** sono progettati e realizzati nel nostro impianto di produzione in Finlandia, utilizzando le tecnologie più innovative e i migliori materiali. Grazie a decenni di esperienza nella progettazione e realizzazione di poltrone odontoiatriche, valutiamo attentamente i riscontri della clientela per migliorare e affinare continuamente i nostri prodotti, sempre realizzati in condizioni di lavoro rispettose dei lavoratori.

# Specifiche tecniche

## Dati tecnici

	Planmeca Pro50	Planmeca Compact i5	Planmeca Compact i Classic	Planmeca Compact i3	Planmeca Pro50 Chair
Requisiti di alimentazione	100-240 VAC	100 VAC, 115 VAC, 220-240 VAC	100 VAC, 115 VAC, 220-240 VAC	100 VAC, 115 VAC, 220-240 VAC	100-240 VAC
Frequenza di alimentazione	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Pressione d'ingresso dell'acqua	300-900 kPa	300-900 kPa	300-900 kPa	300-900 kPa	-
Pressione d'ingresso dell'aria	550-900 kPa	550-900 kPa	550-900 kPa	550-900 kPa	-
Peso	220 kg	160 kg	150 kg	130 kg	88 kg
Montaggio	Fissare al pavimento	Fissare al pavimento	Fissare al pavimento	Fissare al pavimento	Fissare al pavimento La versione mobile è opzionale
Telaio	Lega di alluminio pressofusa	Lega di alluminio pressofusa	Lega di alluminio pressofusa	Lega di alluminio pressofusa	Lega di alluminio pressofusa
Colore	Bianco (RAL 9016)	Bianco (RAL 9016)	Bianco (RAL 9016)	Bianco (RAL 9016)	Bianco (RAL 9016)

Planmeca Oy  
CE 0598 [MD] Planmeca Pro50

Planmeca Oy  
CE 0598 [MD] Planmeca Compact i

Planmeca Oy  
CE [MD] Planmeca Pro50 Chair

## Confronto


	Planmeca Pro50	Planmeca Compact i5	Planmeca Compact i Classic	Planmeca Compact i3	Planmeca Pro50 Chair
<b>Tipo di braccio dispensatore</b>					
Braccio dispensatore transtoracico da 520 mm con strumenti bilanciati	✓	✓	✓	✓	
Braccio dispensatore transtoracico da 340 mm con strumenti bilanciati	✓	✓	✓	✓	
Braccio dispensatore transtoracico con strumenti a tubi pendenti		✓	✓	✓	
Braccio dispensatore laterale con strumenti a tubi pendenti		✓			
Carrello dispensatore con strumenti a tubi pendenti		✓		✓	
Carrello indipendente con strumenti a tubi pendenti		✓			
<b>Funzionalità del riunito</b>					
Conversione destra/sinistra	✓	✓	✓	✓	
Poltrona sospesa		✓	✓		
Poltrona montata sul pavimento	✓			✓	✓
Poggiagambe automatico	✓	✓	✓		✓
Rotazione poltrona				✓	
Selleria Ultra Relax™	✓	✓	✓	✓	✓
Selleria Comfy™	✓	✓	✓	✓	✓
Bacinella	✓	✓	✓		
<b>Strumenti e altre opzioni</b>					
5 posizioni degli strumenti	✓	✓	✓	✓	
Posizionamento libero dello strumento (esclusa la siringa)	✓	✓	✓	✓	
Micromotore per implantologia integrato		✓	✓	✓	
Micromotore endodontico integrato	✓	✓	✓	✓	
Localizzatore apice integrato		✓	✓	✓	
Scanner intraorale integrato		✓	✓	✓	
Touch screen interattivo di Planmeca Halo™	✓				
Interfaccia utente del touch panel	✓	✓	✓	✓	
Profili utente per più utenti	✓	✓	✓	✓	
Pedaliera senza fili		✓	✓		
Integrazione dell'unità radiografica intraorale		✓	✓		
<b>Funzionalità di controllo delle infezioni</b>					
Supporti di pulizia integrati	✓	✓	✓		
Pulizia periodica del circuito idrico	✓	✓	✓	✓	
Disinfezione continua dell'acqua		✓	✓		
Sistema automatizzato per la pulizia dei tubi d'aspirazione (i tubi vengono riempiti completamente)	✓	✓	✓		
Pulizia dei tubi d'aspirazione manuale (aspirazione tramite i tubi)			✓	✓	✓
Contenitori integrati per i disinfettanti	✓	✓			
<b>Collegamento in rete</b>					
Monitoraggio e diagnosi da remoto con il modulo Planmeca Romexis® Clinic Management		✓	✓	✓	



# Planmeca Compact i3


## Dimensioni

Braccio dispensatore transtoracico con strumenti bilanciati

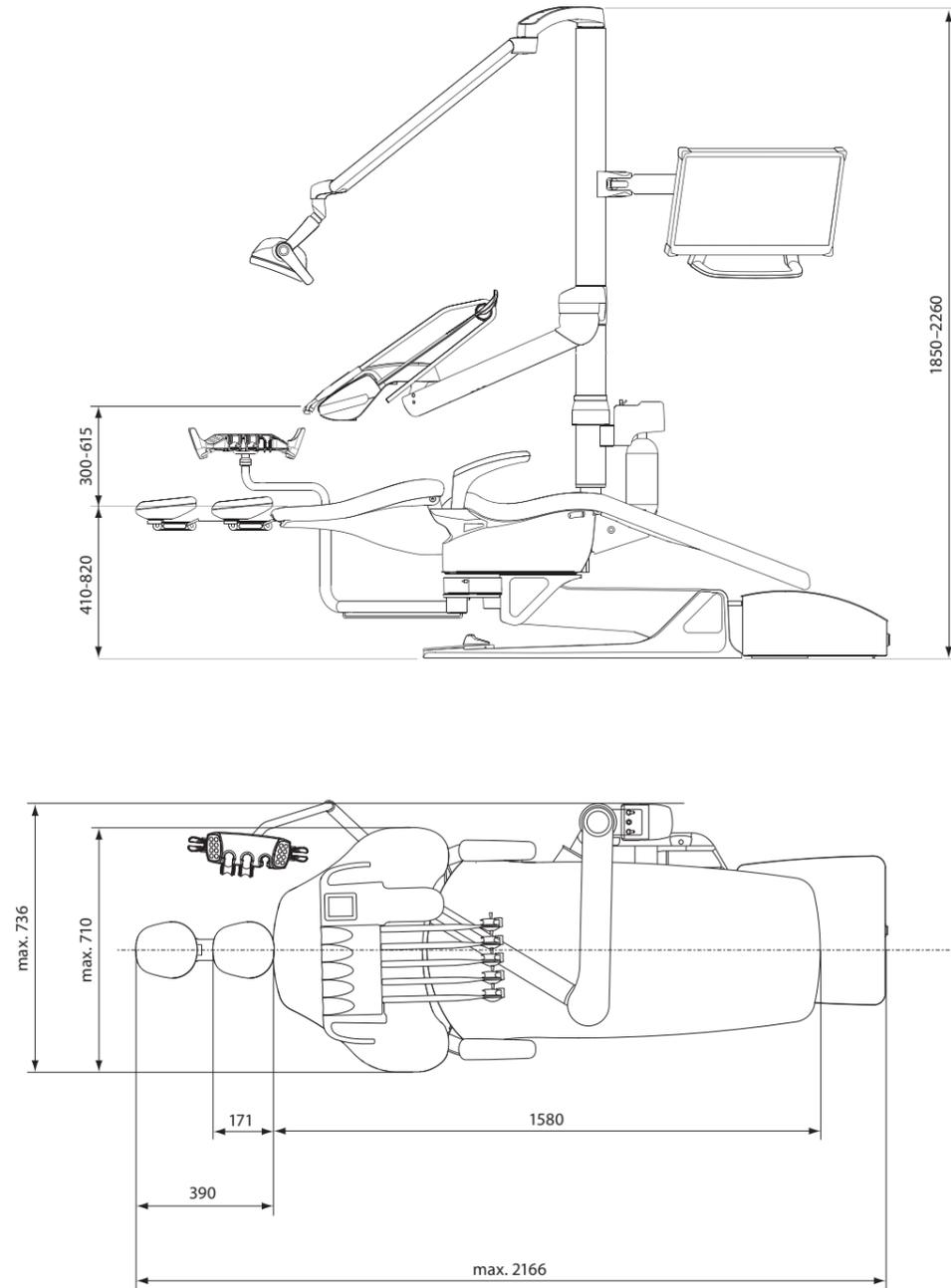

# Planmeca Pro50™ Chair

## Dimensioni

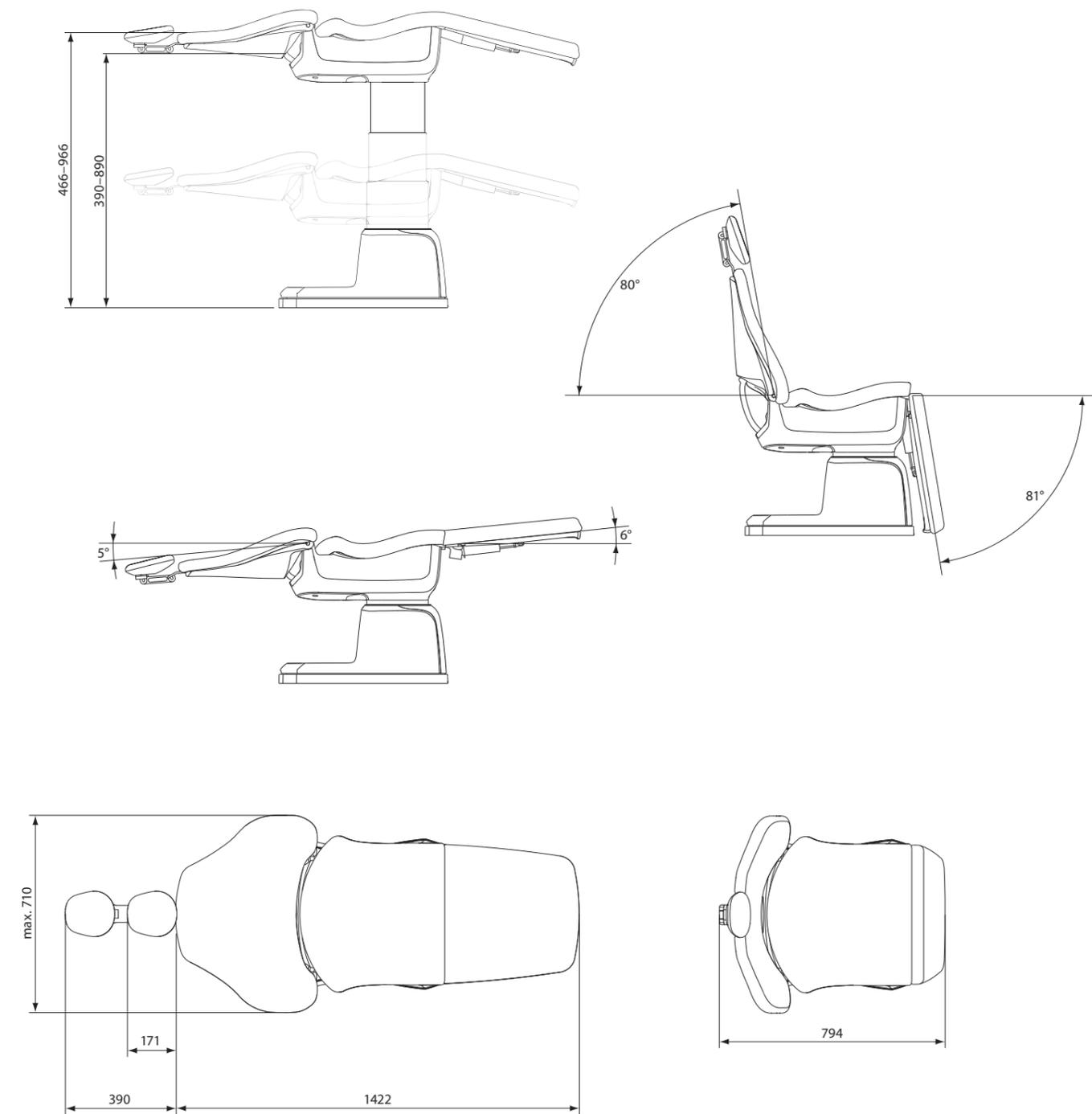



Planmeca Oy progetta e produce una linea completa di apparecchiature leader del settore per l'assistenza sanitaria, inclusi i dispositivi di imaging 2D e 3D, le soluzioni CAD/CAM, i riuniti e il software. Planmeca Oy, la società controllante del gruppo finlandese Planmeca, è fortemente impegnata nella fornitura delle cure dentali migliori tramite l'innovazione, ed è la più grande azienda privata nel settore.

Seguitemi sui social media!



**PLANMECA**

Asentajankatu 6 | 00880 Helsinki | Finlandia | tel. +358 20 7795 500 | fax +358 20 7795 555 | sales@planmeca.com | www.planmeca.it

Dental Network s.r.l. | Viale del Lavoro 38 | Vicenza | Italia | tel. +39 0444963200 | fax +39 0444568586 | info@dentalnetwork.it

Le immagini del presente catalogo possono contenere optional non compresi nella versione base o non disponibili in alcuni paesi.  
Il produttore si riserva il diritto di modificare le macchine illustrate.

Planmeca, All in one, Anamat Plus, Cobra, Comfy, Digital perfection, Economat Plus, Elegant, Flexy, Perio Fresh, PlanEasyMill, Planmeca 4D, Planmeca AINO, Planmeca ARA, Planmeca CAD/CAM, Planmeca CALM, Planmeca Cariosity, Planmeca Chair, Planmeca Clarify, Planmeca Compact, Planmeca ConBo, Planmeca CORE, Planmeca Creo, Planmeca Emerald, Planmeca FIT, Planmeca Imprex, Planmeca Intra, Planmeca iRomexis, Planmeca Lumion, Planmeca Lumo, Planmeca Maximity, Planmeca Minea, Planmeca Minendo, Planmeca Minetto, Planmeca mRomexis, Planmeca Noma, Planmeca Olo, Planmeca Online, Planmeca Piezon, Planmeca PlanCAD, Planmeca PlanCAM, Planmeca PlanClear, Planmeca PlanDesk, Planmeca PlanID, Planmeca PlanMill, Planmeca Planosil, Planmeca PlanPure, Planmeca PlanScan, Planmeca PlanView, Planmeca Pro50, Planmeca ProCeph, Planmeca ProFace, Planmeca ProID, Planmeca ProMax, Planmeca ProModel, Planmeca ProOne, Planmeca ProScanner, Planmeca ProSensor, Planmeca ProX, Planmeca Romexis, Planmeca Serenus, Planmeca SingLED, Planmeca SmartGUI, Planmeca Solanna, Planmeca Sovereign, Planmeca Ultra Low Dose, Planmeca Verity, Planmeca Vision, Planmeca Viso, Planmeca Waterline Cleaning System, Planmeca Xtremity, Proline Dental Stool, ProTouch, SmartPan, SmartTouch, Trendy e Ultra Relax sono marchi registrati e non registrati di Planmeca in vari Paesi.

10032992/0325/It