



EDGEAPEX^{HP}™ EDGEFLOW™ EDGEPACK™ EDGEAPEX™

EDGEPOWER

MORE POWER FOR ENDODONTICS

La linea Edge Power è stata progettata per lavorare in sinergia perfetta con le nostre **soluzioni NiTi e di otturazione.**





EDGEAPEX HP™

EDGEAPEX HP™ Motore endodontico - Progettato per migliorare la precisione e l'efficienza nei trattamenti endodontici.
Cordless e con localizzatore apicale integrato per una massima praticità.



Codice: **10067142**

Vantaggi

- Compatibile con la maggior parte delle sistematiche endodontiche esistenti per una migliore adattabilità
- Eccezionale versatilità con due opzioni di movimento: rotazione continua e movimento reciprocante
- Motore portatile a batteria con ricarica wireless, accensione/spegnimento automatico e localizzatore apicale integrato per la massima praticità
- Motore brushless ad alte prestazioni con funzionamento silenzioso e durata prolungata
- Adotta la tecnologia di feedback in tempo reale e il contrangolo con torque dinamico, prevenendo efficacemente la separazione dei file

Specifiche tecniche:

- Grande flessibilità con un angolo di rotazione di 360°
- Testina ultra-piccola e collo sottile per una maggiore visibilità e un migliore accesso alle aree difficili
- 10 memorie disponibili e impostazioni pre-programmate per i sistemi di file EdgeEndo per risparmiare tempo
- 4 movimenti disponibili: CW / CCW / REC / ATR
- Funzioni apicali multiple
- Display regolabile per destri e mancini
- Intervallo di giri/minuto: 100 - 2500
- Intervallo di torque: 0,4 - 5,0 Ncm

Contenuto della confezione

Manipolo motore, base di ricarica, contrangolo, cavo di misurazione, gancio labiale (2), clip portatile (4), sonda tattile (2), adattatore di potenza, cover protettiva in silicone (2), ugello spray, O-Ring (2), guaine monouso (1 confezione).

Ricambi ordinabili

Prodotto	Incluso nella dotazione iniziale	Codice	Immagine
CAVO DI MISURAZIONE	1 per Pack	10067272	
SONDA TATTILE	2 per Pack	10067275	
GANCIO LABIALE	2 per Pack	10067274	
CONTRANGOLO CA 161	1 per Pack	10067302	
CLIP PORTAFIL	4 per Pack	10067273	

Garanzia: 2 anni per il motore del manipolo, base di ricarica e adattatore di potenza. 1 anno per l'attacco del contrangolo. 6 mesi per gli accessori.



EDGEFLOW™

EDGEFLOW™ Estrusore guttaperca - Rotazione a 360° con eccellente fluidità della guttaperca per un'erogazione uniforme e senza bolle, che garantisce otturazioni perfette.



Codice: **10067144**

Vantaggi

- Eccellente fluidità della guttaperca per un'erogazione uniforme e senza bolle, che garantisce otturazioni perfette
- Design wireless per il massimo comfort e facilità di utilizzo
- Sistema a doppia batteria che offre maggiore autonomia, consentendo circa 100 otturazioni canalari
- Display preciso ed intuitivo per monitorare al meglio la guttaperca rimanente

Specifiche tecniche:

- Arresto automatico del riscaldamento dopo il timeout; spegnimento automatico dopo il timeout
- Base di ricarica con batteria
- Monitoraggio della temperatura
- Gli aghi monouso vengono forniti preconfezionati con guttaperca
- Aghi da iniezione riutilizzabili disponibili in varie misure e lunghezze
- Temperature preimpostate: 100°C, 120°C, 150°C, 180°C, 200°C
- Velocità di iniezione: lenta, media, veloce

Contenuto della confezione

Unità principale, base di ricarica, adattatore di alimentazione, batteria (2), cappuccio termoisolante (2), chiave per ago, anello di guttaperca, ago E23G-M, ago E23G-L, ago E25G-L (2).

Ricambi ordinabili

Prodotto	Incluso nella dotazione iniziale	Codice	Immagine
CHIAVE PER AGO	1 per Pack	Disponibile su richiesta	
BATTERIA AGLI IONI DI LITIO	2 per Pack	Disponibile su richiesta	
CAPPUCCIO DI ISOLAMENTO TERMICO	2 per Pack	Disponibile su richiesta	

Aghi

Prodotto	Incluso nella dotazione iniziale	Codice	Immagine
EDGEFLOW AGO E20G-S	Non incluso	10067291	
EDGEFLOW AGO E20G-M	Non incluso	10067292	
EDGEFLOW AGO E20G-L	Non incluso	10067293	
EDGEFLOW AGO E23G-M	1 per Pack	10067288	
EDGEFLOW AGO E23G-L	1 per Pack	10067289	
EDGEFLOW AGO E25G-M	Non incluso	10067294	
EDGEFLOW AGO E25G-L	2 per Pack	10067290	

Garanzia: 1 anno per il dispositivo.



EDGEPACK™

EDGEPACK™ Condensatore guttaperca - Grazie ad un controllo della temperatura ad alta precisione con temperature di lavoro preimpostate, garantisce una compatibilità ottimale con diversi tipi di guttaperca per un'otturazione precisa e affidabile.



Codice: **10067143**

Vantaggi

- Dispositivo di condensazione/compattazione della guttaperca senza fili per un funzionamento continuo
- Design ergonomico e ambidestro per un maggiore comfort e usabilità
- Punta pre-curvata da 0,35 mm per un migliore accesso e una migliore penetrazione nei canali radicolari stretti
- Controllo della temperatura ad alta precisione per un'otturazione costante e affidabile
- Efficiente sistema di taglio con sistema ad alta conversione
- Dimensioni compatte per una facile pulizia e una comoda conservazione
- Indicazioni visive e acustiche per una maggiore sicurezza durante le procedure

Specifiche tecniche:

- Opzioni di temperatura preimpostate: 150° C, 180° C, 200° C e 230° C
- Caratteristiche avanzate legate al tempo:
 - Tempo di riscaldamento ultrarapido di 0,2 secondi
 - Spegnimento automatico dopo 10 secondi per una maggiore efficienza energetica
 - Batteria di lunga durata: fino a 4 ore per carica

Contenuto della confezione

Base di ricarica, adattatore di potenza, puntale WP4004, puntale WP4504, puntale WP5506, puntale WP5508, guaine termiche isolanti per puntali (4).

Ricambi ordinabili

Prodotto	Incluso nella dotazione iniziale	Codice	Immagine
BASE DI RICARICA	1 per Pack	Disponibile su richiesta	

Puntali

Prodotto	Incluso nella dotazione iniziale	Codice	Immagine	Prodotto	Incluso nella dotazione iniziale	Codice	Immagine
EDGEPACK PUNTALE WP4004	1 per Pack	10067280		EDGEPACK PUNTALE WP5508	1 per Pack	10067283	
EDGEPACK PUNTALE WP4504	1 per Pack	10067281		EDGEPACK PUNTALE WP5508L	Non incluso	10067286	
EDGEPACK PUNTALE WP5004	Non incluso	10067284		EDGEPACK PUNTALE WP5510	Non incluso	10067285	
EDGEPACK PUNTALE WP5506	1 per Pack	10067282		EDGEPACK PUNTALE WP6012	Non incluso	10067287	

Garanzia: 1 anno per il dispositivo e punte.



EDGEAPEX™

EDGEAPEX™ Localizzatore apicale - Localizza efficacemente la costrizione apicale, consentendo una precisa determinazione della lunghezza di lavoro del canale radicolare per ottenere risultati ottimali.



Codice: **10067142**

Vantaggi

EdgeApex è un localizzatore apicale e un tester di vitalità pulpare.

Utilizza una tecnologia multifrequenza all'avanguardia, combinata con un processore di segnale digitale ad alta efficienza, che offre precisione e velocità di elaborazione delle informazioni ottimali.

I test di vitalità pulpare cercano di esaminare la presenza del flusso sanguigno della polpa per indicare l'effettiva condizione di salute.

Contenuto della confezione

EDGEAPEX™ Localizzatore Apicale

- Base di ricarica (1)
- Cavo di misurazione (1)
- Clip portatile (4)
- Gancio labiale (5)
- Sonda tattile (2)
- Sonda per test pulpare (2)
- Tester (1)
- Batteria agli ioni di litio (1)
- Adattatore di potenza (1)
- Righello endodontico (1)
- Visualizzazione amplificata del forame apicale (1)

Ricambi ordinabili

Prodotto	Incluso nella dotazione iniziale	Codice	Immagine
CAVO DI MISURAZIONE	1 per Pack	10067276	
SONDA TATTILE	2 per Pack	10067279	
GANCIO LABIALE	5 per Pack	10067278	
ENDO RULER	1 per Pack	Disponibile su richiesta	
CLIP PORTAFILE	4 per Pack	10067277	
SONDA PER TEST PULPARE	2 per Pack	Disponibile su richiesta	

Garanzia: 1 anno per il dispositivo. 6 mesi per gli accessori.

EDGEPOWER WORKFLOW

Scopri la gamma completa dei nostri prodotti per l'endodonzia sul nostro sito: www.edgeendo.com

1. APERTURA

- EDGEAPEX HP™
- Strumentazione per GLIDE PATH
- EDGE APEX™ Locator



2. SAGOMATURA

- EDGEAPEX HP™
- Strumentazione EDGEENDO*

*o sistemica alternativa




3. IRRIGAZIONE

- Ponte di carta



4. OTTURAZIONE

- EDGEBIOCERAMIC™ Sealer
- Ponte di gutta
- EDGECore™
- EDGEFill™
- EDGEFlow™
- EDGEPack™

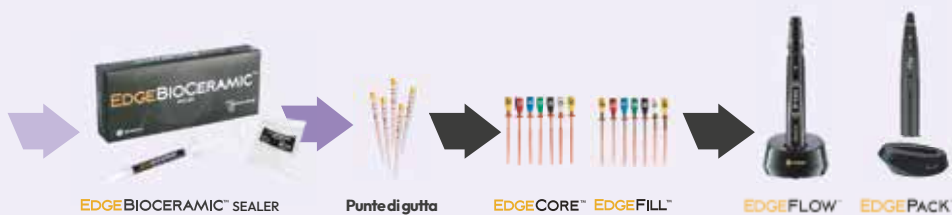

Distribuito da:

dental trey
A HENRY SCHEIN COMPANY

Dental Trey srl

Via Partisani, 3 47016 Fiumana - Predappio (FC) Italia
T +39 0543 929111 - F +39 0543 940659
commerciale@dentaltray.it - www.dentaltray.it



SEGUICI SUI
SOCIAL MEDIA