

PERFORMANCE. PRICE. TECHNOLOGY.



EDGEENDO

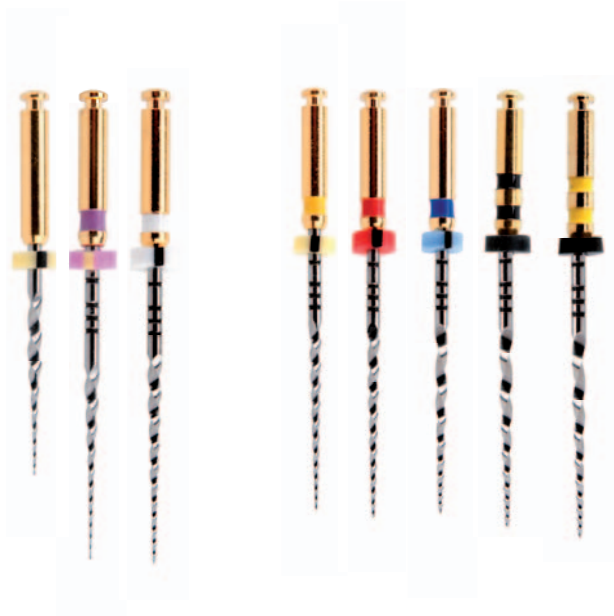
Distributore esclusivo

 dental trey

PERFORMANCE. PRICE.

QUALITÀ ECCELLENTE E TECNOLOGIE AVANZATE

EDGETAPER™



IL FILE DALLE GRANDI PERFORMANCE!

- File NiTi
- SX, S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5, Assortimento
- 19 mm, 21 mm, 25 mm, 31 mm



Grande
flessibilità



Alta
resistenza

EDGEGLIDEPATH™



UN UNICO STRUMENTO PER LA TECNICA GLIDE PATH

- File NiTi trattati termicamente con tecnologia FireWire
- Sostituisce i file manuali #15, 20, 25, 30, 35 nella tecnica step back e #1, 2, 3 Gates Glidden
- 21 mm, 25 mm, 31 mm

TECHNOLOGY.

EDGETAPER™

PLATINUM



FLESSIBILITÀ E RESISTENZA

- File NiTi trattati termicamente con tecnologia FireWire
- SX, S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5, Assortimento
- 19 mm, 21 mm, 25 mm, 31 mm



Grande
flessibilità



Privo di
memoria elastica



Alta
resistenza

TECHNOLOGY









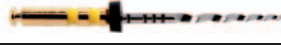

La forza della tecnologia FireWire™








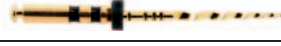
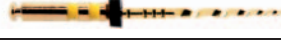

Nuova tecnologia per la strumentazione rotante. Rende il file più flessibile incrementandone la resistenza alla fatica. Il trattamento FireWire™ elimina la memoria elastica preservando l'anatomia del canale e la dentina, e permette allo strumento di seguire con precisione il percorso canalare in modo semplice ed efficace.

I file EdgeEndo® garantiscono velocità e sicurezza nel trattamento endodontico.

ASSORTIMENTO STRUMENTI NiTi

EDGEGLIDEPATH™				<i>confezione da 4 file</i>			
	Conicità	Misura punta	Lunghezza				
			19 mm	21 mm	25 mm	31 mm	
	02	19		10050433	10050437	10050438	

EDGETAPER™				<i>confezione da 6 file</i>			
	Conicità	Misura punta	Lunghezza				
			19 mm	21 mm	25 mm	31 mm	
	SX	12v	19	10050479			
	S1	06v	17		10050473	10050474	10050475
	S2	07v	20		10050476	10050477	10050478
	F1	06v	20		10050436	10050459	10050460
	F2	05v	25		10050461	10050462	10050463
	F3	05v	30		10050464	10050465	10050466
	F4	05v	40		10050467	10050468	10050469
	F5	04v	50		10050470	10050471	10050472
	Assortimento SX, S1, S2, F1, F2, F3				10050534	10050535	

EDGETAPER PLATINUM™				<i>confezione da 6 file</i>			
	Conicità	Misura punta	Lunghezza				
			19 mm	21 mm	25 mm	31 mm	
	SX	12v	19	10050458			
	S1	06v	17		10050452	10050453	10050454
	S2	07v	20		10050455	10050456	10050457
	F1	06v	20		10050434	10050435	10050439
	F2	05v	25		10050440	10050441	10050442
	F3	05v	30		10050443	10050444	10050445
	F4	05v	40		10050446	10050447	10050448
	F5	04v	50		10050449	10050450	10050451
	Assortimento SX, S1, S2, F1, F2, F3				10050532	10050533	

EdgeTaper™ e EdgeTaper Platinum™: strumenti a conicità variabile.

SISTEMA DI OTTURAZIONE **EDGEENDO**

EDGEFILL™ PER EDGETAPER™



- Otturatori termoplastici per EdgeTaper™ e EdgeTaper Platinum™
- F1 20, F2 25, F3 30, F4 40, F5 50

EDGECORE™ PER EDGETAPER™



- Otturatori termoplastici in guttaperca rosa per EdgeTaper™ e EdgeTaper Platinum™
- F1 20, F2 25, F3 30, F4 40, F5 50
- Con verificatore

EDGEFILL™ PER EDGETAPER™			<i>confezione da 6 otturatori</i>	
		ISO	Codice	
	F1	20	10050507	
	F2	25	10050508	
	F3	30	10050509	
	F4	40	10050510	
	F5	50	10050511	



EDGECORE™ PER EDGETAPER™			<i>confezione da 5 otturatori + 1 verificatore</i>	
		ISO	Codice	
	F1	20	10050506	
	F2	25	10050512	
	F3	30	10050513	
	F4	40	10050514	
	F5	50	10050515	



SISTEMA DI OTTURAZIONE **EDGEENDO**

EDGETAPER™ GUTTA POINTS*



- Coni di guttaperca per EdgeTaper™ e EdgeTaper Platinum™ da utilizzare per la tecnica del cono singolo
- F1 20, F2 25, F3 30, F4 40, F5 50
- Lunghezza 29 mm

EDGETAPER™ PAPER POINTS*



- Coni di carta per EdgeTaper™ e EdgeTaper Platinum™
- F1 20, F2 25, F3 30, F4 40, F5 50
- Lunghezza 29 mm

EDGETAPER™ GUTTA POINTS*			<i>confezione da 60 coni</i>
Coni di guttaperca		ISO	Codice
	F1	20	10050519
	F2	25	10050520
	F3	30	10050521
	F4	40	10050522
	F5	50	10050523



EDGETAPER™ PAPER POINTS*			<i>confezione da 60 coni</i>
Coni di carta		ISO	Codice
	F1	20	10050527
	F2	25	10050528
	F3	30	10050529
	F4	40	10050530
	F5	50	10050531



*Prossima disponibilità.

dental trey

Distributore esclusivo:

Dental Trey srl

Via Partisani, 3

47016 Fiumana - Predappio (FC), ITALIA

T +39 0543 929111, F +39 0543 940659

www.dental Trey.it - commerciale@dental Trey.it

