

WHITE DENTAL BEAUTY

PROFESSIONAL  
COMPO *Site* SYSTEM



WHITE  
DENTAL  
BEAUTY

PROFESSIONAL  
COMPOSITE  
SYSTEM

EDUCATED BY STYLE ITALIANO

WHITE  
DENTAL  
BEAUTY

EDUCATED BY  
STYLE ITALIANO

WHITE DENTAL BEAUTY





White Dental Beauty Professional CompoSite System è stato progettato e sviluppato per soddisfare, nella tua pratica quotidiana, la crescente domanda dei pazienti che vogliono un sorriso sano e smagliante!

Il sistema comprende una gamma di colori e materiali innovativi, ed è stato elaborato sulla base di oltre 25 anni di ricerche e di esperienze degli oltre 220mila soci della *community* StyleItaliano. Il risultato è un trattamento mini-invasivo che garantisce semplicità, tempi rapidi, efficienza e predicibilità a costi contenuti.

Spesso i trattamenti estetici di *smile makeover* richiedono tempi lunghi e costi elevati, come avviene nel caso delle faccette in porcellana, per cui sono necessari diversi appuntamenti, l'intervento del laboratorio e delicate procedure di *bonding*.

White Dental Beauty Professional CompoSite opera in sinergia con il sistema di sbiancamento White Dental Beauty, offrendo una soluzione semplice ed economica per soddisfare le aspettative estetiche dei pazienti.



PROFESSIONAL  
COMPO *Site* SYSTEM

White Dental Beauty

PROFESSIONAL  
**COMPO** *Site*  
SYSTEM

La gamma di colori di White Dental Beauty Compo*Site* comprende cinque tonalità di bianco a valore elevato (**Si** 0, 0.5, 1,2,3) che offrono la gradazione ideale per una perfetta integrazione con i denti naturali o sbiancati. Un aspetto molto importante è l'introduzione di **Si** 0.5, destinata a ridurre l'attuale distanza cromatica tra 1 e 0, che spesso risulta eccessiva. Il sorriso bianco smagliante desiderato dai pazienti può essere ottenuto in un unico strato, rafforzando la caratterizzazione in fase di finalizzazione con l'aggiunta di un sottilissimo strato di smalto universale (0,5mm) per conferire vitalità, giovinezza e caratteristiche di opalescenza ai restauri.



Questo è il sistema ideale non solo per lo *smile makeover* in composito con tecnica diretta, ma anche per la ricostruzione di denti singoli nei settori anteriori e posteriori.

Compo*Site* lavora in totale sinergia con i sistemi di sbiancamento dentale White Dental Beauty, che raccomandiamo di utilizzare come base per i trattamenti di estetica del sorriso.



Si 0 Si 0.5 Si 1 Si 2 Si 3



Si E Enamel Si P Posterior



Si M Masque Si MP Multiplo

TONALITÀ  
DI BIANCO

SCELTE  
DAI DENTISTI  
PER I DENTISTI

# COMPO*Site* GAMMA COLORI

M A T E R I A L I  
INTELLIGENTI & ESCLUSIVI

## **Si** 0, **Si** 0.5, **Si** 1, **Si** 2, **Si** 3

Noti come “le cinque tonalità del bianco”, questi colori sono stati ideati per le procedure di sbiancamento e restauro, al fine di consentire una perfetta integrazione cromatica con denti sbiancati o naturali.

Grazie alla loro multifunzionalità questi colori si prestano a essere utilizzati per la mono-stratificazione, nei casi di applicazione diretta di faccette estetiche, o in combinazione con **Si** E per la tecnica a doppio strato.

## **Si** E - Enamel

Il colore di questo smalto è stato ideato per fondersi armoniosamente con tutte le tonalità universali **Si**, grazie alle sue caratteristiche di opalescenza e traslucenza calibrata. È ideale per le procedure a due strati e per un'agevole caratterizzazione del margine incisale.

## **Si** M - Masque, **Si** MP - Multiplo

Ciascuno di questi due colori a consistenza fluida (*flowable*) offre una serie di vantaggi specifici.

**Si** M è composto da una resina chiara opaca che maschera istantaneamente il colore del dente. È ideale per le discromie e per mascherare denti scuri con un solo strato. Fornisce una base neutra per il restauro immediato. **Si** MP è un prodotto *flowable* multifunzione, utilizzabile come sottofondo/liner, per la ricostruzione con tecnica perno/moncone delle lesioni di V Classe e per la cementazione di faccette estetiche o *overlays*.

## **Si** P - Posterior

Questo composito destinato ai settori posteriori, dal colore omogeneo, è caratterizzato da un'opacità universale con ottimale diffusione della luce e si mimetizza perfettamente con il dente, offrendo così in un solo colore la soluzione ideale per la maggioranza delle ricostruzioni nei settori posteriori. Ha una carica elevata di riempitivo (80%) ed è stato ideato specificamente per l'uso con la tecnica di modellazione rapida FMT, per ottenere con semplicità e senza sforzo l'anatomia occlusale desiderata, grazie al lungo tempo di lavorazione in luce ambientale. Presenta elevati valori di resistenza all'abrasione ed è facile da lucidare, per un risultato estetico rapido e ottimale.

L'ottimo grado di viscosità di Compo*Site* unito a un'eccellente lavorabilità e a una consistenza non appiccicosa lo rendono ideale per la modellazione. Compo*Site* offre anche un'elevata lucidabilità, per realizzare restauri invisibili. La fluorescenza naturale e l'eccezionale stabilità del colore ne fanno il prodotto ideale per ottenere risultati estetici di lunga durata.



# WHITE DENTAL BEAUTY COMPOSITE

## KIT




WHITE DENTAL BEAUTY  
COMPOSITE KIT SIRINGHE

1x siringa 4g <b>Si</b> 0	1x siringa 4g <b>Si</b> E
1x siringa 4g <b>Si</b> 0.5	1x siringa 4g <b>Si</b> P
1x siringa 4g <b>Si</b> 1	1x siringa 1.8g <b>Si</b> M
1x siringa 4g <b>Si</b> 2	1x siringa 1.8g <b>Si</b> MP
1x siringa 4g <b>Si</b> 3	20x puntali applicatori



WHITE DENTAL BEAUTY  
COMPOSITE KIT CAPSULE

15x cps 0.25g <b>Si</b> 0	15x cps 0.25g <b>Si</b> E
15x cps 0.25g <b>Si</b> 0.5	15x cps 0.25g <b>Si</b> P
15x cps 0.25g <b>Si</b> 1	1x siringa 1.8g <b>Si</b> M
15x cps 0.25g <b>Si</b> 2	1x siringa 1.8g <b>Si</b> MP
15x cps 0.25g <b>Si</b> 3	20x puntali applicatori

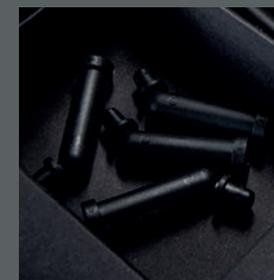

## RICAMBI

### SIRINGA

1x siringa 4g <b>Si</b> 0	1x siringa 4g <b>Si</b> 3
1x siringa 4g <b>Si</b> 0.5	1x siringa 4g <b>Si</b> E
1x siringa 4g <b>Si</b> 1	1x siringa 4g <b>Si</b> P
1x siringa 4g <b>Si</b> 2	

### SIRINGA FLOW

2x 1.8g siringa <b>Si</b> M Masque	2x 1.8g siringa <b>Si</b> MP Multiplo
---------------------------------------	------------------------------------------

### CAPSULE

15x cps 0.25g <b>Si</b> 0	15x cps 0.25g <b>Si</b> 3
15x cps 0.25g <b>Si</b> 0.5	15x cps 0.25g <b>Si</b> E
15x cps 0.25g <b>Si</b> 1	15x cps 0.25g <b>Si</b> P
15x cps 0.25g <b>Si</b> 2	

Il design ergonomico della siringa permette la facile apertura con una sola mano.


Grazie alla sua eccellente lavorabilità non è necessario riscaldare Compo**Site**.

# DATI TECNICI

## WHITE DENTAL BEAUTY COMPOSITE

Riempitivo	80.0 w/w %	DIN 51081
Contrazione da polimerizzazione	2.0 %	Università di Manchester
Resistenza alla flessione (3 punti)	120 MPa	ISO 4049
Assorbimento idrico	18.4 $\mu\text{g} / \text{mm}^3$	ISO 4049
Idrosolubilità	1 $\mu\text{g} / \text{mm}^3$	ISO 4049
Resistenza alla compressione	375 MPa	ISO 9917
Durezza superficiale (Micro-Vickers)	99 MHV	Università di Rostock
Profondità di polimerizzazione (> 500 mW / cm <sup>2</sup> )		
Traslucente	> 2.5 mm / 10 s	ISO 4049
Opaco	> 2.0 mm / 40 s	ISO 4049
Radiopacità	210% Al	ISO 4049

## LUCIDABILITÀ: RISULTATI IN UNITÀ DI RIFLESSIONE (RE)

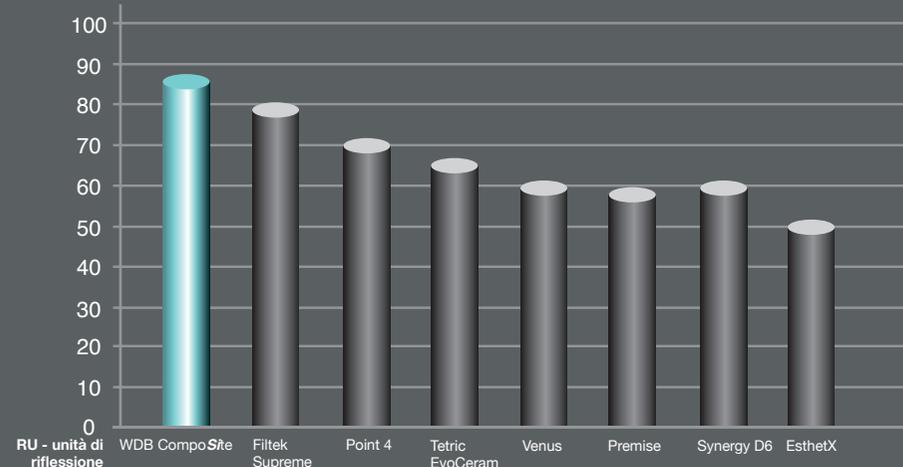

Risultati della lucidatura espressi in unità di riflessione (RE) secondo ISO 2873, con polisher White Dental Beauty Material GmbH 2007. Filtek Supreme, Point 4, Tetric EvoCeram, Venus, Premise, Synergy D6, EsthetX non sono marchi registrati White Dental Beauty.

## WHITE DENTAL BEAUTY COMPOSITE FLOW

Riempitivo	64.0 w/w %	DIN 51081
Resistenza alla flessione (3 punti)	115 MPa	ISO 4049
Assorbimento idrico	27.6 $\mu\text{g} / \text{mm}^3$	ISO 4049
Idrosolubilità	< 1.6 $\mu\text{g} / \text{mm}^3$	ISO 4049
Resistenza alla compressione	367 MPa	ISO 9917
Profondità di polimerizzazione (> 500 mW / cm <sup>2</sup> )		
Traslucente	> 3.0 mm / 10 s	ISO 4049
Opaco	> 1.5 mm / 40 s	ISO 4049
Radiopacità	190% Al	ISO 4049



## C A S I C L I N I C I



MURAD AKHUNDOV

SETTORE POSTERIORE

Il dott. Murad Akhundov ha conseguito la Laurea in Odontoiatria presso la Medical University dell'Azerbaijan.

Dal 2012 ha deciso di dedicarsi esclusivamente all'Odontoiatria estetica adesiva.

Nel 2013 è stato il vincitore del *Pisa Master Course Contest* organizzato da StyleItaliano.

Il dott. Akhundov è socio onorario dell'International dental group: StyleItaliano ed è autore di numerosi articoli pubblicati su riviste internazionali.

In qualità di esperto di estetica dentale tiene corsi e conferenze presso la clinica privata e centro di formazione *Dental Revolution*.



THIAGO OTTOBONI

SETTORE ANTERIORE

Il dott. Thiago Ottoboni si è laureato presso l'UNIMAR Universidade de Marília, ha conseguito una serie di master presso l'UnG in Brasile. Successivamente ha deciso di dedicarsi esclusivamente all'Odontoiatria Restaurativa presso l'Universidade Norte do Paraná-UNOPAR.

Oggi il dott. Ottoboni, con uno studio privato a Blumenau, in Brasile, e la cattedra di docente esperto presso l'Istituto IPPO, è orgoglioso della sua qualifica di "socio Silver" di StyleItaliano. Suoi sono numerosi articoli e capitoli di manuali dedicati all'Odontoiatria Restaurativa.



## SETTORI ANTERIORI MONALDO SARACINELLI



MONALDO  
SARACINELLI

Il dott. Monaldo Saracinelli è stato allievo dei professori Fabio Toffenetti e Riccardo Garberoglio ed esercitatore per gli studenti di odontoiatria nel reparto di Odontoiatria Conservativa dell'Istituto Policattedra di Discipline Odontostomatologiche dell'Università degli Studi di Siena nel 1986. Successivamente è divenuto docente di Biomeccanica masticatoria e Protesi applicate per gli studenti di Odontotecnica.

È socio attivo dell'Accademia Italiana di Conservativa (AIC) dal 2005 e dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Estetica (IAED) dal 2011.



FOTOGRAFIE REALIZZATE CON SISTEMA MDP  
(MOBILE DIGITAL PHOTOGRAPHY) DI SMILELINE



#WHITEOLOGY




IL PARTNER  
PERFETTO



## WORKFLOW DELLA TECNICA DIRETTA

### #WHITEOLOGY

“Lo studio di sorrisi belli e sani, che comprende anatomia, estetica, espressività, sicurezza e felicità”.

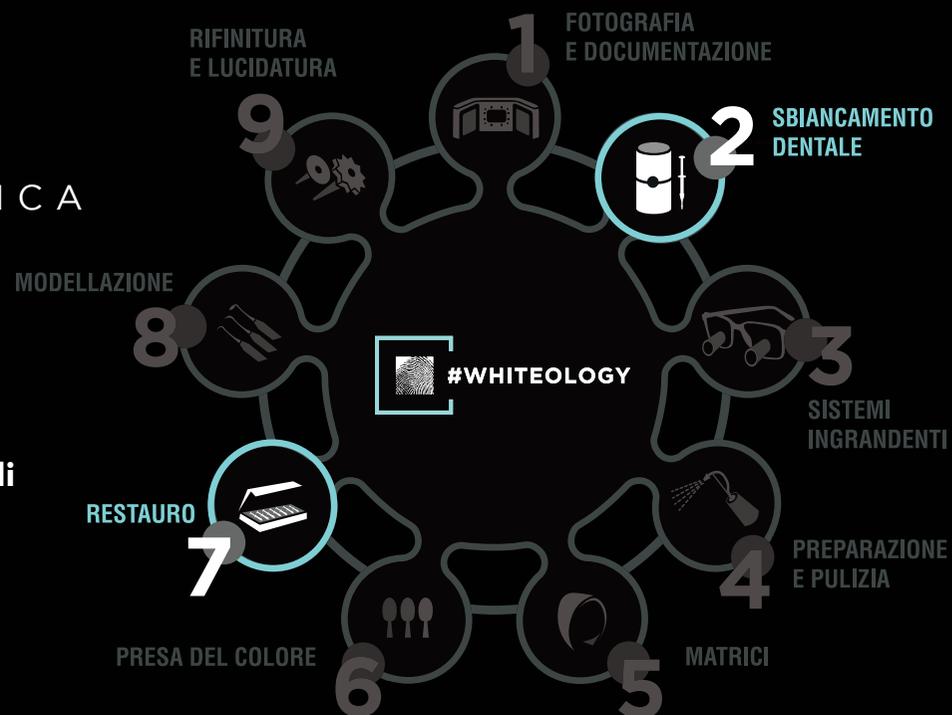

Nata dal desiderio di soddisfare la crescente domanda di un sorriso più bianco da parte dei pazienti, #whiteology offre all'odontoiatra, nella sua pratica clinica quotidiana, la possibilità di restituire al sorriso salute e bellezza, utilizzando metodiche predicibili e ripetibili.

Per molti pazienti una dentatura più bianca segna l'inizio di un viaggio verso un sorriso perfetto; per questo motivo #whiteology rappresenta il perfetto connubio tra lo sbiancamento professionale White Dental Beauty e il sistema restaurativo White Dental Beauty Professional CompoSite. Utilizzati insieme, questi due prodotti consentono un approccio mininvasivo per un design del sorriso predicibile e dai costi contenuti.

Per chi desidera adottare questo esclusivo approccio allo sbiancamento e al restauro dentale, White Dental Beauty e StyleItaliano hanno creato *The Direct Workflow*, un corso di formazione sulle tecniche e sugli strumenti necessari per applicare questo semplice protocollo.

### Accreditamento e Formazione by StyleItaliano



# FORMAZIONE... SCEGLI COME IMPARARE

Il nostro impegno per la formazione ci rende orgogliosi.

Che si svolgano in Italia o all'estero, i nostri corsi, numerosi e diversificati, offrono ai partecipanti l'occasione di imparare divertendosi e stringendo nuove amicizie.



## EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI NEL MONDO:

### GIORNATE SINGOLE

Presentazioni e demo dal vivo

### CORSI PRATICI

Apprendimento *one-to-one* in piccoli gruppi

### VIDEO ONLINE

Apprendimento *step-by-step*



[WHITEDENTALBEAUTY.COM](http://WHITEDENTALBEAUTY.COM)



[whitedentalbeauty.com](http://whitedentalbeauty.com)

 **dental trey**

Dental Trey srl  
Via Partisani, 3 - 47016 Fiumana - Predappio (FC)  
T +39 0543 929111, F +39 0543 940659  
[www.dental Trey.it](http://www.dental Trey.it) - [commerciale@dental Trey.it](mailto:commerciale@dental Trey.it)