
Accessorio HMD


La rivoluzione di una Evoluzione






Tethys H10 diventa anche un termodisinfettore per manipoli


Con l'utilizzo di questo nuovo accessorio, sarà possibile lavare, termodisinfettare ed asciugare fino a 6 manipoli (turbine o manipoli micromotore) contemporaneamente. Utilizzabile su tutti i Tethys H10, anche quelli già installati. Sarà semplicemente necessario un aggiornamento firmware per rendere il termodisinfettore una macchina ancora più completa

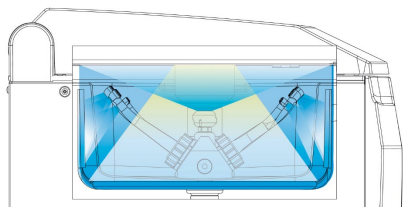


Fase 1 - Lavaggio

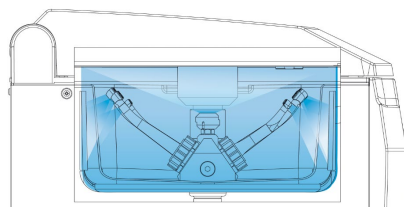

Fase 2 - Risciacquo

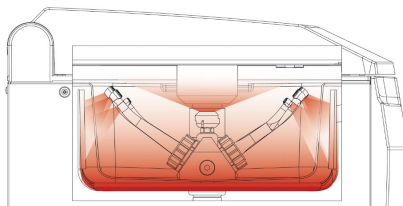

Fase 3 - Termodisinfezione

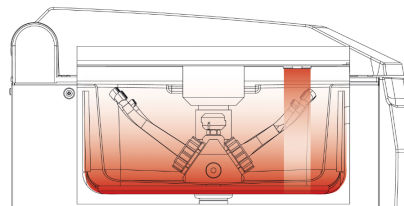

Fase 4 - Asciugatura

Ciclo Manipoli

Con il nuovo ciclo manipoli e l'utilizzo del supporto dedicato, sarà possibile effettuare, in soli 34 minuti, un ciclo composto da:

- Lavaggio interno ed esterno (senza ultrasuoni)
- Termodisinfezione
- Asciugatura





Massima flessibilità

Il supporto potrà essere facilmente montato e smontato per permettere l'utilizzo del cestello tradizionale e mantenere la funzione originale del Tethys H10 di termodisinfettore con ultrasuoni



Adattatori per qualsiasi necessità

L'accessorio HMD permette di trattare:

- Manipoli micromotore
- Turbine
- Punte per ablatore

Basterà inserire l'adattatore specifico per la famiglia di strumenti, al fine di assicurare una corretta pulizia dello strumento.