

# wiser<sub>+</sub>

DENTAL LASER  
INSPIRED BY LIGHT

[doctor-smile.com](http://doctor-smile.com)



# UN UNICO STRUMENTO 5 EFFETTI LASER

**Wiser** si inserisce perfettamente all'interno della clinica odontoiatrica grazie ai molteplici effetti che la luce laser genera sul tessuto bersaglio, determinando benefici terapeutici in tutti i trattamenti.

## CHIRURGICO

il laser è un abile sostituto del bisturi offrendo un taglio preciso, minimamente invasivo, senza sanguinamento, esente da fili di sutura e con una guarigione rapida.

## EMOSTATICO

il laser, grazie al suo effetto termico, induce un'immediata emostasi con cicatrizzazione e chiusura dei vasi sanguigni.

## DECONTAMINANTE

il raggio laser è in grado di distruggere la membrana cellulare dei batteri colpiti ed amplifica ancor di più il suo effetto se affiancato da soluzioni irriganti ad alta concentrazione di ossigeno.

## BIOSTIMOLANTE

da sempre la luce è fonte di energia. Il laser attraverso la sua penetrazione nei tessuti è in grado di stimolare i processi metabolici inducendo la rigenerazione tissutale.

## ANTALGICO

questo permette di evitare, nella maggior parte dei casi l'uso dell'anestesia.



# FAI LA DIFFERENZA GRAZIE AL TUO NUOVO WISER

Gli effetti del laser trovano utilizzo in tutti gli ambiti odontoiatrici: dalla chirurgia alla parodontologia, dall'endodonzia all'implantologia, grazie a **Wiser** puoi mettere la tua firma su ogni intervento.

## ENDODONZIA



Decontaminazione canalare  
Pulpectomia  
Decontaminazione del sito apicale  
Incappucciamento della polpa

## PARODONTOLOGIA



Decontaminazione tasche parodontali  
Biostimolazione  
Trattamento delle recessioni gengivali  
Riduzione delle infiammazioni

## TERAPIA



Desensibilizzazione dentinale  
Afte labiali | Lesioni aftose | Cheiliti  
Terapia antalgica ATM  
Fotobiomodulazione

## CHIRURGIA




Gengivectomia | Gengivoplastica  
Frenulectomia labiale | linguale  
Preparazione del solco protesico  
Incisione e drenaggio ascessi

## IMPIANTI



Decontaminazione perimplantare  
Scopertura impianti  
Biostimolazione post-chirurgia  
Decontaminazione sito post-estrattivo

## CONSERVATIVA

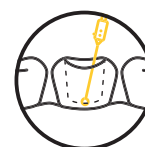

Decontaminazione solchi  
Decontaminazione cavità  
Vetrificazione

## COSMETICA



Sbiancamento dentale  
Emangioma  
Depigmentazione gengivale  
Gummy Smile

## DERMATOLOGIA

(terzo medio inferiore)

Chirurgia dermatologica  
Depigmentazione cutanea  
Biorigenerazione cutanea



# 3 LUNGHEZZE D'ONDA COMBinate: EFFICACIA CLINICA SENZA EGUALI

La combinazione unica di lunghezze d'onda di Wiser lo rendono lo strumento più completo nel trattamento del tessuto molle garantendo il maggiore effetto ablativo con il più elevato comfort per il paziente.

La spiccata affinità con i cromofori emoglobina, melanina e acqua, permette di intervenire in tutti i campi odontoiatrici con una **precisione, efficienza e velocità** mai viste prima.

## 450nm


la lunghezza d'onda blu presenta picco di assorbimento su emoglobina e melanina, per una completa decontaminazione ed una chirurgia rapida, efficace e senza sutura.

## 635nm

indicata nella terapia fotodinamica, biostimolazione ed ossigenazione superficiale dei tessuti.

## 980nm

la più equilibrata delle lunghezze d'onda, garantisce l'amplificazione degli effetti ablativi, decontaminanti e biostimolanti dei tessuti profondi. Un alleato a cui non si può rinunciare.

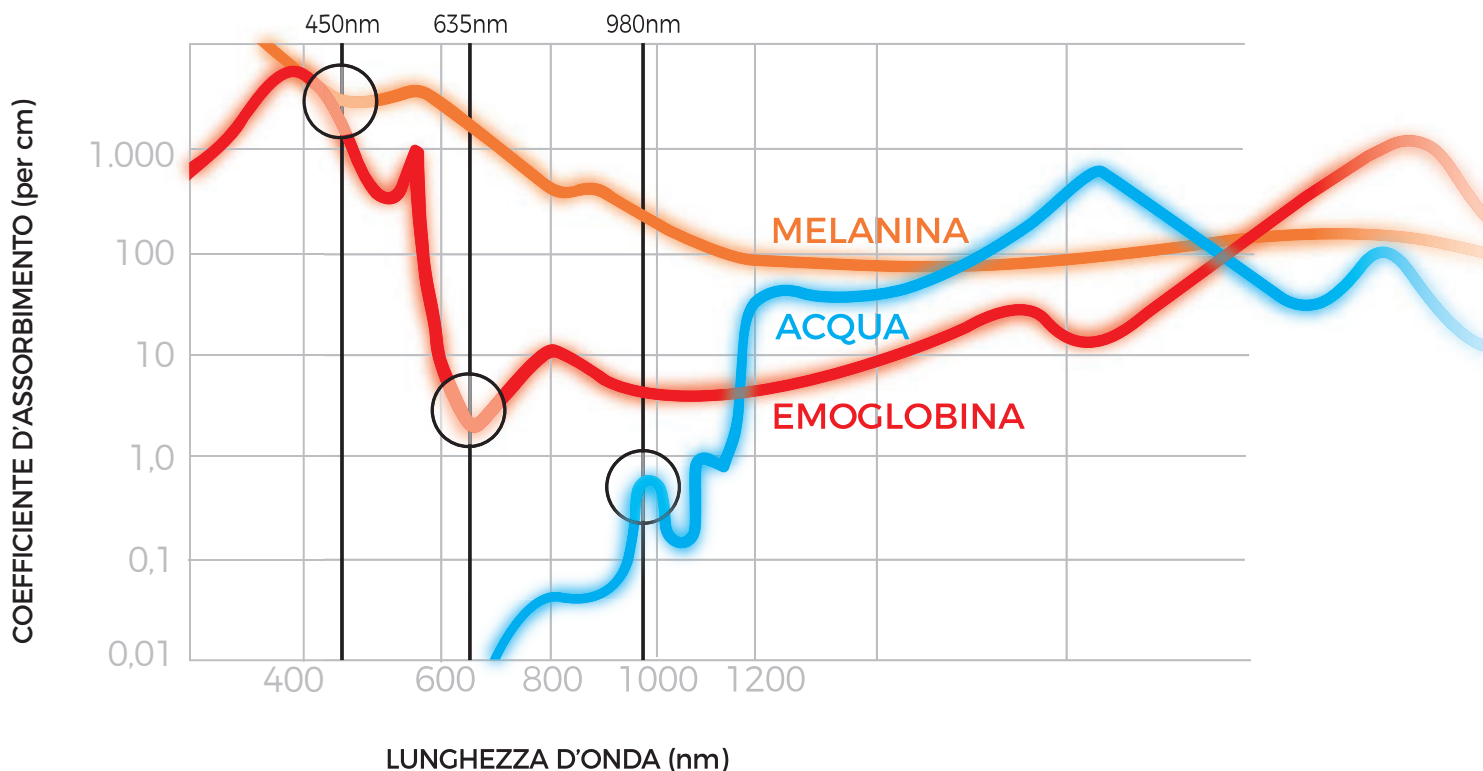

Lavorare con Wiser è un piacere: ogni protocollo clinicamente testato, diventa una "ricetta" specifica con i parametri preimpostati e le indicazioni da seguire passo dopo passo per il miglior risultato clinico.

# PIÙ DI UNO STRUMENTO MEDICO I BENEFICI DA NON PERDERE

## PER IL DENTISTA

Campo operatorio libero da sanguinamento con ottima visibilità del sito  
Ridotto uso di anestetici con aumentato livello di accettazione della terapia  
Minima invasività dei trattamenti per una più facile collaborazione del paziente  
Aumento di soluzioni terapeutiche in risposta alle crescenti esigenze cliniche



## PER IL PAZIENTE

Sedute più brevi e rilassanti grazie all'approccio non invasivo e alla riduzione di anestesia  
Nessun disagio nella fase post-operatoria grazie alla rapida guarigione della patologia  
Risoluzione di patologie importanti per il paziente quali ipersensibilità, herpes e afte  
Garanzia di risultato: il paziente è curato con la migliore tecnologia possibile



## PER LO STUDIO

Crescita della redditività dello studio grazie a ricavi in nuovi ambiti terapeutici  
Elevata soddisfazione dei pazienti frutto di prestazioni senza dolore e senza stress  
Aumento del valore percepito delle terapie con conseguente fidelizzazione del paziente  
Rafforzamento dell'immagine dello studio con forte differenziazione competitiva di zona



# INTERFACCIA USER FRIENDLY: FEELING IMMEDIATO

Il software di Wiser è indicato sia per il nuovo utilizzatore sia per il professionista con più esperienza in campo laser: la modalità **LAP (Laser Assisted Protocols)** guida il dentista lungo gli step dei protocolli in tutti i campi odontoiatrici, garantendo il successo clinico in piena serenità.

La modalità **ADV (Avanzato)** permette di modificare i pre-set a seconda delle esigenze per raggiungere risultati straordinari in tutte le situazioni.



# LAP Assistito

Come funziona la modalità assistita?  
Wiser ti guida nei passaggi

STEP 1

Dopo la terapia tradizionale **irrigare** la tasca parodontale con **SIOXYL+ Solution**

STEP 2

**Irradiare** la tasca con movimento disto-mesiale e apico-coronale per 30 secondi

STEP 3


**Ripetere** le due procedure precedenti per tre volte per sito

STEP 4

**Ottimo lavoro!**  
Il trattamento è stato completato con successo

## SET DI ACCESSORI COMPLETO

Usare **Wiser** è comodo, piacevole e intuitivo: grazie al pratico sistema di tip intercambiabili, eseguire la migliore terapia è questione di secondi.

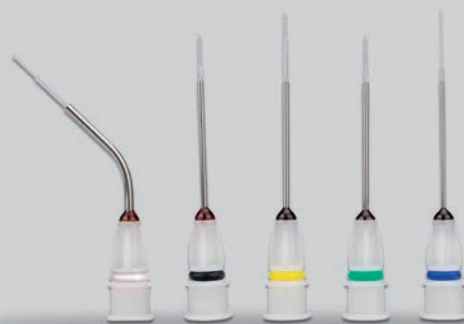

È possibile ampliare la gamma di trattamenti grazie ai manipoli esclusivi di Doctor Smile:

**FLAT TOP** HANDPIECE  
**AB 2799** ORIGINAL

Manipolo Onda Piana brevettato, fondamentale per la fotobiomodulazione e la terapia del dolore.




Ideato dai Prof.ri **Stefano** e **Alberico Benedicenti** in esclusiva per Doctor Smile



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

**REVIVE**  
SKIN PROCESS

Specifico per il trattamento del terzo medio inferiore.

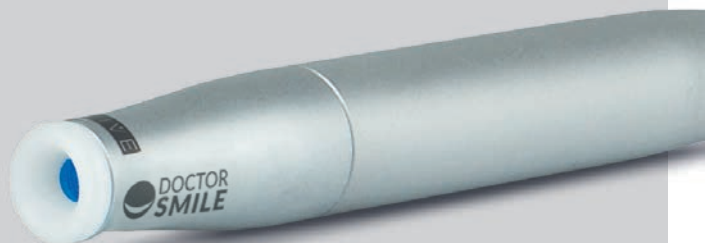

# COMUNICAZIONE EFFICACE

- Wiser si integra con le altre tecnologie digitali
- Aumento del valore percepito delle terapie
- È messaggio di una odontoiatria moderna

Grazie a Wiser con un solo strumento trasmetterai sicurezza clinica, qualità del servizio ed eccellenza della struttura.



# DISTINTIVITÀ E FEDELITÀ

- Crescita professionale
- Differenziazione competitiva
- Prestigio e reputazione

“Il mio dentista è differente!” Rafforza la tua immagine e diventa ancor di più il professionista di riferimento nella tua zona grazie alle funzionalità di Wiser laser. La differenza tra essere leader o follower.





# RAPIDO RITORNO DI INVESTIMENTO

- Prestazioni a valore aggiunto
- Aumento della profittabilità
- Incremento dei piani di trattamento


Investimento, non spesa. Wiser laser aumenta la redditività del tuo studio, generando nuovi ricavi e opportunità di business in ambiti terapeutici che oggi non affronti.



## PATIENT WOW EXPERIENCE

- Comfort nel trattamento
- Seduta odontoiatrica senza paura
- Soddisfazione per il tuo paziente


Paziente per scelta, non per necessità.  
L'odontoiatria laser fa la differenza!  
Con trattamenti specifici e minimamente invasivi,  
sedersi al riunito non sarà più come prima.

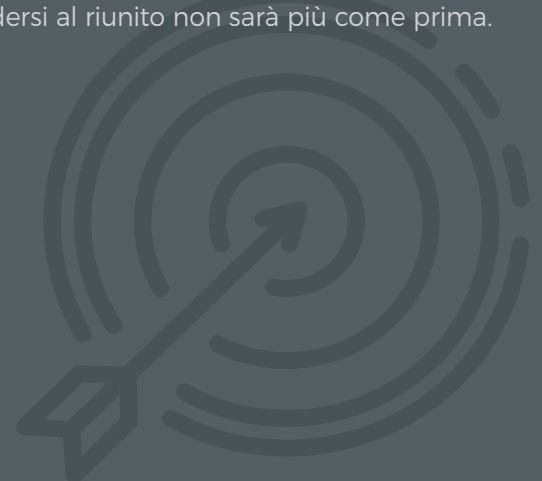

# FUNZIONALITÀ UNICHE

Wiser è sempre connesso alla rete **Wi-Fi** del tuo studio, permettendogli di essere costantemente aggiornato.

Attraverso la funzionalità **Cloud Dashboard**, puoi visualizzare sul **tuo pc** il reale utilizzo quotidiano: un ottimo modo per incrementare la proposta laser nei trattamenti più **frequenti**, più **richiesti** e di più **alto valore**.

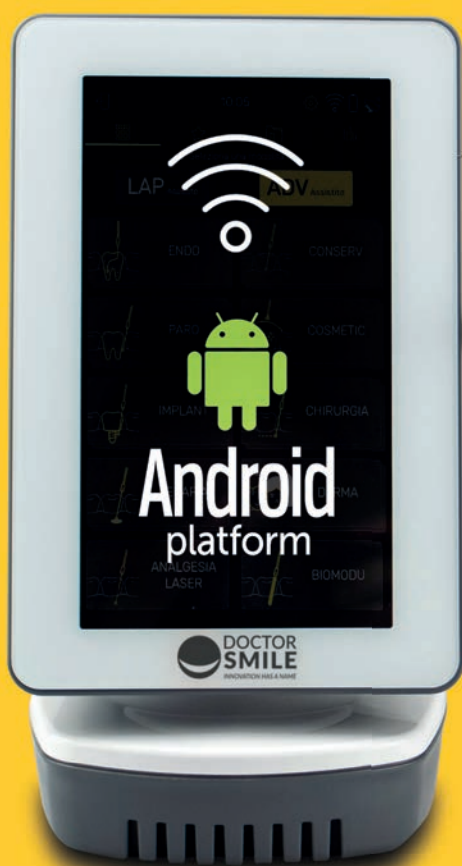

L'esclusiva funzionalità Cloud mostra le anagrafiche dei pazienti, la lista dei trattamenti effettuati, la quantità di energia e tempo di irradiazione.



SOFTWARE  
DESKTOP



ANAGRAFICA  
PAZIENTI



LISTA DEI  
TRATTAMENTI



ENERGIA  
IRRADIATA



TEMPO DI  
ATTIVITÀ



SOFTWARE  
AGGIORNABILE



CERTIFICATO  
INDUSTRY 4.0




# TECNOLOGIA LASER SEMPRE CON TE

L'esperienza **Doctor Smile** non finisce con l'acquisto.

Grazie al nostro team di specialisti e  
l'assistenza al cliente sempre presente,  
siamo in grado di rispondere tempestivamente  
alle domande del dentista,  
sia tecniche che cliniche.

Per noi essere un laser expert vuol dire di più.

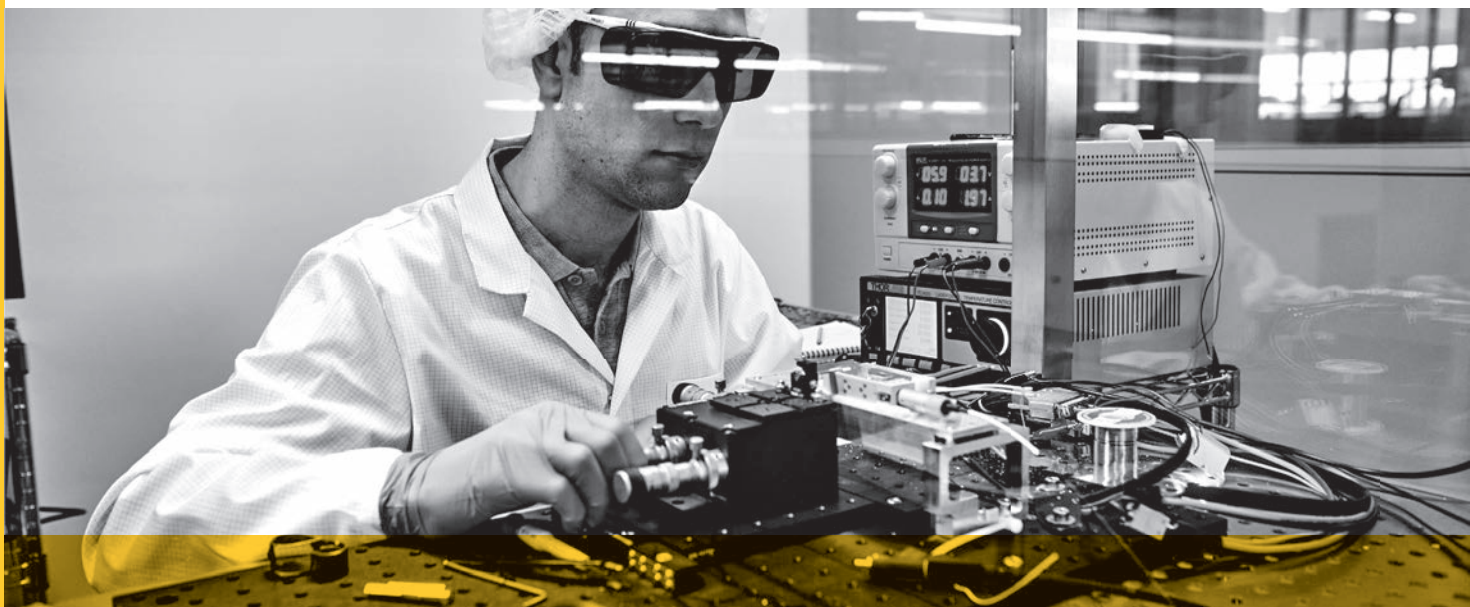


# FORMAZIONE COSTANTE DAL PRIMO TRATTAMENTO



Distinguersi e diventare un odontoiatra laser è sempre più facile: **Master Class Academy** organizza percorsi certificati di formazione **base**, **avanzati** e **master** di perfezionamento. Un aggiornamento costante e di qualità è la chiave per utilizzare il laser al suo meglio in tutti i trattamenti odontoiatrici.

Vuoi di più? Siamo presenti online con un portale formativo dedicato e una pagina YouTube dove puoi trovare contenuti sempre nuovi per avere consigli clinici da mettere subito in pratica.

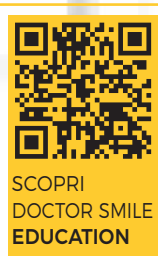

Partecipare ai corsi laser MCA è un'esperienza senza paragoni:

**BASE:** corsi di avviamento all'utilizzo dei laser a diodo e ad erbio

**AVANZATI:** corsi di approfondimento in dermatologia estetica, fotobiomodulazione, terapia laser-assistita

**MASTER:** corso di perfezionamento Laser Dentistry per diventare un vero Laser Expert. Accreditato con 50ECM

Entra nel mondo di Master Class Academy, visita [masterclassacademy.com](http://masterclassacademy.com)

## Dati tecnici

Codice	LA12D001.4
Lunghezza d'onda*	450nm, 635nm, 980nm
Potenza massima	20W
Modalità d'impulso	Continua, pulsata, super-pulsata

Frequenza	da CW a 25 kHz
Dimensioni (LxHxP)	155x230x160mm
Peso	1,85 kg
Classe medicale	II b
Classe Laser	4



**LAMBDA SpA**  
Via dell'Impresa, 1 | 36040 Brendola (VI) Italy  
T +39 0444.349165 | F +39 0444.349954  
[info@lambdaspa.com](mailto:info@lambdaspa.com) | [lambdaspa.com](http://lambdaspa.com)



LA12D001.4 è un prodotto medicale certificato CE

Tutte le apparecchiature laser LAMBDA S.p.A.  
Sono certificate CE in rispetto delle direttive EEC  
Per attrezzature medicali: ECC Direttiva 93/42



Images attribution "Design by Freepik" and "123RF.COM"

AMDP0194



## INFO

· [doctor-smile.com](http://doctor-smile.com) · [info@doctor-smile.com](mailto:info@doctor-smile.com)