

reveal[®]

CLEAR ALIGNERS

CASI CLINICI



Descrizione del caso:

Arcata superiore stretta, Affollamento, Cross Bite
15 anni, femmina

Pre-Trattamento



Fasi del trattamento:

Numero di allineatori: U=22 L=17
Durata del trattamento: 12 mesi
IPR nell'arcata superiore e inferiore.
Attacchi: No – Revisioni: No

reveal[®]
CLEAR ALIGNERS

Finale



reveal[®]
CLEAR ALIGNERS

Registro Movimento Materiale

Superiore

	RIGHT									LEFT							
	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	
1																	
2					MTP							MTP					
3				BTP	BTP							BTP					
4				DRO							BTP	BTR	BTP				
5				DRO							BTR	BTP	BTR				
6				DRO						BTP		BTR	DRO				
7				BTR						BTR	BTP		BTP				
8				DIP	DTR						MTR	MTP	BTR				
9				DTR	DTP							MTR	BTP				
10				DRO							BTP	BTP	DRO				
11							BTP	BTP				BTR	BTR				
12				DIP	DTR	BTP				BTP			BTP				
13				BTP			BTR		BTP				BTR				
14							BTP	BTR	BTP				BTP				
15						BTR	BTR	DRO	BTR				BTR				
16							BTP	DRO	DRO				BTP				
17							BTO		MTO	MTO							
18							BTR	BTP			BTP						
19							BTO		BTO	MTO							
20								INT		MTO							
21								INT	INT								
22								INT		MTO							

Inferiore

RIGHT																	LEFT
	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	
1																	
2				DTP									DTP				
3				BTR								DRO	DTR				
4				BTP	DTP							DRO	DIP				
5				DTR	DTR							DRO	DTR				
6					DTP	BTP					BTP	DRO					
7					BTR	MRO					MRO	DRO					
8					BTP	BTR					MRO	BTP					
9				DTP	DTR	BTP					MRO						
10					DTP		BTP					DTR	DTP				
11					DTR	DTP	BTR					DTP					
12							BTP	DTP	BTR	DTP	BTR						
13								DTR	BTP	DTR	BTP						
14						DTP	DTR	LTP		LTP							
15						DTO		BTO		DTO							
16							DTO		BTO		BTO						
17						BTO		BTO		BTO							

Code	Movement Details	Code	Movement Details	Code	Movement Details
MTR	Mesial Translation	MTP	Mesial Tipping	DTO	Distal Torque
DTR	Distal Translation	DTP	Distal Tipping	MTO	Mesial Torque
LTR	Lingual Translation	BTP	Buccal Tipping	INT	Intrusion
BTR	Buccal Translation	BTO	Buccal Torque	EXT	Extrusion
LTP	Lingual Tipping	LTO	Lingual Torque	DRO	Distal Rotation

Descrizione del caso:

Diastema, Incisivi laterali mancanti
37 anni, femmina

Pre-Trattamento



Fasi del trattamento:

Numero di allineatori: U=20 L=20
Durata del trattamento: 10 mesi
Mantenimento spazio per impianti futuri
Attacchi:No. IPR: No. Revisioni:No.

reveal[®]
CLEAR ALIGNERS

Finale



reveal[®]
CLEAR ALIGNERS

Registro Movimento Materiale

Superiore

Inferiore

RIGHT	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	LEFT
1																	
2		DTP															
3		DTR															
4		DTP															
5			DTP														
6			DIR														
7			DTP														
8				DTP	DTP							BTP	BTP				
9				BTP	BTP							BTP	BTP				
10				BTP	DTP							BTP	BTP				
11				BTP	BTP							BTP	BTP				
12				DTP	DTP							BTP	BTP				
13				BTP	BTP							BTP	BTP				
14				BTP	BTP							BTP	BTP				
15						EXT		BTP	BTP	MRO	BTP		BTP				
16				BTP		EXT		BTP	BTP	DTP	EXT						
17				BTP		EXT		BTP	BTP	MRO	EXT						
18						EXT		BTP	BTP		EXT						
19						EXT	BTP				EXT						
20						EXT	BTP				EXT						
21						EXT	BTP				EXT						
22						LTP		INT									
23						LTP			INT								
24								INT									
25								INT									

RIGHT	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	LEFT
1																	
2				DTP									DTP				
3				DTP									BTP	DTP			
4				DTP	DTP								DTP	DTP			
5				BTP	DTP								DTP	BTP			
6				BTP	DTP	BTP							BTP	BTP			
7					BTP	DTP							DTP				
8				BTP	BTP	DTP							BTP				
9					BTP	DTP							BTP				
10						DTP							BTP				
11							BTP	BTP					BTP				
12							BTP	BTP	BTP	BTP							
13							BTP	BTP	BTP	BTP							
14							BTP	BTP	BTP	BTP							
15							BTP	BTP	BTP	BTP							
16							BTP	BTP	BTP	BTP							
17							BTP	BTP	BTP	BTP							
18						EXT											
19						EXT											
20						EXT											
21							INT	BTP	INT	BTP							
22							BTP	INT	BTP	BTP	INT						
23								INT		INT							
24								INT									
25							INT		INT								

Code	Movement Details	Code	Movement Details	Code	Movement Details
MTR	Mesial Translation	MTP	Mesial Tipping	DTO	Distal Torque
DTR	Distal Translation	DTP	Distal Tipping	MTO	Mesial Torque
LTR	Lingual Translation	BTP	Buccal Tipping	INT	Intrusion
BTR	Buccal Translation	BTO	Buccal Torque	EXT	Extrusion
LTP	Lingual Tipping	LTO	Lingual Torque	DRO	Distal Rotation

Descrizione del caso:

Arcata superiore stretta, Affollamento, Canini alti
17 anni, femmina

Pre-Trattamento



Fasi del trattamento:

Numero di allineatori: U=25 L=25


Durata del trattamento: 14 mesi

Elastic button technique (EBT), per estrarre i
canini superiori ed inferiori dalla 15 alla 21.

Attacchi:No. IPR: No. Revisioni:No.

reveal[®]
CLEAR ALIGNERS

Finale

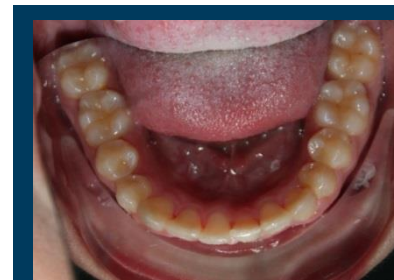

reveal[®]
CLEAR ALIGNERS

Registro Movimento Materiale

Superiore

Inferiore

	RIGHT									LEFT							
	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	
1																	
2		DTP															
3		DTR															
4		DTP															
5			DTP														
6			DTR														
7			DTP														
8				DTP	DTP							BTP	BTP				
9				BTP	BTP							BTP	BTP				
10				BTR	DTP							BTP	BTO				
11				BTO	BTP							BTP	BTP				
12				DTP	DTP							BTO	BTP				
13				BTR	BTO							BTP	BTO				
14				BTO	BTP	DTP		BTP				BTP					
15						EXT		BTP	BTP	MRO	BTP		BTP				
16				BTP		EXT		BTP	BTP	DTP	EXT						
17				BTP		EXT		BTP	BTP	MRO	EXT						
18						EXT		BTP	BTP		EXT						
19						EXT	BTP				EXT						
20						EXT	BTP				EXT						
21						EXT	BTP				EXT						
22						LTP		INT									
23						LTP			INT								
24								INT									
25								INT									

RIGHT	RIGHT								LEFT							
	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
1																
2				DTP									DTP			
3				DTP								BTP	DTP			
4				DTO	DTP							DTP	DTO			
5				BTP	DTP							DTP	BTP			
6				BTP	DTO	BTP							BTP			
7				BTP	DTP						BTP	DTO				
8				BTP	BTP	DTP					DTP	BTP				
9					BTP	DTO						BTP				
10						DTP			BTP	BTP	DTP					
11						DTP	BTP	BTP	BTP	BTP	BTP					
12							BTP	BTP	BTP	BTP						
13							BTP	BTP	BTP	BTP						
14							BTP	BTP	BTP	BTP						
15							BTP	BTP	BTP	BTP						
16							BTP	BTP	BTP	BTP						
17							BTP	BTP	BTP	BTP						
18						EXT					EXT					
19						EXT					EXT					
20						EXT					EXT					
21							INT	BTP	INT	BTP						
22							BTP	INT	BTP	INT						
23							INT		INT							
24								INT		INT						
25							INT		INT							

Code	Movement Details	Code	Movement Details	Code	Movement Details
MTR	Mesial Translation	MTP	Mesial Tipping	DTO	Distal Torque
DTR	Distal Translation	DTP	Distal Tipping	MTO	Mesial Torque
LTR	Lingual Translation	BTP	Buccal Tipping	INT	Intrusion
BTR	Buccal Translation	BTO	Buccal Torque	EXT	Extrusion
LTP	Lingual Tipping	LTO	Lingual Torque	DRO	Distal Rotation

Descrizione del caso:

Arcata superiore stretta, Affollamento severo inferiore
21 anni, Femmina

Fasi del trattamento:

Numero di allineatori: U=21 L=24

Durata del trattamento: 12 mesi

Attacchi:No. IPR: No. Revisioni:No.

reveal[®]
CLEAR ALIGNERS

Pre-Trattamento



Finale



reveal[®]
CLEAR ALIGNERS

Registro Movimento Materiale

Superiore

	RIGHT									LEFT							
	8	7	6	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	6	7	8
1																	
2				MTP									MTP				
3				BTP									MTP	BTP			
4				BTP	BTP								MTP	BTP			
5				BTR	BTP								MTP	BTR			
6				BTO	BTR								BTP	BTO			
7						DTP						MTP	BTP	BTP			
8						DTP	DTP						BTP	BTP			
9							DTP										
10				DIP	DIP	DTP	DTR	DTP				BTP					
11					DTP	DTP	DTO	DTP				BTP	BTP				
12						DTR	DTP	DTP				BTR	BTP				
13								MRO	DTP	BTO		BTP	BTP				
14					BTP	BTP	DTP	DTP	MRO								
15					BTP	BTP	BTP	LTP	LTP								
16								MRO	LTP	LTP	BTP	BTP	BTP				
17							BTO		MTO		BTO						
18					BTO			BTO		BTO							
19					BTO		BTO		BTO								
20							BTO		MTO								
21						BTP	LTP	LTP	LTP	LTP							

Inferiore

	RIGHT									LEFT							
	8	7	6	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	6	7	8
1																	
2				MTP									MTP				
3				BTP									MTP	BTP			
4				BTP	BTP								MTP	BTP			
5				BTR	BTP								MTP	BTR			
6				BTO	BTR								MTP	BTO			
7				BTP								BTP	BTP	BTP			
8						BTP						BTP	BTP	BTP			
9				BTP	BTP							BTR	BTR	BTR			
10				BTP	BTP							BTO	BTO	BTO			
11						BTP	DTP					DTP	BTP				
12							DTP					DTP	DTP	BTP	BTP		
13							DTP					DTP	DTP	BTP	BTP		
14							BTP	DTP	MTD	DTP		DTP	BTP				
15							BTP	DTP	MTD	DTP	BTP						
16				BTP	BTP		BTR					BTP		BTP	BTP		
17						MRO	BTO					BTP	MRO		BTP		
18							BTP					BTR		BTP	BTR		
19						DTP		LTP	LTP	BTO		BTP					
20							DTP	LTP	LTP	MRO	MRO						
21							DTO			DTO				BTO			
22							BTO			BTO		BTO					
23						BTO		BTO		BTO							
24							LTP	LTP	BTO		BTO						

Code	Movement Details	Code	Movement Details	Code	Movement Details
MTR	Mesial Translation	MTP	Mesial Tipping	DTO	Distal Torque
DTR	Distal Translation	DTP	Distal Tipping	MTD	Mesial Torque
LTR	Lingual Translation	BTP	Buccal Tipping	INT	Intrusion
BTR	Buccal Translation	BTO	Buccal Torque	EXT	Extrusion
LTP	Lingual Tipping	LTO	Lingual Torque	DRO	Distal Rotation

Descrizione del caso:

Canini superiori prominenti, Correzione della linea mediana superiore
31 anni, maschio

Fasi del trattamento:

Numero di allineatori : U=15 L=15
Durata del trattamento: 9 mesi
Attacchi:No. Revisioni:No.

reveal[®]
CLEAR ALIGNERS

Pre-Trattamento
















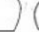



Finale



















Registro Movimento Materiale

Superiore

Inferiore

	RIGHT									LEFT							
																	
	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	
1																	
2											DTR	DTP					
3					DTP						DTP	DTR					
4					DTR					DRO	DTR	DTP					
5				BTP							DTP	DTP	DTR				
6					DTP					BTP	DTR	BTP					
7					DTR	DRO				MRO	DTP						
8										BTP	DTR	DTR	DTP				
9						DRO	BTP		MRO			BTP					
10							BTR	BTP		BTR	BTP						
11						DRO	BTP	BTR		BTP	LTP						
12							BTR	BTP	BTP	BTR	LTR						
13				MTO				LTP	MTO		LTP	MTO					
14			BTP				LTP	LTP	MTO	LTP	LTR						
15									INT	LTR	LTP	LTP					

RIGHT																		LEFT
	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8		
1																		
2							DTP			DTP								
3							DTR		BTP	DTR								
4						BTP	BTP	BTP	BTR									
5						DRO	DRO			BTP	BTP							
6							BTP	BTR	BTP	BTR								
7							BTP	BTP		BTP	BTR							
8				BTP	BTP	DRO					BTP							
9					DRO	DRO	BTR						BTP					
10				DRO	DRO		BTP					BTP	DRO					
11				BTP	BTP	DRO	INT					BTR						
12						DTO		LTP	LTP	DTO		DRO						
13				DRO		DTO	INT	DTO		DTO			MTO					
14						BTP	INT	INT	LTP	LTP								
15				BTP	LTP	DRO	INT		DTO		DTO							

Code	Movement Details	Code	Movement Details	Code	Movement Details
MTR	Mesial Translation	MTP	Mesial Tipping	DTO	Distal Torque
DTR	Distal Translation	DTP	Distal Tipping	MTO	Mesial Torque
LTR	Lingual Translation	BTP	Buccal Tipping	INT	Intrusion
BTR	Buccal Translation	BTO	Buccal Torque	EXT	Extrusion
LTP	Lingual Tipping	LTO	Lingual Torque	DRO	Distal Rotation

Descrizione del caso:

Affollamento anteriore
25 anni, maschio

Pre-Trattamento



Fasi del trattamento:

Numero di allineatori: U=28 L=28
Durata del trattamento: 14 mesi
Riduzione interprossimale (IPR) ed espansione.
Attacchi:No. Revisioni:NO.

reveal[®]
CLEAR ALIGNERS

Finale



reveal[®]
CLEAR ALIGNERS

Material Movement Record

Upper

Lower

	RIGHT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	LEFT
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		

	RIGHT	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	LEFT
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		

Code	Movement Details	Code	Movement Details	Code	Movement Details
MTR	Mesial Translation	MTP	Mesial Tipping	DTO	Distal Torque
DTR	Distal Translation	DTP	Distal Tipping	MTO	Mesial Torque
LTR	Lingual Translation	BTP	Buccal Tipping	INT	Intrusion
BTR	Buccal Translation	BTO	Buccal Torque	EXT	Extrusion
LTP	Lingual Tipping	LTO	Lingual Torque	DRO	Distal Rotation

Descrizione del caso:

Crossbite anteriore, Affollamento
24 anni, femmina

Fasi del trattamento:

Numero di allineatori: U=21 L=23
Attacchi: No. IPR: No. Revisioni: No.

reveal[®]
CLEAR ALIGNERS

Pre-Trattamento



Finale



reveal[®]
CLEAR ALIGNERS

Registro Movimento Materiale

Superiore

Inferiore

RIGHT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	LEFT
1																	
2						BTP	BTP										
3						BTP	BTP					BTP					
4					BTP	BTR	BTR					BTP					
5					BTP	BTP	BTP						DRO				
6					BTR	BTP	BTP						DRO				
7					BTP	BTR	BTR						DRO				
8				DRO	BTP			BTP	BTP								
9				DRO	BTR			BTP	BTP								
10				DRO	BTP			BTR	BTR								
11				DRO		BTP	BTP	BTP	BTP								
12				BTP	BTP	BTP				MTP	MRO						
13				BTP	BTR	BTR				MTP	MRO						
14				BTR				BTP	BTP	MTR	MRO						
15				BTP	MRO			MRO	BTR	DRO	MRO						
16								MRO	BTP	DRO	MRO		MTO				
17				BTP	BTP		BTP	INT		INT	MRO						
18						BTP	BTR	MRO	INT		INT						
19					MRO	BTP	LTO	MRO		INT							
20								INT			INT						
21								INT									

RIGHT	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	LEFT
1																	
2				BTP									BTP				
3				BTP								BTP	BTP				
4				BTR	BTP							BTP	BTR				
5				BTP	BTP						BTP	BTR					
6				BTP	BTR						BTP	BTP					
7				BTR	BTP					BTP	BTR						
8					LTO					BTP	BTP						
9					BTP	MRO						BTP	BTP				
10					LTO	MRO						BTR	BTP				
11					BTR	MRO				BTR	BTP						
12					BTP	MRO				LTO	BTR						
13						LTP				BTP	BTP						
14						LTP				LTO	BTP	BTP					
15						LTR	LTP	LTP	LTP								
16						LTP	LTP	LTP	LTP								
17						LTP	MTP	MTP	DTP								
18						LTR	MTP	MTP	DTP								
19						LTP	LTR	LTR	LTR								
20						LTP	LTP	LTP	LTP								
21						LTR	LTP	LTP	LTP	BTP							
22							INT		INT								
23								INT		INT							

Code	Movement Details	Code	Movement Details	Code	Movement Details
MTR	Mesial Translation	MTP	Mesial Tipping	DTO	Distal Torque
DTR	Distal Translation	DTP	Distal Tipping	MTO	Mesial Torque
LTR	Lingual Translation	BTP	Buccal Tipping	INT	Intrusion
BTR	Buccal Translation	BTO	Buccal Torque	EXT	Extrusion
LTP	Lingual Tipping	LTO	Lingual Torque	DRO	Distal Rotation



reveal[®]

CLEAR ALIGNERS

1822 Aston Ave. Carlsbad, CA 92008-7306 USA
revealclearaligners.com | 800.344.3397
© 2021 Ortho Organizers, Inc. All rights reserved.