



MEDICINA
ESTETICA

Elisa Guidubaldi

General Sales Manager Tecnodent srl
Casalecchio di Reno (BO)

DA TECNOCARE® IL PRIMO CONCEPT INTEGRATO PER LA MEDICINA ESTETICA

La poltrona medicale Linda Next AES rappresenta la soluzione ergonomica vincente per rendere l'esperienza del medico e del paziente elemento memorabile e distintivo dell'ambulatorio evoluto

L'attività ambulatoriale del medico estetico è sempre più richiesta e impegnativa. Dal medico generico al medico specialistico, l'interesse verso questa pratica medica è cresciuto notevolmente negli ultimi anni ed è tuttora in forte crescita.

Con l'ampliamento dei professionisti che si dedicano alla Medicina Estetica, si fa strada l'esigenza di disporre di strumenti di lavoro sempre più performanti e confortevoli, per via delle innumerevoli ore di lavoro che si dedicano ai diversi trattamenti nell'arco della giornata.

Inoltre, c'è la necessità di disporre di un'attrezzatura dedicata espressamente alla Medicina Estetica e non polivalente come l'attuale offerta di mercato: tutti i medici intervistati da Tecnocare®, azienda nata nel 1966 e specializzata nella progettazione e produzione di sedute medicali, hanno manifestato l'esigenza di una poltrona medicale, quindi certificata come dispositivo medico, che fosse studiata appositamente per la Medicina Estetica.

È NATA LINDA NEXT AES

Così, con il contributo di un comitato scientifico costituito da medici e chirurghi specializzati, è stata progettata e sviluppata la Linda Next AES, uno strumento di lavoro innovativo e specialistico, idoneo a rispondere alle esigenze del medico estetico, soprattutto per distretti lavorativi della testa e del collo, dove si esplicano la maggior parte dei trattamenti di Medicina Estetica, senza trascurare altre zone come le mani e il corpo.

Il medico estetico sente l'esigenza prima di tutto di operare in **sicurezza**, con **dispositivi medici certificati**, che garantiscano una tutela tanto del medico stesso che del paziente.

La poltrona Linda Next AES è studiata per garantire elevati standard di igiene grazie al rivestimento in similpelle di alta qualità, antimicotico e antibatterico, privo di cuciture sia nella tappezzeria standard che memoria di forma ad alta densità. Inoltre, il comando tramite joystick, attivabile con i piedi, garantisce massima igiene durante il trattamento.

La seconda esigenza è quella di poter operare in un ambiente **ergonomico**. Il medico, grazie all'integrazione degli accessori nella poltrona stessa, può accedere facilmente al volto del paziente senza ostacoli e lavorare in maniera efficace, nel massimo comfort.

La poltrona, perfettamente simmetrica, è progettata per professionisti destrorsi e mancini, e ha una sezione poggiatesta estraibile e richiudibile automaticamente.

La coppia di braccioli chirurgici avvolgenti, orientabili e regolabili in altezza offrono il massimo comfort dell'operatore e del paziente durante il trattamento.



PECULIARITÀ DI LINDA NEXT AES

La poltrona è inoltre dotata di un **poggiatesta** multiarcolato che, grazie al preciso e ampio range di regolazioni, combina il miglior comfort per il paziente al posizionamento ergonomico ottimale in funzione di ogni possibile trattamento. Nello specifico, in iperestensione permette di evidenziare l'albero venoso, in modo da evitare spiacevoli complicanze che possono essere lievi e transitorie (ematomi), ma anche serie e permanenti.

La poltrona ha una capacità di sollevamento di 300 kg di peso pur essendo dotata di motori silenziosi con dispositivo soft-start e soft-stop, è equipaggiata di **posizione antishock Trendelenburg** sia automatica che personalizzabile.

Per poter adattare la poltrona a qualsiasi conformazione fisica di paziente, può essere equipaggiata di schienale regolabile elettricamente in altezza. Sono disponibili vari optional, studiati insieme al comitato scientifico, tra cui **cuscinio in gel poggia-mano**, studiato per rendere il trattamento iniettivo





più sicuro, confortevole ed efficace; **base su ruote** per una facile movimentazione all'interno dello studio e tra uno studio e l'altro; **base girevole** con una corsa di 320° per il posizionamento ottimale del paziente all'interno dell'ambulatorio; **telecomando a infrarossi** per il controllo frontale della poltrona; **poggiagambe indipendente**; **tavoletta transtoracica**, per riporre filler e strumenti vari; **porta-rotolo**; **reggi-cosce** per epilazione.

ILLUMINAZIONE E TELECAMERA

Un altro ausilio importante durante le procedure mediche è l'**illuminazione**: la nostra poltrona può essere equi-

paggiata di una **lampada medica** di altissima qualità con incorporata una telecamera 4k.

La lampada ha la peculiarità di riuscire a cambiare la lunghezza d'onda della luce, rendendola quindi fredda, calda o naturale, il che può risultare utile se si vogliono evidenziare alcune caratteristiche anatomiche. Inoltre la **telecamera integrata ad alta definizione** permette di catturare e archiviare foto e video in tempo reale per documentare il trattamento. Grazie a questa tecnologia, installando un computer collegato a un maxi-schermo, si può effettuare anche la **videoconsulenza**, per un confronto live con altri professionisti della propria rete di contatti, oppure una **video-lezione** per un corso in tempo reale.

PERSONALIZZAZIONE E PRECISIONE


La poltrona è equipaggiata con **3 profili utenti**, ognuno dei quali ha **3 posizioni memorizzabili** (che consentono l'utilizzo della medesima poltrona a tre professionisti diversi). Peculiarità della nostra poltrona è, inoltre, la



funzione esclusiva "**slow-mode**", ovvero micromovimenti rallentati che consentono il preciso posizionamento del paziente in totale sicurezza.

IL CONCEPT DI LINDA NEXT AES

Pertanto, il **concept integrato per la Medicina Estetica Linda Next AES**, non solo rende il lavoro meno stressante, più veloce, maggiormente confortevole e sicuro per il medico, ma è un asset distintivo per l'ambulatorio evoluto e rende il trattamento medico un'esperienza memorabile per il paziente che si traduce facilmente in fidelizzazione e passaparola. ■

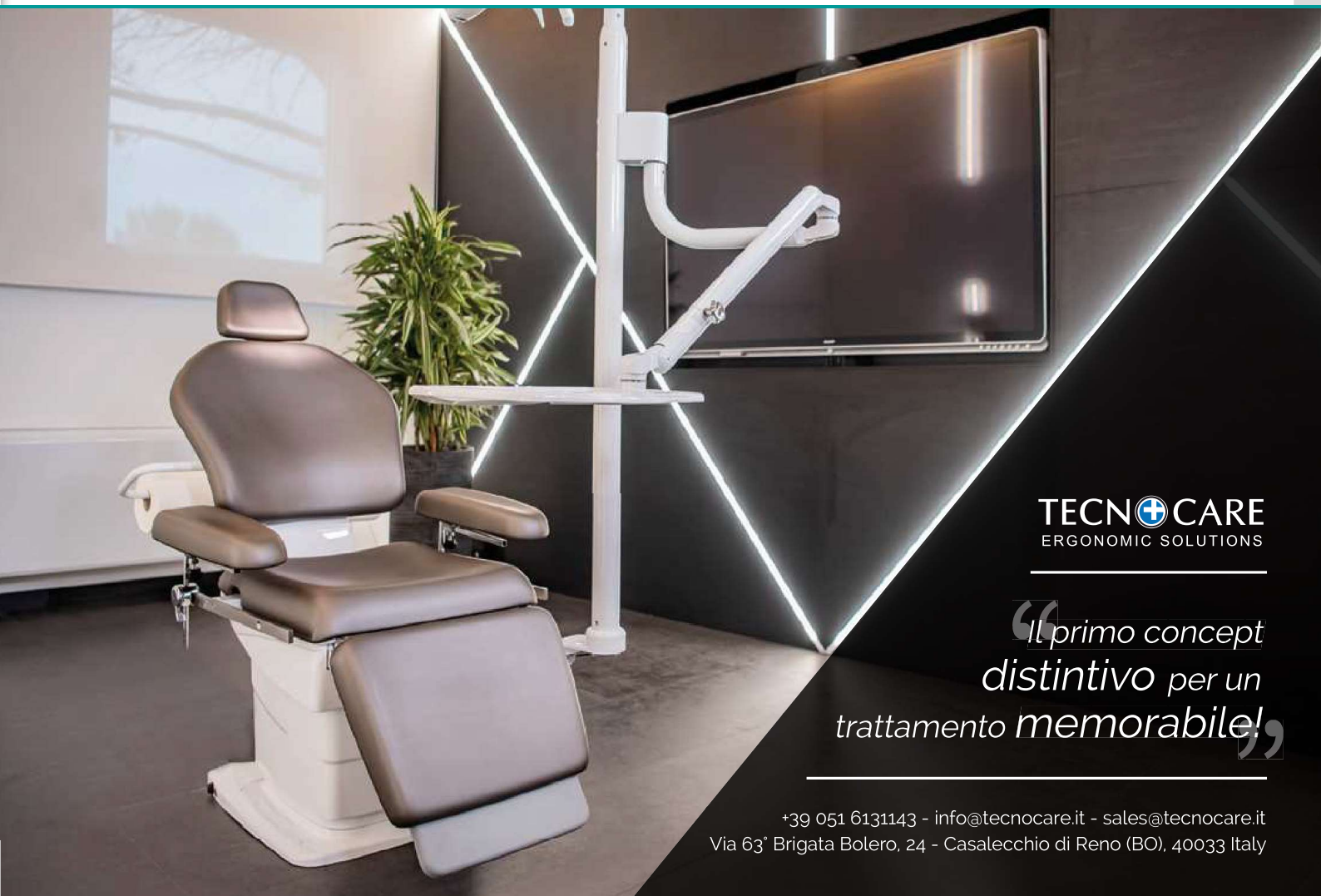

TECNO+CARE
ERGONOMIC SOLUTIONS

*“Il primo concept
distintivo per un
trattamento memorabile!”*

+39 051 6131143 - info@tecnocare.it - sales@tecnocare.it
Via 63^a Brigata Bolero, 24 - Casalecchio di Reno (BO), 40033 Italy