


**sm;)ers<sup>®</sup>**



## DAI CASI LIEVI AI COMPLESSI

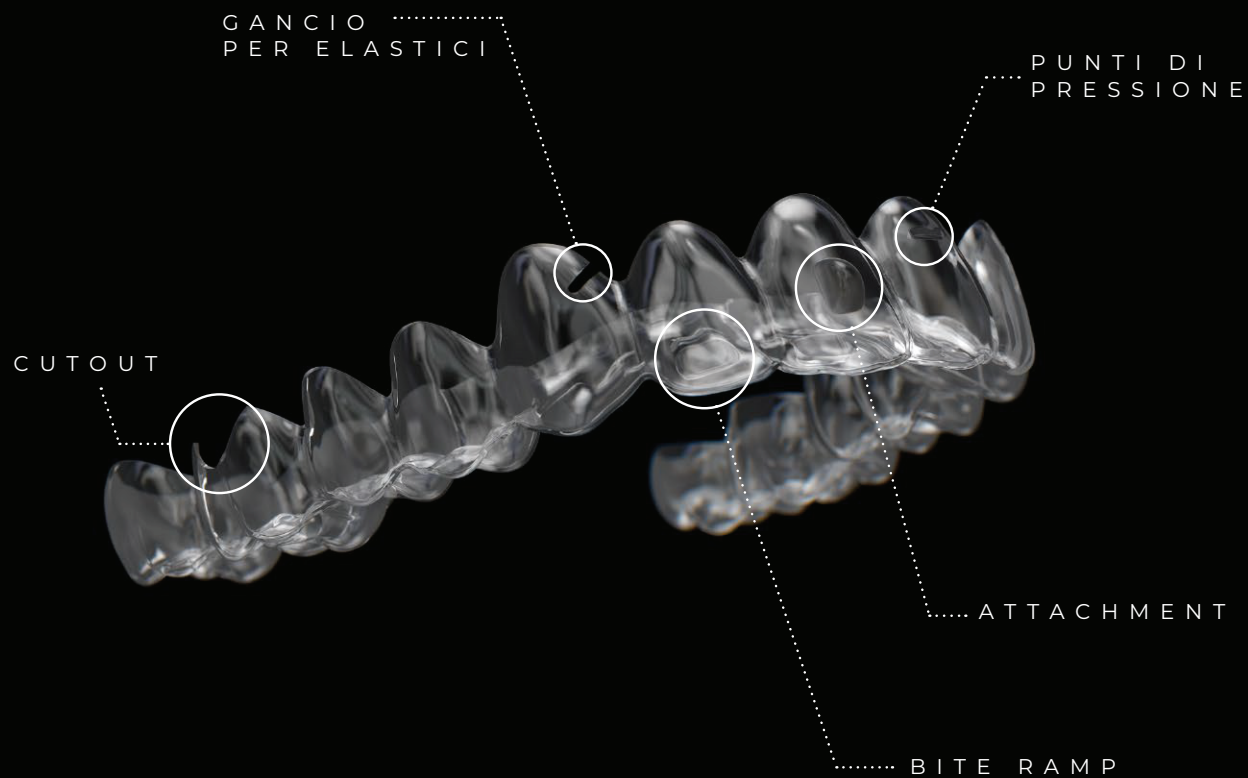

Gli allineatori Smilers® sono progettati per trattare qualsiasi classe di malocclusione, dai casi più semplici a quelli più complessi (utilizzo di elastici, mini viti e catene).



È possibile aggiungere degli attachment ad alcuni denti per facilitare movimenti quali rotazione, intrusione ed estrusione.



In alcuni casi potrebbe essere necessaria la riduzione interprossimale (IPR).



Possibile traslazione: **fino a 0,2 mm** per ogni passaggio dell'allineatore.



Possibile rotazione: **fino a 2-3°** per ogni passaggio dell'allineatore.

# ALLINEATORI DI QUALITÀ



## PRODOTTO IN EUROPA

Gli allineatori *Smilers* sono prodotti in Europa utilizzando plastica certificata CE.



## ISO

Gli allineatori *Smilers* sono certificati secondo la norma ISO 13485, rispondente ad elevati standard di qualità di produzione.



## SENZA BPA E DISINFETTATI

Gli allineatori *Smilers* sono privi di bisfenolo-A e sono disinfettati prima del confezionamento per la sicurezza ottimale del paziente.



# SCOPRI LA DIFFERENZA SMILERS®

## + FLESSIBILITÀ

Scegli tra **3 spessori di allineatore:**  
0,6, 0,8 e 1,0 mm

Scegli di ricevere solo 10 set di allineatori alla volta, consentendoti di rivalutare periodicamente e **adattare il piano di trattamento in base alle tue esigenze.**



## + COMPETENZA

Piani di trattamento **sviluppati dagli ortodontisti interni di Smilers**, disponibili tramite chat o telefono.



## + TRASPARENZA

I modelli Smilers sono stampati con la tecnologia stereolitografica, che consente di creare superfici lisce e di ridurre al minimo le linee di strato visibili per una maggiore trasparenza.










## + COMFORT

Gli allineatori *Smilers* sono **tagliati e lucidati a mano** lungo la linea di rifinitura.



## FLUSSO DI LAVORO DEGLI ALLINEATORI SMILERS

-  Prendi le **impronte** delle arcate del paziente (PVS o digitale).
-  Il team di *Smilers* elabora le impronte.
-  Gli **ortodontisti interni di Smilers** sviluppano un **piano di trattamento**.
-  *Smilers* ti invia un piano di trattamento con la **"Smilerstory"** (simulazione con un video prima/dopo). Se hai domande o desideri modificare il piano di trattamento, puoi contattare i nostri ortodontisti.
-  Una volta approvato il piano di trattamento, ti verranno inviati gli **allineatori trasparenti Smilers**.
-  Gli allineatori *Smilers* vengono consegnati con le istruzioni e una sagoma dell'allineatore per posizionare facilmente gli attachment (se necessario).
-  I pazienti cambiano i loro allineatori *Smilers* ogni **2 settimane**. Sono necessari appuntamenti di follow-up per garantire il successo del trattamento.

## PARLIAMO IN UN LINGUAGGIO DIGITALE

Il nostro sistema è **APERTO** e accetta file da **TUTTI** gli scanner intraorali.







## GESTIONE DEI CASI

La potente piattaforma Smilers® ti permette di gestire facilmente i tuoi casi di allineatori trasparenti e di retainer nel tuo account.

- ✓ Dashboard dei casi ordinabile
- ✓ Interfaccia intuitiva
- ✓ Semplici flussi di lavoro per prescrizioni e ordini
- ✓ Promemoria utili per le attività
- ✓ Preferenze cliniche memorizzate

# SOFTWARE DI PIANIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO OFFERTO DA NEMOTEC



Segmentazione  
reale delle radici

## ✓ SEGMENTAZIONE REALE DELLE RADICI

Visualizza le radici con una sovrapposizione della scansione CBCT per una migliore prevedibilità\*

## ✓ IPR SUPERVISIONATA

IPR massima di 0,3 mm per lato per proteggere lo smalto dei denti

## ✓ COMPETENZA UNICA

Piani di trattamento sviluppati esclusivamente da **ORTODONTISTI INTERNI DI SMILERS** tramite NemoCast (NemoStudio Suite)

## ✓ SOFTWARE MULTIDISCIPLINARE


Possibilità di integrazione con moduli software aggiuntivi di Nemotec

\*Rispetto ai trattamenti sviluppati con la versione precedente, senza segmentazione della radice né visualizzazione del movimento - Studio di Angela Chiara D'Alessandro e altri «Integrating CBCT and Virtual Models for Root Movement with Clear Aligners» - Journal of Clinical Orthodontics (jco-online.com). Marzo 2020.

# SMILERSTORY SIMULAZIONE DEL TRATTAMENTO

Condividi il video di simulazione del trattamento Smilerstory per spiegare il tuo piano di trattamento ai pazienti.

Visualizza i vari movimenti dentali, gli attachment e la riduzione interprossimale ad ogni passaggio dell'allineatore.

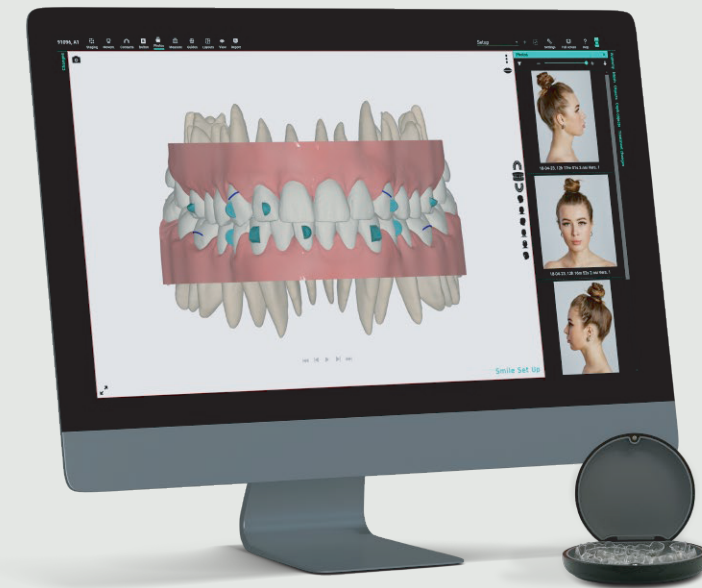


\*I risultati non possono essere garantiti da Smilers e dipendono dal rispetto delle istruzioni da parte del paziente, dall'uso e dalla cura degli allineatori, nonché dalla risposta biologica umana individuale al trattamento. A volte possono essere necessari allineatori aggiuntivi.

# SMILERS® PRO APPLICAZIONE FOTOGRAFICA



- ✓ Possibilità di acquisire facilmente una serie completa di foto e caricarle nel tuo caso *Smilers*.
- ✓ Regolazione automatica delle foto (sfondo, inquadratura, ecc.) grazie all'intelligenza artificiale.
- ✓ Foto archiviate gratuitamente e in modo sicuro.
- ✓ Facile accesso alle foto precaricate nel tuo account *Smilers*.
- ✓ Disponibile su iPhone e Android.

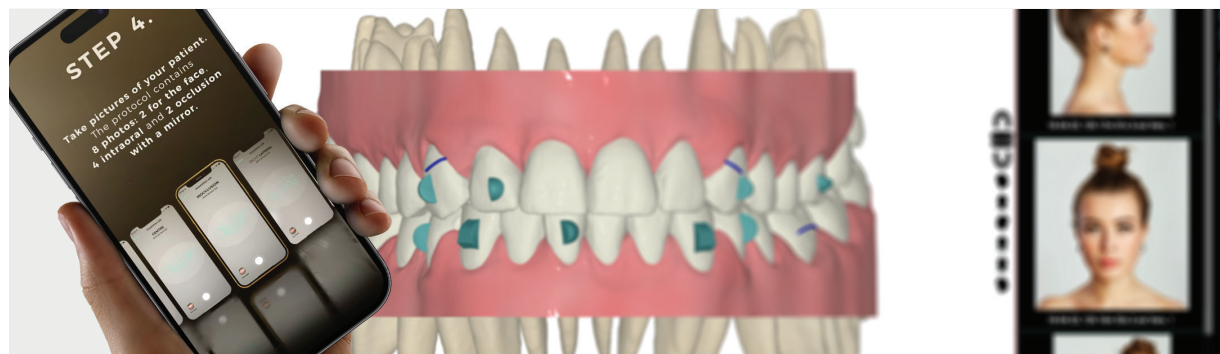

Non disponibile in tutti i Paesi: contatta il rappresentante locale



## ECO-RESPONSABILITÀ



### LIMITAZIONE DEGLI SCARTI DEGLI ALLINEATORI

Per i casi complessi, limitate mascherine inutilizzate e ricevi 10 set di allineatori alla volta.



### ENERGIA RINNOVABILE

Utilizzo dell'energia rinnovabile dei pannelli solari per alimentare la maggior parte della produzione possibile



### SMILERS® CARES DENTAL RECYCLING

*Smilers* ha implementato processi per riciclare i scarti industriali.



### MATERIALI ECOLOGICI

Allineatori riciclabili, imballaggio e pennello per allineatori realizzati con materiali riciclati.



# BOX DI BENVENUTO PER IL PAZIENTE

OFFRI AI TUOI PAZIENTI  
COMFORT E CONVENIENZA

1 CONFEZIONE DI BENVENUTO  
PER IL PAZIENTE GRATUITA



Spazzolino per la pulizia  
dell'allineatore realizzato in  
plastica riciclata e riciclabile al  
100%.

Autentico  
sapone di Marsiglia per allineatori

Custodia protettiva.

# SBIANCAMENTO E ALLINEAMENTO



WHITE DENTAL BEAUTY : SBIANCAMENTO PREMIUM PER ALLINEATORI PREMIUM

- Risultati visibili in meno di una settimana
- Diverse opzioni disponibili
- Contiene la formula brevettata NOVON®, un composto sbiancante che offre risultati di sbiancamento migliori con tempi di trattamento inferiori
- Contiene nitrato di potassio e fluoro per aiutare a gestire la sensibilità
- Sapore di menta per un gusto fresco e pulito

WHITE  
DENTAL  
BEAUTY

NOVON®  
Advanced Formula

smilers®

Non disponibile in tutti i mercati, contatta il rappresentante locale





Distribuito da:

 HENRY SCHEIN®

Numero Verde 800.68.16.11

 Smilers\_Aligners

 Smilers Aligners

 [www.smilers.it](http://www.smilers.it)

Biotech Dental Smilers - 305, Allées de Craponne - 13300 Salon de Provence - Francia. Una società francese di diritto francese con un capitale di 125.000 € - Registro delle imprese Salon-de-Provence: 801 674 375 - SIRET: 801 674 375 00010 - Partita IVA: FR 93 80 167 437 5.

Produttore di allineatori su misura Smilers®, Smilers® Fix e retainer: Biotech Dental Smilers. Dispositivi medici su misura di classe IIa per l'allineamento dentale o per immobilizzare e mantenere la posizione dei denti dopo il trattamento ortodontico. NemoStudio Suite prodotto da Software NemoTec, S.L. Strumento di supporto al piano diagnostico e di trattamento per l'odontoiatria e la chirurgia orale e maxillofaciale. Dispositivo medico di classe Im, CE2797. Gel sbiancante per denti White Dental Beauty, Cosmetici. Produttore: Optident.

Immagini non contrattuali. Non gettare nelle aree pubbliche.