

#whdentalwerk



video.wh.com

Ora disponibile presso
il vostro rivenditore o
su wh.com



Assistenza smart a un nuovo livello



piezomed ^{PLUS}
module

implantmed ^{PLUS}

Il must-have per la chirurgia orale e l'implantologia

Scopri i vantaggi del nuovo Implantmed Plus II e del Piezomed module Plus II con la comprovata qualità W&H e guarda con i tuoi occhi perché la nuova piattaforma OSI è un vero must-have.

Display da 7" e interfaccia utente intuitiva

Maggiore chiarezza,
maggiore controllo.

Due in uno

Massima modularità,
elevata flessibilità,
configurazione minima.

Implantmed Plus II

Piezomed module Plus II

Light-Guide intelligente

Orientamento a
colpo d'occhio.

ioDent

Connessione smart

Offre soluzioni odontoiatriche intelligenti.
Consente un servizio di supporto e
assistenza avanzato.

- › Aggiornamento software remoto
- › Preimpostazione
- › Documentazione digitale

Funzione di scansione integrata

Documentazione e tracciabilità
rapide e sicure.

piezomed^{PLUS}
module II

implantmed^{PLUS}
II

Assistenza smart per l'implantologia moderna


Implantmed Plus II sta diventando un assistente indispensabile in sala operatoria. L'obiettivo è supportare l'efficienza dell'utente nel miglior modo possibile, sia durante l'inserimento di un impianto che durante l'estrazione del dente del giudizio.

Elevata flessibilità, configurazione minima

Il **Piezomed module Plus II** si collega facilmente al dispositivo tramite un meccanismo a scorrimento, senza necessità di cavi né di alimentazione aggiuntiva.

Orientamento a colpo d'occhio

La **Light-Guide** intelligente garantisce un orientamento immediato anche nelle situazioni di stress, indicando l'applicazione in uso.

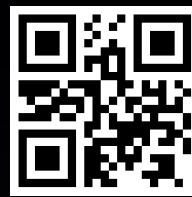

Ulteriori informazioni
su ioDent® di W&H
sono disponibili sul
sito iodent.com

Soluzioni intelligenti Assistenza e supporto avanzati

ioDent®

Il sistema ioDent® offre soluzioni intelligenti e fornisce un servizio di assistenza e supporto avanzato. Con il Wi-Fi integrato, collegare Implantmed Plus II alla piattaforma W&H ioDent® è più facile che mai.

Per un flusso di lavoro continuo ed efficiente

Il collegamento al software di pianificazione consente al dispositivo di essere preconfigurato automaticamente con tutti i parametri rilevanti prima del trattamento.

Tutto sotto controllo senza perdere mai di vista nulla

Dopo una sola registrazione del dispositivo, viene posta la base per un registro digitale che ne documenta l'intero ciclo di vita.

Sempre aggiornato

Grazie alla possibilità di aggiornamento da remoto, il dispositivo rimane sempre aggiornato con il software più recente. Le nuove funzioni possono essere installate direttamente dall'utente tramite la piattaforma ioDent®.

Gestione dei dati semplice ed efficiente

Collegando semplicemente il dispositivo, tutti i dati del trattamento, inclusi i valori ISQ grazie all'integrazione con Osstell Beacon, vengono documentati automaticamente per ciascun paziente.

Più chiarezza, più controllo

Un **display da 7"** decisamente più grande consente un utilizzo più semplice e più intuitivo.

Veloce e sicuro

Con la **funzione di scansione** integrata e la connessione a ioDent®, la dispendiosa documentazione manuale dei materiali utilizzati, come impianti e biomateriali, appartiene al passato.



Implantmed Plus II

Caratteristiche in breve



		SI-2102 (Scan-Edition)	SI-2101 (senza cavo)	SI-2100 (con cavo)
Funzione di scansione:		✓	n.d.	n.d.
Connessione ioDent®:		✓	✓	✓
 Funzioni ioDent®	Registro del dispositivo e interfaccia di supporto:	✓	✓	✓
	Aggiornamento software remoto:	✓	✓	✓
	Preimpostazione:	✓	✓	✓
	Documentazione digitale (passaporto implantare):	✓	✓	✓
Modularità:		✓	✓	✓
Light-Guide:		✓	✓	✓
Pedale senza cavo:		✓	✓	n.d.
Pedale con cavo:		n.d.	n.d.	✓
Collegamento Osstell Beacon:		✓	✓	✓
Garanzia:		12 mesi	12 mesi	12 mesi

Piezomed module Plus II

Caratteristiche in breve

	SP-210 M
Riconoscimento automatico degli inserti:	✓
Libreria degli inserti:	✓
24 Watt:	✓
Luce (con manipolo SA-40 L):	✓
Interfaccia modulare:	✓
Garanzia:	12 mesi



La chiave per il futuro degli studi dentistici

La guida chirurgica di W&H ti accompagna attraverso le singole fasi del trattamento in chirurgia orale e implantologia, dalla diagnosi, al trattamento, fino alla documentazione finale.



Le tecnologie digitali stanno rivoluzionando il trattamento odontoiatrico. Con l'integrazione ottimale di dispositivi, software e processi digitali, W&H supporta gli utenti nel rendere ogni fase del trattamento efficiente, sicura e orientata al paziente. I prodotti W&H lavorano in perfetta sinergia, sono interconnessi e si completano reciprocamente.

Dati tecnici

Implantmed Plus II

Tipo:	SI-2102 (Scan-Edition)	SI-2101 (senza cavo)	SI-2100 (con cavo)
Tensione di rete:	100–240 V		
Frequenza:	50 – 60 Hz		
Potenza assorbita massima:	220 VA		
Potenza erogata massima:	80 W		
Coppia massima sul motore:	6,2 Ncm		
Velocità motore:	200–40.000 rpm		
Portata fluido di raffreddamento al 100%:	almeno 90 ml/min		
Dimensioni (altezza × larghezza × profondità):	130 × 293 × 283 mm		
Peso:	2,6 kg		

Piezomed module Plus II

Tipo:	SP-210 M
Potenza erogata massima (ultrasuoni):	24 W
Frequenza di alimentazione:	22–35 kHz
Portata fluido di raffreddamento al 100%:	almeno 90 ml/min
Modalità operativa:	S3 (80 s ON/330 s OFF) massimo 4 tentativi
Dimensioni (altezza × larghezza × profondità):	99 × 93 × 283 mm
Peso:	755 g



Produttore:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
 Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
 5111 Bürmoos, **Austria**
 t +43 6274 6236-0
 f +43 6274 6236-55
 office@wh.com
 wh.com

Distribuzione:

W&H Italia S.r.l.
 Via Bolgara, 2
 24060 Brusaporto (BG), **Italia**
 t +39 035 6663911
 f +39 035 0662504
 office.it@wh.com
 wh.com

W&H CH-AG
 Industriepark 9
 8610 Uster, **Schweiz**
 t +41 43 4978484
 f +41 43 4978488
 info.ch@wh.com
 wh.com

Foto simboliche. Accessori e parti aggiuntive
 non fanno parte della dotazione.

20590 AIT Rev. 000 / 17.10.2025
 Con riserva di modifiche