

AccuFab-Aris

Stampante 3D dentale

Non resta che stampare.



IT

SHINING3DDENTAL.COM

Stampa in un clic

Per tutte le tue applicazioni cliniche



Il tuo assistente chairside tutto-in-uno

AccuFab-Aris standardizza il tuo flusso di lavoro dal design alla stampa finale, coprendo un'ampia gamma di applicazioni cliniche chairside. Concentrati sui tuoi pazienti. Al resto pensa Aris.



Restauri



Guide chirurgiche



Modelli



Protesi rimovibili



Splint



Dal chairside al risultato, in pochi minuti



Ingombro minimo

Con un ingombro minore di quello di un laptop, AccuFab-Aris pesa solo 8,5 kg e si installa senza vincoli.

Posizionala, accendila, stampa.



Stampa ad alta precisione


Dimensione del pixel ultra fine di 34 μm con risoluzione 4K. Stampe dentali affidabili e garantite, con un adattamento preciso e ritocchi alla poltrona ridotti al minimo.





Piattaforma riscaldata

Mantiene automaticamente una temperatura di 30°C per minimizzare la deformazione della resina, ridurre il rischio di distacco e migliorare il tasso di riuscita delle stampe.

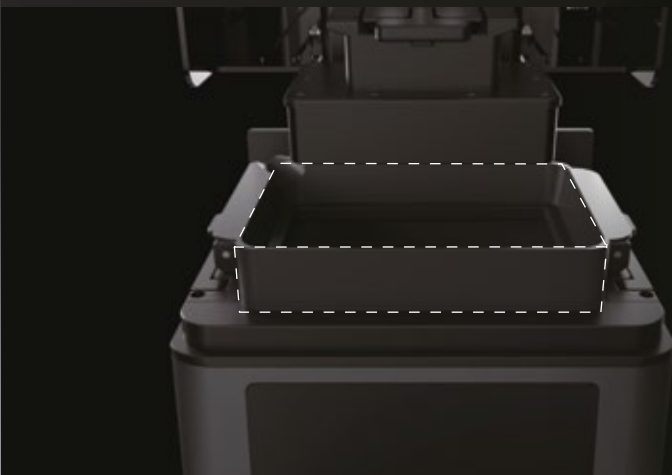

Sensori intelligenti

Il rilevamento in tempo reale dei residui e del serbatoio (NFC) previene gli errori e protegge la tua stampante da potenziali danni.



Straordinaria Resistenza

Piattaforma in alluminio anodizzato duro, progettata per resistere a un uso clinico quotidiano intensivo.



Pronta all'uso

Nessuna complessità di gestione.

Facile da installare. Facile da usare.



Zero regolazioni manuali

Livellamento automatico in un clic e calibrazione automatica dell'asse Z all'avvio, per una configurazione completamente automatizzata.



Manutenzione in 10 secondi

Sostituire lo schermo a sgancio rapido è semplice come fare un caffè: Rimuovi, Posiziona, Blocca—tutto in solo 10 secondi.

Manutenzione Semplificata

Tre modalità di connessione

Integra facilmente AccuFab-Aris col tuo flusso di lavoro dentale digitale tramite USB, Wi-Fi o Ethernet.


Monitoraggio in tempo reale

L'interfaccia semplice consente di monitorare in tempo reale lo stato del serbatoio, la temperatura e la vita dello schermo, per una tempestiva manutenzione.



Integrata con SHINING Flow


SHINING FLOW è una piattaforma digitale che connette le tue scansioni, i nostri servizi di design e la tua stampante 3D in un workflow unificato. Dalla scansione alla stampa, tutto rimane su un'unica piattaforma: i tuoi dati sono al sicuro e non devi cambiare software.

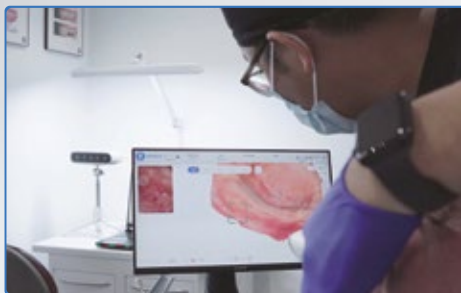

1

Scansione intraorale e facciale



Acquisisci dati intraorali precisi delle arcate edentule. Combinali con una scansione facciale per stabilire la relazione occlusale e mandibolare ottimale.

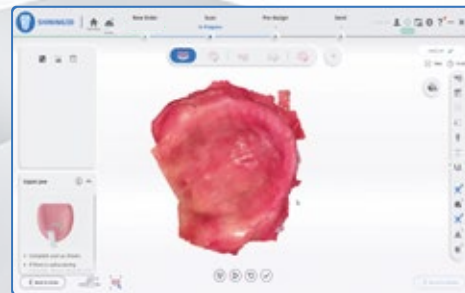

2

Gestione via cloud

I dati di scansione vengono caricati automaticamente sul Cloud SHINING 3D Dental. Accedi istantaneamente alle cartelle dei pazienti, senza trasferimento manuale di file.

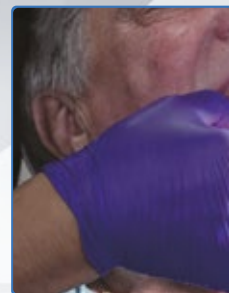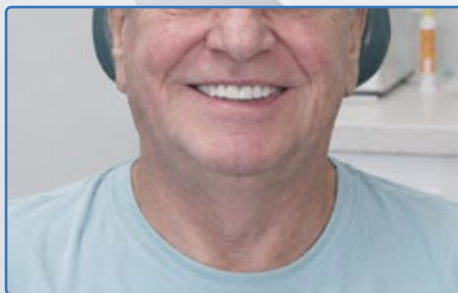


7

Consegna della protesi

Il paziente torna a casa con una protesi rimovibile funzionale ed estetica, che ripristina in modo efficiente sorriso e comfort.

Try-in e a


Valuta l'adattamento della poltrona, con ritocchi alla precisione.

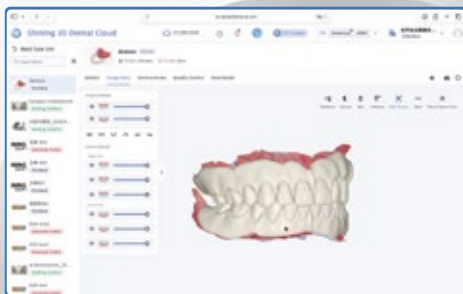

3

SHINING Classic Design

Invia il tuo ordine al servizio di design specializzato SHINING Classic Design per un'anatomia e un adattamento precisi della protesi.

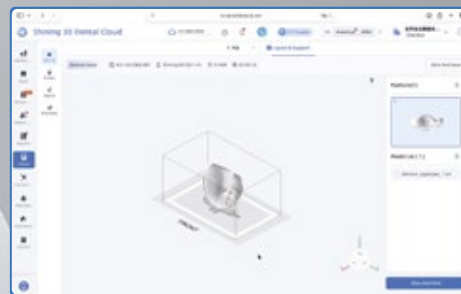

4

Preparazione automatica del file

La piattaforma cloud gestisce nesting, orientamento e slicing, generando file pronti per la stampa con supporti e layout ottimizzati.



6

Aggiustamenti

ento e l'occlusione alla
ni ridotti al minimo grazie
sione digitale.



5

Stampa in un clic

Invia il file già pronto ad AccuFab-Aris con un solo clic.

Passa al digitale con SHINING Flow

Un'unica piattaforma per tutti i tuoi casi clinici: All-on-X, ponti e corone, protesi rimovibili, ortodonzia, implantologia standard.

Come parte di SHINING FLOW, AccuFab-Aris si inserisce perfettamente nelle operazioni quotidiane della clinica, riducendo al minimo i cambi di software e semplificando i flussi di lavoro dal design alla stampa per un'esperienza più ottimizzata.

Lavori più veloci, meno visite e pazienti più soddisfatti—tutto con un unico dispositivo.




SPECIFICHE TECNICHE

AccuFab-Aris

Peso:	< 10KG
Dimensioni:	257 × 236 x 364 mm
Superficie della piattaforma	130 x 80 mm
Dimensione del pixel	34 µm
Velocità di stampa	60 mm/h
Spessore dello strato	50 - 125 µm (regolabile)
Connettività	USB / Wi-Fi / Ethernet
Materiale della piattaforma	Alluminio anodizzato
Volume del serbatoio di resina	200 mL
Riscaldamento della piattaforma	✓
Rilevamento del serbatoio di resina (NFC)	✓
Rilevamento dei residui	✓

Avviso: SHINING 3D si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi specifica o immagine utilizzata in questo documento.

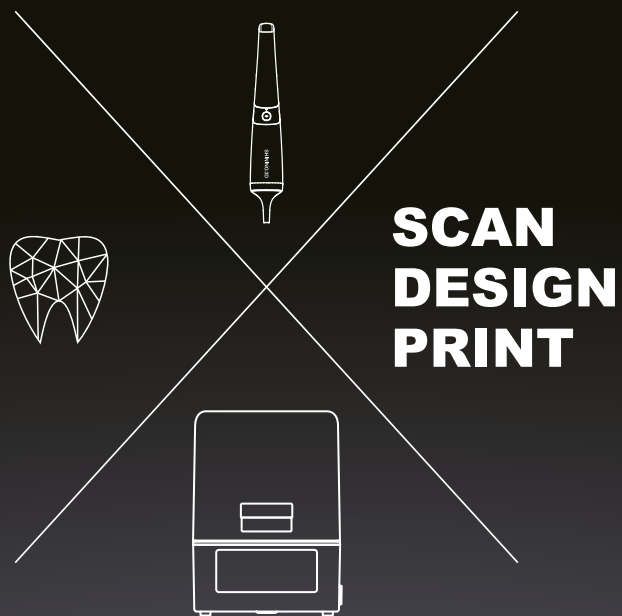

SHINING 3D
DENTAL

sales@shining3d.com
www.shining3ddental.com