



Performer evo™

EVO



a'dec®

# La qualità A-dec® ad un valore soprendente

Performer eVo™ racchiude l'affidabilità e le prestazioni leggendarie di A-dec in una soluzione intelligente, progettata intorno al tuo modo di lavorare. Tutto ciò che ti serve, il comfort che i tuoi pazienti meritano e la qualità A-dec su cui puoi contare.

Progettato per una manutenzione minima e un'affidabilità straordinaria, Performer eVo offre un valore duraturo giorno dopo giorno, paziente dopo paziente. Il meglio di A-dec, nella sua forma evoluta.









# Progettato per l'affidabilità

L'attenzione ai dettagli è ciò che distingue A-dec.

Il riunito Performer eVo è progettato con cura in ogni dettaglio, fino alle parti che non puoi vedere, dal tubicino dei circuiti idrici ai cilindri idraulici della poltrona. Il tutto per offrirti standard di qualità e prestazioni ai massimi livelli.

Perché la vera affidabilità non è solo continuità operativa, ma la certezza che il tuo riunito funzioni in modo costante e prevedibile, ogni volta che tratti un paziente.





# Progettato per la performance

Frutto dell'esperienza di A-dec, ogni parte del riunito Performer eVo è pensata per rendere il flusso del tuo lavoro più fluido ed efficiente. La faretra, adatta a destrimani e mancini, si muove in sincrono con la poltrona, mantenendo i manipoli sempre all'altezza ideale, in piedi o seduti.

E grazie a soluzioni ergonomiche intelligenti, pensate per ridurre affaticamento e tensioni, favorendo al contempo una postura corretta e una visibilità ottimale, puoi concentrarti su ciò che conta davvero: la migliore cura possibile per i tuoi pazienti.

## Soluzioni evolute per il tuo studio

### **Poltrona Performer eVo: compatta, confortevole e resistente**

Mantieni i pazienti comodamente sostenuti con superfici sagomate secondo la mappatura dei punti di pressione. Lo schienale ultrasottile ti consente di avvicinarti al paziente per un accesso ottimale.

### **Lampada LED Performer eVo: tecnologia LED chiara e nitida**

Diagnosi più accurate, minore affaticamento degli occhi e un'ergonomia senza pari. Dotata di sensore touchless per accensione e spegnimento, modalità composito con luce gialla e testa a tre assi per un posizionamento ottimale.

### **Faretra A-dec 300: regolabile per ogni esigenza**

Il design Radius® consente di passare in pochi secondi dalla configurazione per destrimani a quella per mancino, senza bisogno di utensili, mantenendo sempre gli strumenti a portata di mano. Il braccio pantografato bilanciato con freno pneumatico garantisce un posizionamento stabile e controllato.

# Personalizzalo

## Faretra odontoiatrica

Compatta e facile da posizionare, ti permette di avere tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano. Disponibile nei design Continental® o Traditional, così da rispondere alle esigenze del tuo studio.



A-dec 300 Continental



A-dec 300 Traditional

## Touchpad

L'accesso immediato ai comandi, fornito di serie, semplifica le regolazioni della poltrona e l'uso rapido di lampada e bacinella. Passa al touchpad Deluxe per integrare dispositivi come micromotori elettrici, telecamere e ablatori.



Standard



Deluxe

## Pedaliera comando strumenti

Controllo intuitivo, come lo vuoi tu. È possibile scegliere tra una pedaliera a disco con chip air o a leva per una modulazione precisa di manipoli elettrici e turbine.



Pedaliera a disco con chip air



Pedaliera comando strumenti a leva

## Seggiolini

Robustezza iconica e supporto ergonomico. Uno schienale anatomico, il supporto busto regolabile, i bordi arrotondati e l'inclinazione ergonomica della seduta aiutano a ridurre la pressione sui dischi intervertebrali e i dolori muscolari.



Seggiolino operatore Performer eVo



Seggiolino assistente Performer eVo

## Portamonitor

Il portamonitor opzionale può essere posizionato facilmente verso il paziente per consultazione ed educazione o spostato da parte quando non utilizzato.



*Portamonitor con braccio*



*Portamonitor*

## Bacinella e centro di supporto

La bacinella in porcellana opzionale ruota per facilitarne l'utilizzo da parte del paziente e include un serbatoio da due litri per una generosa erogazione di acqua. Il centro di supporto può contenere separatore di amalgama, sistemi di aspirazione o altri accessori.



*Bacinella e centro di supporto*

## Strumentazione assistente

Il braccio telescopico consente di posizionare con precisione le cannule di aspirazione, facilitando il lavoro dell'assistente quando lavora vicino al paziente.




*Strumentazione assistente*

## Tappezzeria termoformato

Tappezzeria elegante in termoformato senza cuciture visibili che rende la pulizia e la manutenzione rapide e semplici. Disponibile in colori standard selezionati. Rivolgersi al rivenditore autorizzato A-dec per i campioni.



*hazelnut*

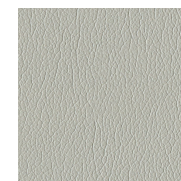

*driftwood*



*sky blue*



*black*



*indigo*

# Specifiche

## Poltrona odontoiatrica Performer eVo

Escursione verticale	Da 398 mm a 835 mm (da 15,7 pollici a 32,9 pollici); altezza minima da terra 424 mm (16,7 pollici) con montaggio doppio (faretra e lampada)
Spessore schienale flessibile	32 mm (1,25 pollici), termoformato
Sistema di azionamento	Azionamento ibrido (schienale elettromeccanico, seduta ad azionamento idraulico)
Limite di peso del paziente	181 kg (400 libbre)
Interruttore di fine corsa schienale e seduta	Sì, arresta la discesa quando viene rilevato un ostacolo
Poggiatesta	A doppia articolazione (con manopola)
Bracciolo	Ribaltabile
Alimentazione integrata 300 watt	Sì
Pedaliera comando poltrona	Opzionale
Opzioni di montaggio	A poltrona: montaggio su palo da 51 mm (2 pollici) o Radius (montaggio singolo o doppio)
Opzioni tappezzeria	Termoformato (disponibile in colori selezionati)

## Faretre odontoiatriche

### A-dec 300 Continental

### A-dec 300 Traditional

Blocchetto pneumatico	Standard a 3 posizioni, opzionale a 4 posizioni	Standard a 3 posizioni, opzionale a 4 posizioni
Conversione sinistra/destra	Sì	Sì
Opzioni cordoni	Vinile o silicone	Vinile o silicone
Numero manipoli	4	4
Maniglie freno	1 standard, seconda opzionale	1 standard, seconda opzionale
Opzioni touchpad	Nessuno, Standard o Deluxe	Nessuno, Standard o Deluxe
Fibre ottiche	Opzionali	Opzionali
Pedaliera comando strumenti	Disco, disco con chip air o leva	Disco, disco con chip air o leva
Braccio	A-dec 333 - Montaggio Radius - Braccio pantografato bilanciato con freno pneumatico A-dec 335 - Montaggio centro supporto - Braccio pantografato bilanciato con freno pneumatico	A-dec 332 - Montaggio Radius - Braccio pantografato bilanciato con freno pneumatico A-dec 334 - Montaggio centro supporto - Braccio pantografato bilanciato con freno pneumatico A-dec 336 - Montaggio Radius - Regolazione altezza manuale

## Lampada LED Performer eVo

Intensità luminosa	Alta: 25.000 lux, Media: 20.000 lux; Bassa: 15.000 lux
Modalità composito	16.000 lux
Fascio luminoso	100 mm x 190 mm a distanza focale di 700 mm (3,9 pollici x 7,5 pollici a 27,6 pollici)
Temperatura colore	5.000 K
Comandi	Accensione/spegnimento touchless, selezione dell'intensità touchless, modalità composito touchless, touchpad e accensione/spegnimento automatico tramite le memorie della poltrona

Scegli tra i colori selezionati del rivestimento resistente

La semplicità di regolazione incoraggia una postura lavorativa corretta


LED a bassa emissione di calore/senza rumore con tre intensità luminose

Supporta comodamente pazienti fino a 181 kg (400 libbre)

Faretra a quattro strumenti

# Reliable Creative Solutions

FOR DENTAL PROFESSIONALS WORLDWIDE

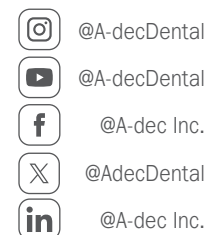

## PIÙ DI UNA SEMPLICE GARANZIA. È IL NOSTRO IMPEGNO.

In A-dec ci concentriamo sul miglioramento dell'odontoiatria, con un servizio assistenza clienti e prodotti odontoiatrici di qualità superiore. Il riunito per sala operatoria A-dec è coperto da una garanzia di dieci anni e da un'assistenza clienti che dura tutta la vita. Ci siamo oggi, ci saremo domani e continueremo ad esserci in futuro. Questo è il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti.

Per i dettagli completi, tra cui le esclusioni, visitare la pagina: [a-dec.com/legal/warranty](https://a-dec.com/legal/warranty)

Colori e prodotti possono differire dalle immagini mostrate e sono soggetti a modifiche senza preavviso. Rivolgetevi al rivenditore A-dec autorizzato di riferimento per le informazioni più aggiornate sul prodotto. Tutti i marchi commerciali nel presente documento sono soggetti ai diritti sui marchi di A-dec, delle sue affiliate e dei rispettivi fornitori collettivi negli Stati Uniti e all'estero.

©2026 A-dec Inc. Tutti i diritti riservati. 85.1091.04/BB/600/3-26/Rev A

### Sede centrale A-dec

2601 Crestview Drive

Newberg, Oregon 97132 USA

Tel: 1.800.547.1883 (solo USA/Canada)

Tel: +1.503.538.7478 (fuori da USA/Canada)

[a-dec.com](https://a-dec.com)

### Altre sedi

A-dec Nashville Experience Center

A-dec Australia

A-dec Regno Unito

