



Attrezzatura

Ritmo  
inarrestabile

Rapido, preciso e in  
sintonia con il lavoro  
dell'odontoiatra.

Si può dire lo stesso per il  
vostro attuale motore?

**Rooter® X4000**

# Innovazione nel cuore della valle svizzera della micro- tecnologia

Dal 1931, dal cuore della valle svizzera della microtecnologia, spingiamo i confini dell'endodonzia, combinando tecnologia e innovazione.

La nostra missione è fornire soluzioni che rispettino la complessa anatomia dei denti, migliorando l'efficienza del trattamento. Con innovazioni rivoluzionarie come XP-endo Rise, RACE EVO, R-Motion, Finisher e TotalFill, abbiamo trasformato la pratica dell'endodonzia, offrendo ai medici strumenti migliori per affrontare le sfide in sicurezza.


Attrezzatura

# Ritmo inarrestabile

Il Rooter X4000 si muove insieme all'odontoiatra: rapido, preciso e in sintonia con i flussi di lavoro dell'endodonzia moderna. La sua interfaccia intuitiva ad alta velocità mantiene il ritmo dell'odontoiatra, garantendo precisione e controllo senza perdere colpi. Perché quando ogni secondo conta, la performance è tutto. Nessun rallentamento, nessuna distrazione, solo un processo continuo e fluido, dall'inizio alla fine. Pronti a tenere il passo con l'endodonzia odierna? Ecco come aumentiamo la performance dell'endodonzia.




Il Rooter X4000 è costruito per seguire il ritmo dell'endodonzia moderna, garantendo velocità, controllo e un processo continuo quando è più necessario. Nessun ritardo, nessuna distrazione. Solo performance pura.

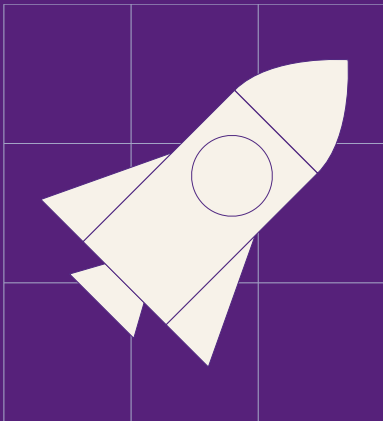

## Performance dinamica

Il Rooter X4000 fornisce precisione ad alta velocità che si adatta al ritmo dell'odontoiatra. Costruito per un flusso di lavoro senza interruzioni, combina potenza e controllo per gestire procedure di routine o complesse senza ritardo, aiutando l'odontoiatra a mantenere efficienza, concentrazione e sicurezza dall'inizio alla fine.

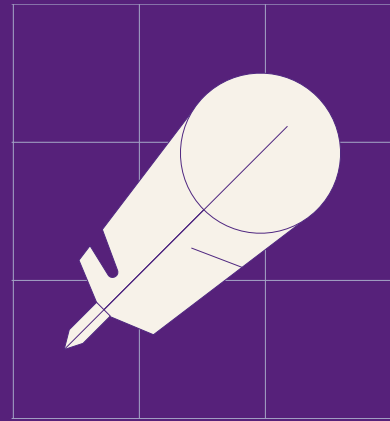

## Facilità d'uso

Con controlli intuitivi e preimpostazioni one-touch, il Rooter X4000 semplifica ogni fase del flusso di lavoro del dentista. Come motore senza fili tabletop, la sua interfaccia responsiva pulita riduce il tempo di impostazione e le distrazioni e consente all'operatore di rimanere concentrato sul trattamento, non sugli strumenti.




# Performance dinamica

Gli odontoiatri necessitano di un motore in grado di adattarsi al loro ritmo: rapido, preciso e affidabile. Il Rooter X4000 offre rotazione ad alta velocità con controllo avanzato della coppia e garantisce al dentista la stabilità e reattività necessarie a gestire sia i casi di routine, sia le anatomie complesse. Che si desideri creare un glide path o finalizzare la sagomatura del canale, il Rooter X4000 supporta i movimenti del dentista con una performance controllata e costante. Nessuna resistenza, nessuna esitazione, solo esecuzione fluida che permette di lavorare al proprio ritmo. E con la compatibilità con sistemi di file multipli, l'X4000 si adatta al processo di lavoro del dentista, aiutandolo a rimanere efficiente e sicuro per tutta la durata del trattamento.

## Facilità d'uso

Il Rooter X4000 è concepito per semplificare la quotidianità del dentista. Le preimpostazioni one-touch fanno risparmiare tempo, mentre un'interfaccia intuitiva e pulita permette una navigazione rapida e senza stress. Le icone grandi e il design del layout intelligente riducono il carico mentale e permettono regolazioni rapide, persino a procedura in corso. Il motore senza fili tabletop ti offre il vantaggio supplementare di una connessione wireless affidabile, per una maggiore libertà e un equilibrio ottimizzato, che migliorano controllo e comfort. Il motore risponde istantaneamente, non facendoti rallentare né perdere la concentrazione. Tutto è progettato per muoversi con il dentista, non ostacolarlo, così da mantenere la completa concentrazione nel trattamento e garantire ai pazienti le cure che si aspettano, senza distrazioni.

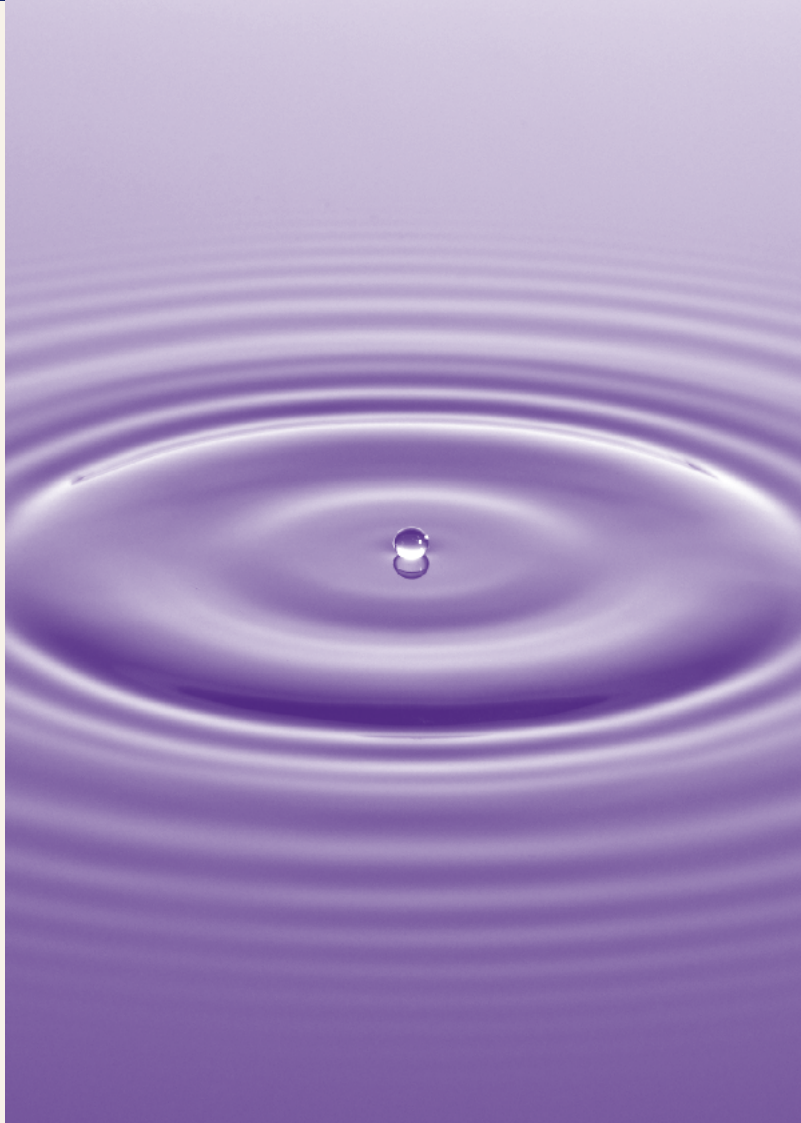

# La velocità è inutile senza il controllo.

“Il nuovo Rooter X4000 mette sistematicamente a disposizione tutte le importanti funzioni di un motore endodontico cordless: velocità, precisione, controllo della coppia e misurazioni precise del rilevatore apicale.

Il motore funziona perfettamente con tutti i file FKG e può essere regolato nel movimento rotante o reciprocante o nella nuova funzione che combina sia il movimento rotante, sia quello reciprocante con un unico clic. L'ampia interfaccia fornisce maggiori informazioni e comfort quando si passa da una preimpostazione all'altra.

L'X4000 è un endomotore affidabile ad alte prestazioni che si integra facilmente nel mio flusso di lavoro quotidiano.”

Dr. Gilberto Debelian  
DMD, PhD / Oslo, Norvegia



# Ti incuriosisce? Maggiori dettagli sul Rooter X4000:



## Libertà senza fili, controllo sicuro

Il nostro nuovo motore endodontico senza fili portatile elimina i cavi tradizionali, offrendo una connessione wireless affidabile tra motore e unità di controllo. Questo fornisce agli odontoiatri maggiore libertà di movimento e bilanciamento del manipolo ottimizzato per un maggiore controllo e comfort. Il supporto a manipolo ricaricabile in continuo amovibile può essere posizionato, all'occorrenza vicino al paziente, assicurando flessibilità ed efficienza durante i trattamenti.

## Il Rooter più veloce

Grazie al design brushless ad alta qualità, questo motore raggiunge velocità fino a 4.000 rpm. Questo migliora la stabilità e la reattività grazie a prestazioni eccellenti.

## Interfaccia touch intuitiva

L'ampio touchscreen semplifica il funzionamento, fornendo letture chiare prima e durante l'uso, permettendo una confortevole selezione dei programmi. Le preimpostazioni one-touch permettono di risparmiare tempo, mentre un'interfaccia intuitiva e pulita permette una navigazione rapida e senza stress, riducendo il carico mentale e permettendo regolazioni rapide.

## Controllo della lunghezza di precisione integrato

Il rilevatore apicale integrato assicura trattamenti più sicuri e più efficienti, mostrando la posizione della lima in tempo reale. Il Rooter X4000 si ferma automaticamente o inverte il movimento non appena viene raggiunto il punto apicale, per un'esperienza senza soluzione di continuità.



## File e sequenze personalizzabili

Il software del Rooter X4000 permette di personalizzare le impostazioni del file e di creare le proprie sequenze di lavoro, con preimpostazioni multiple di memoria realizzate su misura in base alle esigenze specifiche.

## Motore a prova di futuro

Il software X4000 consente di aggiornare il sistema, pertanto non è necessario un nuovo motore quando vengono lanciate nuove versioni del sistema FKG. Basta aggiornare il software e si può iniziare subito a lavorare.



## Visibilità ottimizzata grazie al LED integrato

Il contrangolo a 360° del Rooter X4000 presenta una luce LED integrata che può essere attivata o disattivata in base alle proprie preferenze, assicurando un'eccellente visibilità durante i trattamenti endodontici.

# Referenze

Rooter® X4000

**Scatola di imballaggio (inclusi accessori)**



cod. DT 10068030  
cod. HSK 98 50596

Trova un rivenditore:



# Empower Endo

CE 0197  
Qualitäts- und Medizinprodukte  
Informationsdienst  
China, Europa, USA, Japan, etc.  
FKG REF: 999720001A.IT\_REV.01\_2025-08-15 - © FKG Dentaire Sàrl - Le immagini dei nostri prodotti non sono vincolanti

Benvenuti nel cuore della valle svizzera della microtecnologia.

Da quasi un secolo reinventiamo e mettiamo costantemente in discussione ciò che pensavamo di sapere.

Ci impegniamo a creare innovazioni che introducano nuovi modi di lavorare: più rispettosi, efficienti, agili, ergonomici e sicuri, al servizio delle nuove generazioni, promuovendo nuove visioni di vita, per noi, per voi e per i pazienti.

Abbracciamo il cambiamento che migliora le performance nell'endodonzia.

FKG | Change the game.

Entra nel nostro  
universo rivoluzionario



Visita il nostro  
sito Internet



[www.fkg.ch](http://www.fkg.ch)

FKG Dentaire Sàrl  
Le Crêt-du-Loche 4  
2322 Le Crêt-du-Loche  
Svizzera

+41 32 924 22 44  
[info@fkg.ch](mailto:info@fkg.ch)