



HANDY SURGERY

Potenzia il tuo spazio • *Empower your workspace*

HANDY SURGERY

Introduzione <i>Introduction</i>	2
Morpheus <i>Morpheus</i>	6
Maycart <i>Maycart</i>	14
Easytray <i>Easytray</i>	18
Aspirol <i>Aspirol</i>	22
Chirunox <i>Chirunox</i>	28
Matrix <i>Matrix</i>	32
Sterila <i>Sterila</i>	36
Stardard set <i>Stardard set</i>	42
Sterinox <i>Sterinox</i>	52
Sterinox attrezzature <i>Sterinox equipment</i>	58



Handy Surgery è sinonimo di:

- **Versatilità:** con Handy Surgery hai a disposizione variabili e accessori differenti: le attrezzature e i complementi si adattano e si integrano in base alle necessità e alla tipologia di studio.
- **Linearità:** l'aspetto minimal e i materiali utilizzati, come l'acciaio Inox, conferiscono a tutta la linea un impatto visivo professionale e ordinato, trasmettendo pulizia e sicurezza ai pazienti.
- **Esclusività:** l'intera linea presenta un brevetto (cordoncini "Safety Handpiece" AN2013A000114 / EP14157497.0) e caratteristiche che ne certificano l'unicità e l'innovazione per i trattamenti professionali di ortodonzia, medicina estetica e generale.

Il tutto con la garanzia di un prodotto Made in Italy !

Handy Surgery is synonymous with:

- **Versatility:** with Handy Surgery you can use a wide range of solutions and accessories: the equipment and the accessories adapt and integrate perfectly into your practice, according to your specific requirements.
- **Linearity:** the minimal design and the materials used, i.e. stainless steel, make the entire line look very professional and neat, giving patients a sense of cleanliness and safety.
- **Exclusivity:** the entire line has a patent (cords "Safety Handpiece" AN2013A000114 / EP14157497.0) and features that certify the uniqueness and innovation for professional dental therapy, aesthetic medicine and general medicine.

All product with the guarantee of a Made-in-Italy product!



Al fine di rispondere alla continua richiesta di innovazioni tecnologiche e per rendere lo studio efficiente a 360°, Tecnomed Italia ha creato Sterinox, un progetto completo per una sala di sterilizzazione che sia:

- **Professionale:** è stata progettata per garantire il massimo della professionalità e della pulizia.
- **Tecnologica:** fanno parte della linea una serie di apparecchiature performanti e tecnologiche, indispensabili per svolgere al meglio tutti gli step del processo di sterilizzazione.
- **Sicura:** gli elevati standard igienici eliminano le possibilità di qualsiasi tipo di contaminazione.

Il tutto con la garanzia di un prodotto Made in Italy !

In order to respond to the constant demand for technological innovation, and 360° research and development, Tecnomed Italia has created Sterinox, a comprehensive design for a sterilization room that is:

- *Professional: designed to guarantee maximum professionalism and cleanliness.*
- *Technological: including a set of high-performance and technological instruments and equipment, indispensable for carrying out all steps in the sterilization process.*
- *Safe: the highest hygiene standards minimize the risk of any form of contamination.*

All product with the guarantee of a Made-in-Italy product!

L'ESIGENZA THE NEED

Negli ultimi anni si è affermata in modo crescente la necessità di allestire uno studio odontoiatrico orientato alla chirurgia maxillo-facciale e ambulatori specifici per la chirurgia in generale. Questa esigenza non veniva soddisfatta dalle attrezzature disponibili sul mercato e il professionista doveva scontrarsi con molteplici ostacoli quali scarsa libertà di movimento, elementi mobili e carrelli difficili da sanificare, componenti di intralcio tra medico e paziente.

In recent years, there has been an increasing need for equipment to set up dental practices dedicated to oral and maxillofacial surgery and specific outpatient clinics for surgery in general. This requirement could not be satisfied by the equipment available on the market: the professionals had to overcome multiple obstacles such as limited freedom of movement, mobile elements and trolleys difficult to sanitize, components that hinder the doctor and patient interaction.

LA RISPOSTA DI TECNOMED THE SOLUTION OF TECNOMED


Con la linea Handy Surgery, Tecnomed Italia è stata in grado di replicare in ambito ambulatoriale le più importanti caratteristiche della vera sala operatoria. Concepita per rispondere a tutte le esigenze di un poliambulatorio, questa linea è l'ideale per studi medici avanzati che offrono un'ampia scelta di servizi e comfort ai propri pazienti: dall'odontoiatria alla chirurgia estetica, passando per visite ed interventi dermatologici, ginecologici e otorinolaringoiatrici.

With the Handy Surgery line, Tecnomed Italia was able to replicate the most important features of an operating theatre in the outpatient sector. Designed to meet all the needs of an outpatient clinic, this line is ideal for advanced medical practices that offer a wide range of services and comforts to their patients: from dentistry to cosmetic surgery, through dermatological, gynaecological and otorhinolaryngological examinations and interventions.

LA PROGETTAZIONE THE DESIGN


Ogni elemento della linea, progettato in collaborazione con i migliori chirurghi maxillofacciali, è stato studiato per favorire il più possibile l'avvicinamento tra medico e paziente in massima sicurezza: il medico può concentrarsi esclusivamente sul paziente senza ostacoli e con un'incredibile libertà di movimento. La linea di sterilizzazione, completa di apparecchiature esclusive, è studiata per riunire tutte le attrezzature e gli strumenti necessari per svolgere il processo di sterilizzazione senza intralci.

Each element of the line, designed in collaboration with the best oral and maxillofacial surgeons, has been studied to improve the doctor-patient interaction in utmost safety: the doctor can concentrate exclusively on his/her own activity, without any hindrance, with an incredible freedom of movement. The sterilization line, complete with exclusive equipment, is designed to bring together all the equipment and instruments necessary for the sterilization process without creating any hindrance or obstruction.

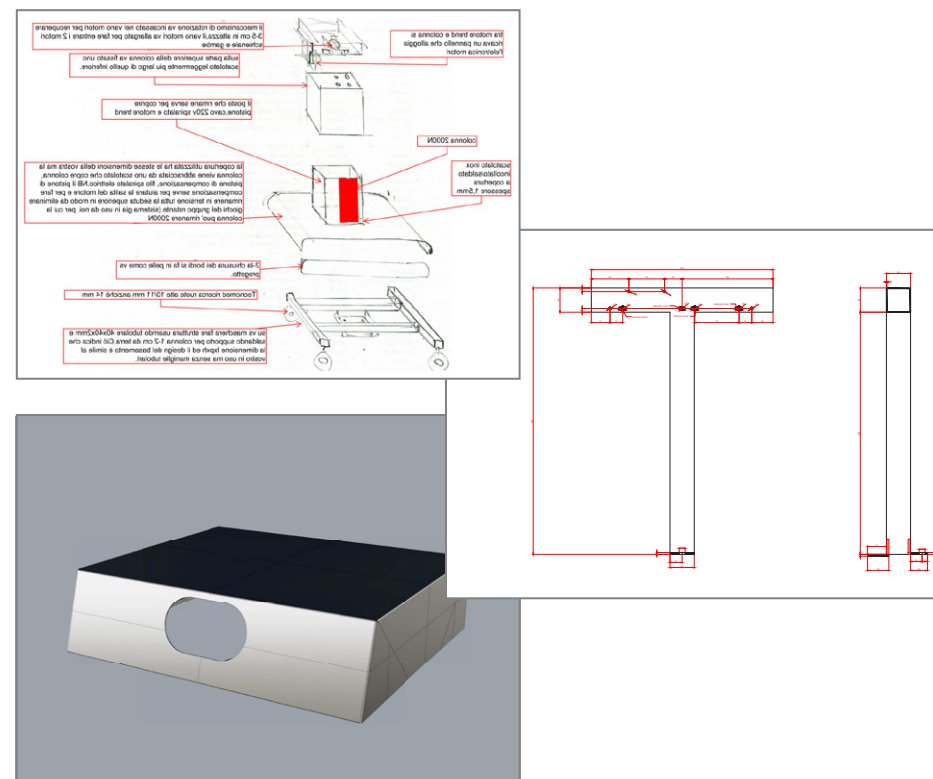

PROGETTIAMO IL TUO SPAZIO


WE DESIGN YOUR SPACE

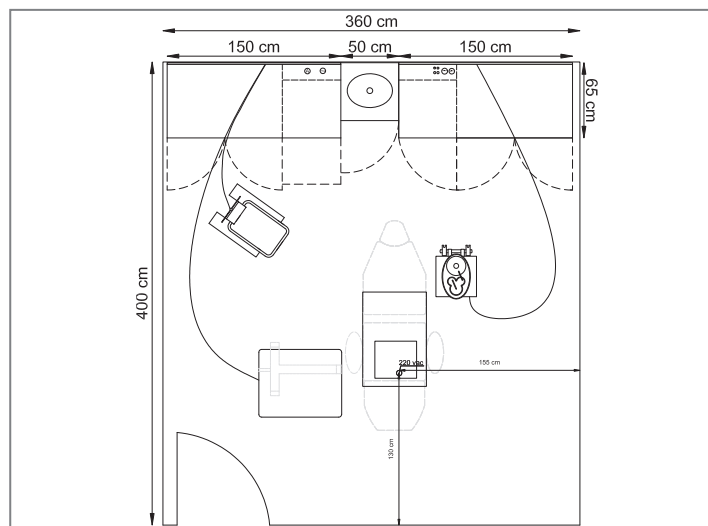


Grazie alla linea di arredamento completamente modulare, Tecnomed Italia progetta per il medico professionista l'ambiente di lavoro su misura. In base alla planimetria e valutando le esigenze operative, il progetto prende forma: Handy Surgery offre una combinazione di elementi in grado di fornire un'ergonomia senza paragoni, sia per la sala chirurgica che per la sala di sterilizzazione. Con le innumerevoli varianti e funzionalità a disposizione, progettiamo con il medico professionista l'arredamento perfetto, che si adatti agli spazi.

Thanks to the fully modular furniture line, Tecnomed Italia can tailor the working environment to the professional doctor.

Each project takes shape following an assessment of room layout and operational needs. Handy Surgery offers a combination of elements that provide unbeatable ergonomics, both for the operating theatre and the sterilization room. With countless variations and functionalities available, we design, together with the professional doctor, the perfect furniture for the intended space.

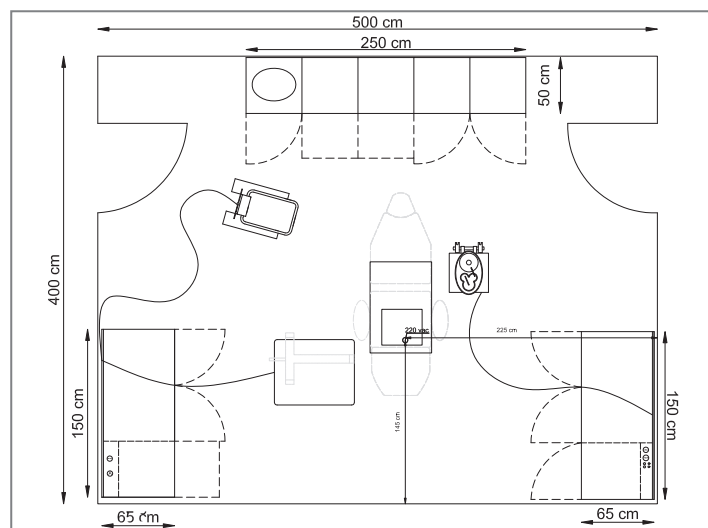

Esempi di posizionamento con configurazione standard
Examples of set-up with standard configuration

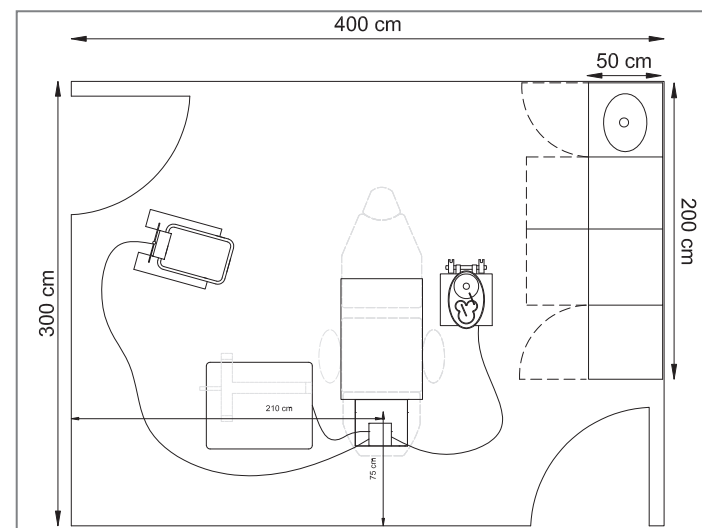

Esempio di posizionamento con configurazione completa centro studio
Example of set-up with complete configuration of the practice centre

MORPHEUS

MOLTO PIÙ DI UNA POLTRONA ODONTOIATRICA
MUCH MORE THAN A DENTAL CHAIR




Morpheus non è una semplice poltrona odontoiatrica: grazie ai quattro motori è possibile effettuare molteplici movimenti, trasformandola velocemente in un vero e proprio lettino chirurgico. Gli ingombri inutili vengono eliminati per favorire l'avvicinamento del medico al paziente agevolando così le consuete pratiche chirurgiche.

Morpheus is not just a simple dental chair: thanks to its four motors, it can perform multiple movements, quickly converting into a real operating table. Any unnecessary encumbrances have been eliminated to allow for smooth doctor-patient interaction, thus facilitating the usual surgical procedures.



La rotazione della seduta agevola l'entrata del paziente ed il posizionamento.

The chair rotates to permit easy patient access and positioning.

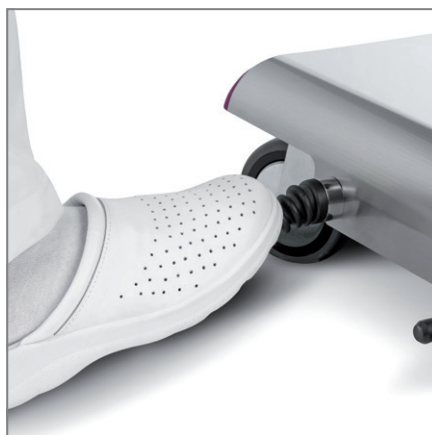

Due joystick a portata di piede per il controllo dei movimenti, azionabili anche con pulsantiera.

Two joysticks within easy reach of your feet let you manage the same movements as the push button panel.




I comandi sincronizzati permettono di variare la posizione da seduta a lettino.

Synchronised controls let you recline the chair from sitting to horizontal position.



La struttura estremamente stabile permette un sollevamento da 550 a 950 mm di 200 kg.

An extremely stable base lets you raise the chair from 550 to 950 mm of 200kg.

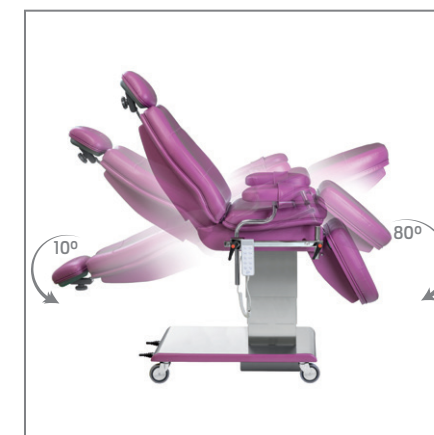

Il poggiatesta e la seduta inclinabili permettono di ottenere la posizione gravità zero e trendelenburg.

Leg supports and a tilting seat let you place patients in the zero gravity and Trendelenburg positions.



Tecnomed utilizza materiali di prima qualità per la realizzazione di Morpheus: la struttura in acciaio Inox, priva di superfici discontinue e rientranze permette una facile igienizzazione della poltrona e durabilità nel tempo.

Lo sky antimicrobico di alta qualità presenta tutte le caratteristiche essenziali in ambito chirurgico:

- Confort
- Facile pulizia
- Idrorepellenza
- Leggerezza
- Resistenza all'usura
- Ignifugo

Tecnomed uses top quality materials to manufacture Morpheus: the structure of stainless steel, perfectly smooth and hollow-free, makes the chair easy to sanitize and durable over time.

The high-quality antimicrobial artificial leather upholstery has all the features essential in surgery:

- Comfort
- Easy cleaning
- Water repellency
- Lightness
- Wear resistance
- Fire-proof

Per adattarsi ad ogni tipologia di intervento o visita, la poltrona Morpheus prevede l'aggiunta di molteplici accessori come il reggi-cosce per le attività di ginecologia, il poggiatesta con foro per gli interventi estetici o fisioterapici, l'asta porta-flebo e il bracciolo per prelievi. Ogni elemento è stato studiato per interagire al massimo con lo spazio, evitando di ostacolare le attività e offrire tutto il comfort necessario sia al medico sia al paziente, anche nei lunghi interventi.

To adapt even more effectively to different specialist applications, the Morpheus chair can be fitted with a wide range of accessories, including gynaecological thigh supports, a headrest with hole for aesthetic surgery and physiotherapy, an IV drip stand and an arm rest for blood tests. Each accessory is designed to integrate effectively with the chair without getting in the way of your movements, and to offer patients maximum comfort even throughout long treatments.

CLASSICA O SBARAZZINA? CLASSIC OR FUNNY?



Il colore dello sky di Morpheus è infinitamente personalizzabile: tra la vasta gamma di colori disponibili, troverai la tonalità che si adatta meglio al tuo ambiente di lavoro.

The colour of Morpheus upholstery is available in an infinity of choices: among the wide range of colours available, you will certainly find the one that best suits your practice.



Poggiatesta anatomico multiarticolato con doppio snodo regolabile in altezza.

Fully adjustable anatomic headrest with double-jointed height adjustment.

CONFORMITÀ TAPPEZZERIA

CONFORMITY OF UPHOLSTERY

Caratteristiche <i>Technical data</i>	Valore <i>Value</i>	Norma <i>Norm</i>
Composizione <i>Composition</i>	87,5% PVC Plastico / 12,5% Cotone <i>87,5% Plasticized PVC / 12,5% Cotton</i>	
Peso <i>Weight</i>	640 g/m ² ± 50 g/m ²	UNI EN 22286
Spessore <i>Thickness</i>	1,0 mm ± 0,05 mm	UNI EN 22286
Altezza <i>Width</i>	1380 - 1400 mm	UNI EN 22286

Tipo di prova <i>Type of test</i>	Valore <i>Value</i>	Norma <i>Norm</i>
Resistenza all'abrasione <i>Abrasion resistance</i>	OK	UNI 4818 15 MET. A
Resistenza alla rottura <i>Tensile strenght</i>	Longitudinale <i>Longitudinal</i>	250 N ± 50 N
	Trasversale <i>Transversal</i>	150 N ± 50 N
Allungamento a rottura <i>Elongation at break</i>	Longitudinale. <i>Longitudinal</i>	≥ 40 %
	Trasversale <i>Transversal</i>	≥ 120 %
Reazione al fuoco di mobili imbottiti sottoposti all'azione di una piccola fiamma <i>Small flame test on upholstered furniture</i>	Classe: 1 IM <i>Class: 1 IM</i>	CSE RF 4/83 UNI 9175



Confortevole
Comfortable



Resistente
Resistant



Antimicrobico
Antimicrobial






Idrorepellente
Waterproof



Ignifugo
Fireproof

SCHEDA PRODOTTO

PRODUCT DATA SHEET

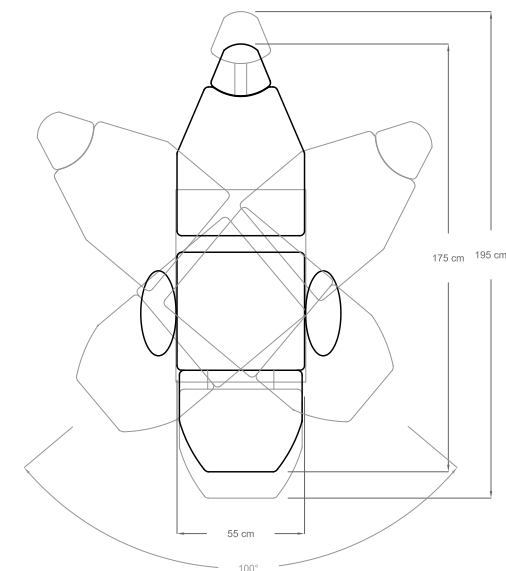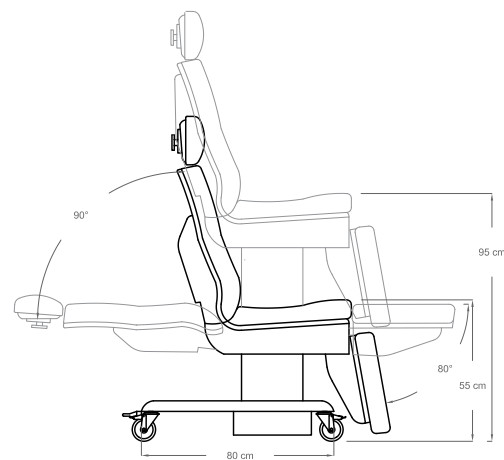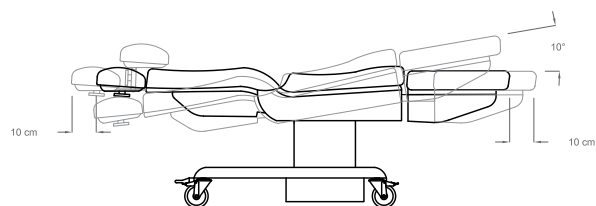

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza: 750 VA
Tensione: 230 Volt ~ 50-60HZ
Peso: 180 Kg
Protezione con fusibile da 3,15A

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power: 750 VA
Voltage: 230 Volt ~ 50-60HZ
Weight: 180 Kg
Protection with 3,15A



APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

SEGGIOLINI HANDY LINE

HANDY LINE STOOLS



La scelta di un appropriato seggiolino ha un'importanza rilevante per la salute dell'operatore. I seggiolini professionali Beauty e Round sono stati progettati per offrire il miglior comfort anche dopo lunghe ore di intervento. La loro struttura ergonomica permette di mantenere una postura corretta, assicurando una distribuzione uniforme del peso. L'utilizzo di una tappezzeria in ecopelle, antimicrobica e idrorepellente, garantisce una facile igienizzazione dei seggiolini. La gamma offre trenta colorazioni differenti che si abbinano alla perfezione con le tinte e i materiali delle poltrone.

An appropriate stool is an important investment for the comfort and health of the dental professional. Beauty and Round professional dentists' chairs are designed for complete comfort even after many hours of work. Their ergonomic structure helps you to maintain correct posture while distributing weight in a uniform manner. Their antibacterial and water-repellent imitation leather upholstery makes these chairs extremely easy to disinfect. The range offers a choice of thirty different colours for a perfect match with the finish and materials of your dental chair.




La tappezzeria in ecopelle di alta qualità rende la seduta morbida e anatomica, assicurando una distribuzione uniforme del peso corporeo, senza compressioni dolorose.

Top quality imitation leather upholstery ensures a soft, anatomical seating position with uniform weight distribution and no painful compressions.



Beauty e Round sono dotati di salita e discesa pneumatica regolabile e regolazione della profondità dello schienale.

Beauty and Round chairs feature adjustable pneumatic height adjustment and backrest depth adjustment.




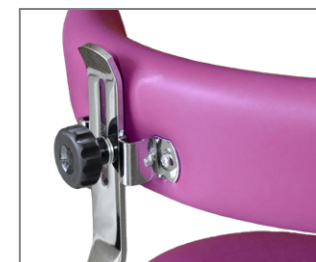


Nel modello Round lo schienale è regolabile anche in altezza ed inclinazione.

The Round model also features backrest height and angle adjustment.

CARTELLA COLORI

COLOR CHARTS

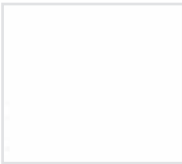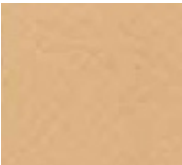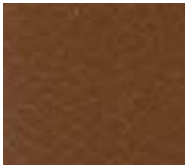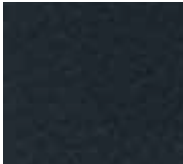	G33 - RAL 9003 Bianco segnale <i>Signal white</i>		G36 - RAL 9001 Bianco crema <i>Cream</i>		G17 - RAL 3015 Rosa chiaro <i>Light pink</i>		G40 - RAL 5023 Blu distante <i>Distant blue</i>		G39 - RAL 5024 Blu pastello <i>Pastel blue</i>
	G30 - RAL 1001 Beige <i>Beige</i>		G32 - RAL 8002 Marrone segnale <i>Signal brown</i>		G18 - RAL 4006 Porpora <i>Traffic purple</i>		G13 - RAL 6019 Verde biancastro <i>Pastel green</i>		G14 - RAL 6018 Verde giallastro <i>Yellow green</i>
	G47 - RAL 8019 Marrone grigiastro <i>Grey brown</i>		G31 - RAL 1002 Giallo sabbia <i>Sand yellow</i>		G59 - RAL 4001 Lilla rossastro <i>Red lilac</i>		G37 - RAL 6027 Verde chiaro <i>Light green</i>		G83 - RAL 6017 Verde maggio <i>May green</i>
	G8 - RAL 1032 Giallo traffico <i>Broom yellow</i>		G9 - RAL 2011 Arancio profondo <i>Deep orange</i>		G19 - RAL 4008 Violetto segnale <i>Signal violet</i>		G38 - RAL 6000 Verde patina <i>Patina green</i>		G15 - RAL 6011 Verde reseda <i>Reseda green</i>
	G10 - RAL 3031 Rosso oriente <i>Orient red</i>		G34 - RAL 3020 Rosso traffico <i>Traffic red</i>		G20 - RAL 4007 Porpora violetto <i>Purple violet</i>		G16 - RAL 6020 Verde cromo <i>Chrome green</i>		G42 - RAL 7040 Grigio finestra <i>Window grey</i>
	G35 - RAL 3004 Rosso porpora <i>Purple red</i>		G11 - RAL 4004 Viola bordeaux <i>Violet bordeaux</i>		G41 - RAL 5003 Blu zaffiro <i>Sapphire blue</i>		G43 - RAL 7011 Grigio ferro <i>Iron grey</i>		G44 - RAL 9004 Nero segnale <i>Signal black</i>

MAYCART

FUNZIONALITÀ A PORTATA DI MANO
FUNCTIONALITY AT YOUR FINGERTIPS



Il carrello Maycart, completamente in acciaio inox, mette a disposizione tutti gli strumenti odontoiatrici, integrati in un tavolo di Mayo regolabile in altezza. Unendo due funzioni in un unico elemento è possibile semplificare tutti i movimenti di impostazione lavorativa. L'ampio pannello di controllo LCD con tasti soft touch permette di tenere sotto controllo i valori impostati, inoltre, il vassoio e tutti i porta strumenti, sono amovibili e autoclavabili o/e termodisinfezzabili, ottenendo la massima sterilizzazione di tutte le superfici. Maycart è stato progettato garantendo la massima funzionalità operativa, permettendoti di concentrarti esclusivamente sulla tua attività senza intralci.

The Maycart cart, made entirely of stainless steel, provides you with all the dental instruments you need, integrated in a height-adjustable Mayo table. By combining two functions in a single unit, you can simplify all your job setup movements. The wide LCD control panel with soft touch keys allows you to control the settings. In addition, the tray and all instrument holders, are removable and autoclave compatible or/and can be disinfected at high temperatures, ensuring perfect sterilization of all surfaces. Maycart has been designed to ensure utmost operational functionality, allowing you to focus exclusively on your work, hassle-free.



Il vassoio può traslare orizzontalmente fino a poter essere posizionato sopra il paziente, favorendo la presa degli strumenti chirurgici.

The tray can be moved in a horizontal plane, to be brought above the patient, for easy handling of the surgical instruments.



Supporti strumenti estraibili ed autoclavabili a 121°C.

Instrument holders removable and suitable for autoclave sterilization at 121°C.



Pedale progressivo Feed-Fec: attiva tutte le funzioni degli strumenti, evitando ogni rischio di contaminazione crociata.

Feed-Fec progressive pedal: activates all functions of the instruments, while avoiding any risk of cross contamination.



NASCONDI GLI ELEMENTI CHE NON TI OCCORRONO

CONCEAL THE ITEMS YOU DON'T NEED



Maycart, se non utilizzato, ha la possibilità di essere inserito all'interno di un apposito mobile, che nasconde il carrello garantendo al tempo stesso un ampio piano di lavoro. Inoltre, al momento dell'ingresso in sala del paziente, non avere apparecchiature in vista contribuirà al mantenimento di un clima maggiormente rilassato ed ospitale. I cassetti sono estraibili, per garantire la massima igiene, e dotati di guide scorrevoli e con ammortizzatore integrato, che permette una chiusura lenta e silenziosa. Sono inoltre forniti completi di bacinelle di tre tipologie (da 1, 2 e 4 comparti) che possono essere inserite indifferentemente nei vari cassetti, a seconda delle esigenze di organizzazione degli strumenti.

Maycart, if not used, can be placed into a special cabinet, which conceals the cart, while providing you with a generous worktop. Moreover, when the patient enters the room, there is no equipment in sight. This creates a more relaxed and welcoming environment.

The drawers are removable to ensure perfect hygiene and are equipped with sliding guides and integrated shock absorbers for a smooth, silent closing. They come with instrument trays of three types (with 1, 2 and 4 compartments) that can be inserted in the various drawers as you wish, depending on your organizational needs.




I cassetti sono forniti completi di bacinelle di tre tipologie (da 1, 2 e 4 comparti) che possono essere inserite indifferentemente nei vari cassetti, a seconda delle esigenze di organizzazione degli strumenti.

The drawers are supplied complete with instrument trays of three types (with 1, 2 and 4 compartments) that can be inserted in the various drawers, according to your organizational needs.





Le ante del mobile sono dotate di un'apposita apertura per il passaggio del tubo corrugato: quando Maycart viene utilizzato, le ante possono essere comodamente richiuse evitando intralci durante le operazioni.

The cabinet doors feature a special opening through which passes the corrugated tube: when Maycart is used, the doors can be closed easily, allowing you to work smoothly.

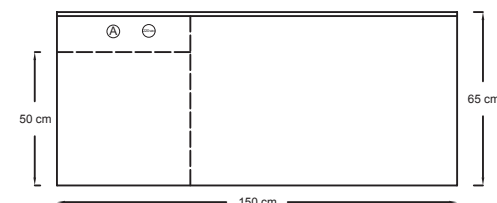

SCHEDA PRODOTTO

PRODUCT DATA SHEET

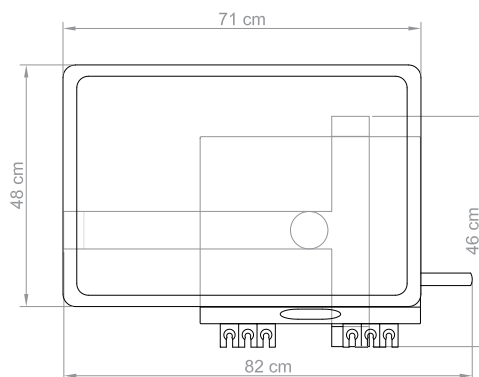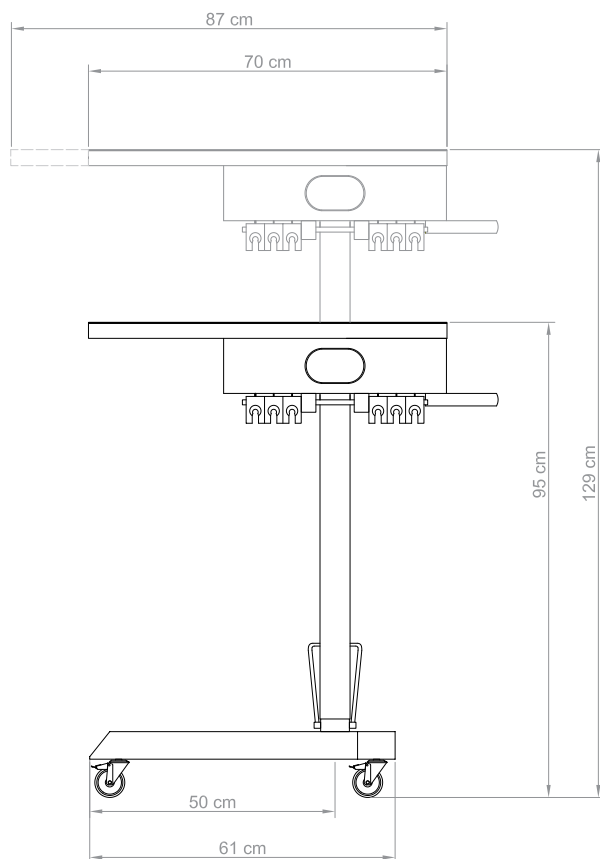

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza: 63 VA
Tensione: 230 Volt ~ 50-60HZ
Pressione massima aria: 8 bar
Peso: 40 Kg
Protezione con fusibile da 6,3A

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power: 63 VA
Voltage: 230 Volt ~ 50-60HZ
Maximum air pressure: 8 bar
Weight: 40 Kg
Protection with 6,3A




APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

EASY TRAY

PIÙ ELEMENTI RIUNITI IN UN UNICO CARRELLO

DIFFERENT ELEMENTS IN ONE UNIT

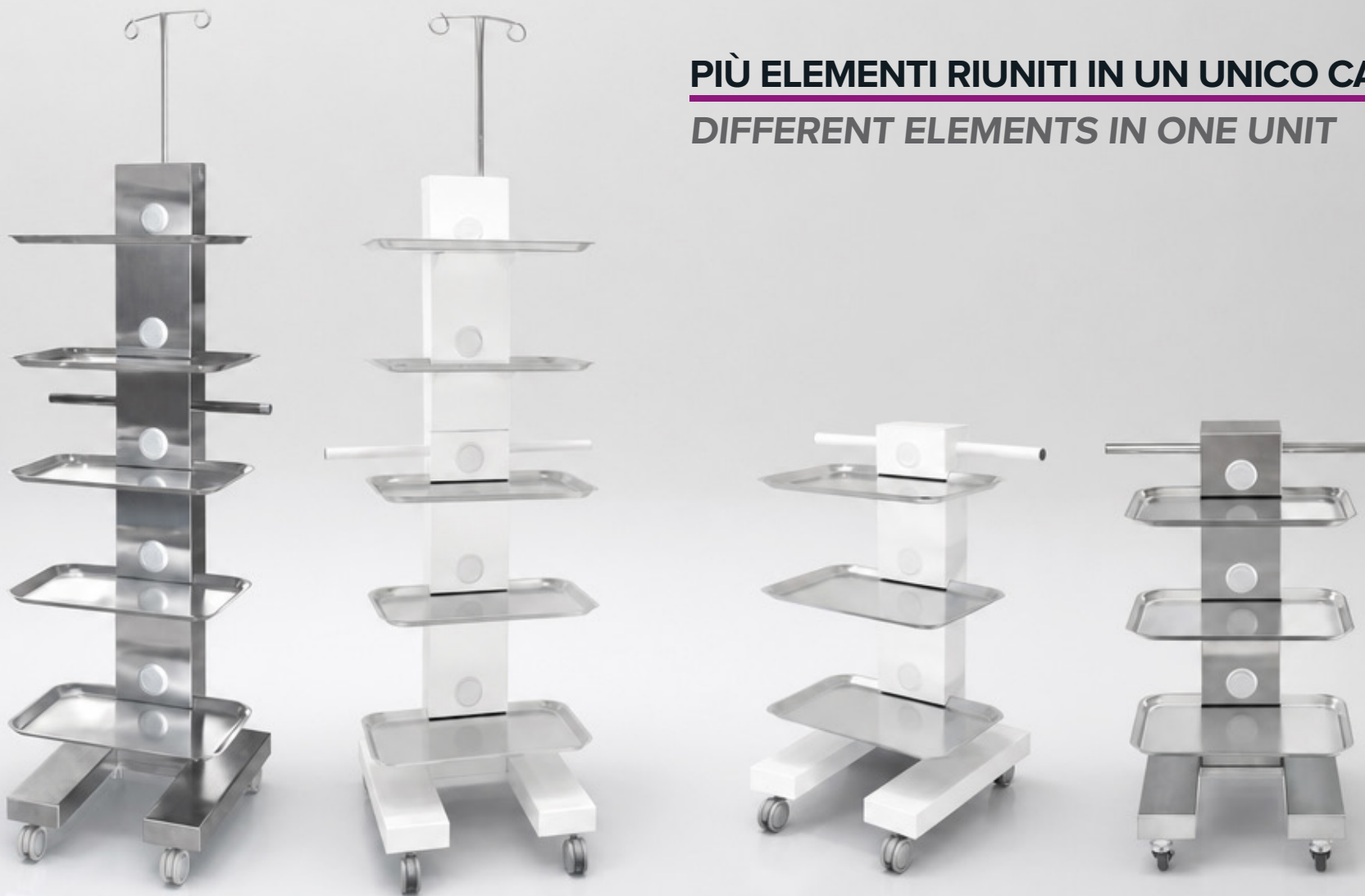

Nei moderni studi odontoiatrici, le procedure e le tecniche utilizzate, per prendersi cura di tutte le patologie dei pazienti sono molteplici: questo comporta la presenza e l'utilizzo di svariati strumenti, composti a loro volta da manipoli, cordini, pedaliere, eccetera. Tutto questo può comportare difficoltà di igienizzazione, ma anche confusione durante gli interventi e una percezione negativa da parte del paziente. La soluzione proposta da Tecnomed Italia è Easy Tray, il carrello per apparecchiature chirurgiche che diventa "termo-disinfettabile", grazie ai suoi cinque ripiani in acciaio Inox e ai supporti per gli strumenti (montati su un braccio frontale o laterale a scelta) comodamente estraibili e lavabili.

Completamente in acciaio inox, modulabile e configurabile a seconda delle proprie esigenze, Easy Tray è dotato di una versatilità unica: i cinque tray sono infatti posizionabili sul lato più lungo o più corto a seconda delle forme delle apparecchiature.

È l'ideale per ospitare apparecchiature chirurgiche complementari come: ablatori, elettrobisturi, piezo-surgery, micromotori da impianti, micromotori endodontici, laser, stryker chirurgico, apparecchi sbiancanti, monitor multi-parametrici.

Un'unica asta porta-flebo, integrata e regolabile in altezza, riesce a supportare fino a tre sacche di soluzione fisiologica, favorendo gli interventi. Easy Tray è studiato in modo da nascondere perfettamente i collegamenti elettrici, come prevedono le normative vigenti, ottenendo in questo modo un ambiente più pulito e sterile alla vista.

In modern dental practices, the procedures and the techniques used to cover all types of pathologies are multiple: this involves the presence and use of various instruments, the latter being composed of handpieces, cords, pedals, etc.. All this can give rise to hygiene problems and also to confusion during surgery, along with a negative perception of the patient.

The solution proposed by Tecnomed Italia is Easy Tray, the cart for surgical equipment that becomes "suitable for disinfection at high temperatures", thanks to its five stainless steel shelves and the instrument holders (fitted on a front or side arm, as needed) that are easily removable and washable.

Made entirely of stainless steel, modular and configurable according to your needs, Easy Tray boasts a unique versatility: the five trays can be placed either on the longest or the shortest side, based on the shape of the equipment.

It is ideal to house complementary surgical equipment such as scalers, electrosurgery units, piezoelectric surgical devices, implant micromotors, endodontic micromotors, lasers, surgical Stryker equipment, whitening devices, multi-parameter monitors.

A single, integrated, height-adjustable infusion set stand can hold up to three bags of saline solution to ensure easy operation. Easy Tray has been designed to perfectly conceal the electrical connections, as required by current regulations, thus the environment is cleaner and more sterile to the eye.



Braccio portamanipoli con supporti autoclavabili (optional).

Autoclavable handpiece holder arm for enhanced organization (optional).



Colonna elettrificata nascondi cavo. Vassoi estraibili e sterilizzabili per ospitare apparecchiature.

Electrified column and cable channel. Removable and sterilizable trays to accommodate instruments and equipment.



La versione 5 vassoi include l'asta portaflebo regolabile in altezza.

The 5-tray version adjustable IV pole for added functionality



Attacco VESA 75/100 per monitor (optional).

VESA 75/100 mount for monitor integration (optional).

SCHEDA PRODOTTO

PRODUCT DATA SHEET

SUPPORTI STRUMENTI

INSTRUMENT SUPPORTS

I supporti sono progettati principalmente per le apparecchiature Tecnomed Italia:

- Codice MM700 -> motore per implatologia Technoimplant

- Codice PSR1000 -> unità per piezochirurgia UltraSurgery

- Codice EB50TM -> elettrobisturi Safetycut

Ciò non toglie che possano essere idonei anche per la apparecchiature già in possesso; in caso contrario Tecnomed Italia realizza i supporti su misura.

The holders are mainly designed for Tecnomed Italia devices model:


- Code MM700 -> Technoimplant implant motor

- Code PSR1000 -> UltraSurgery piezosurgery unit

- Code EB50TM -> Safetycut electric scalpels

Nevertheless, they may also be suitable for the equipment already in our possession.

Upon request, Tecnomed Italia manufactures tailored holders.

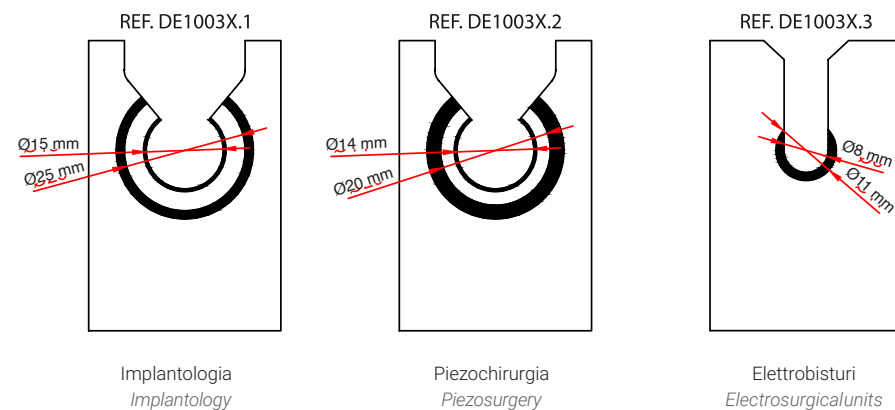


AREA DI APPOGGIO TRAY

TRAY SUPPORT AREA


- MODELLO DE1003X.01: area di appoggio 260 x 410 mm







- MODEL DE1003X.01: support area 260 x 410 mm

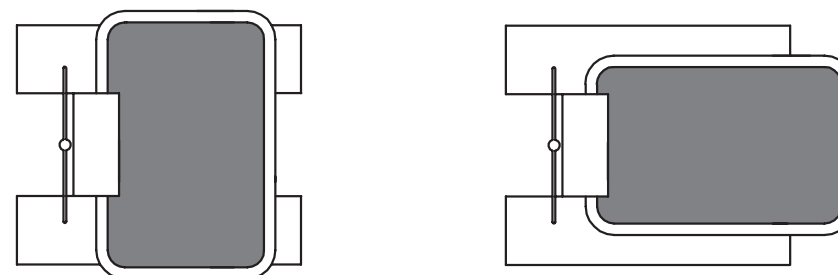

- MODELLO DE1003X.02: area di appoggio 360 x 240 mm

- MODEL DE1003X.02: support area 360 x 240 mm

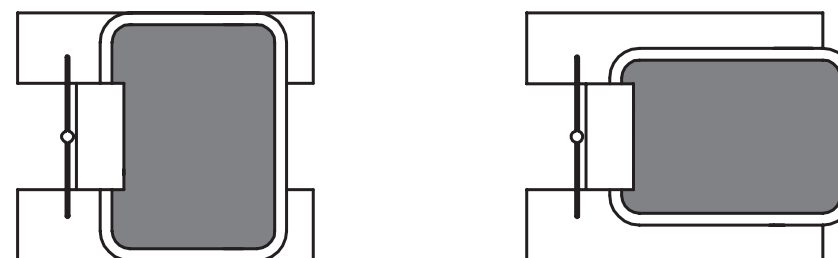

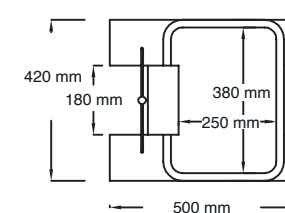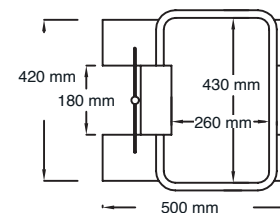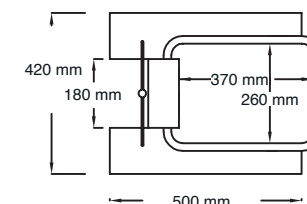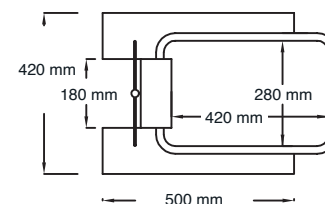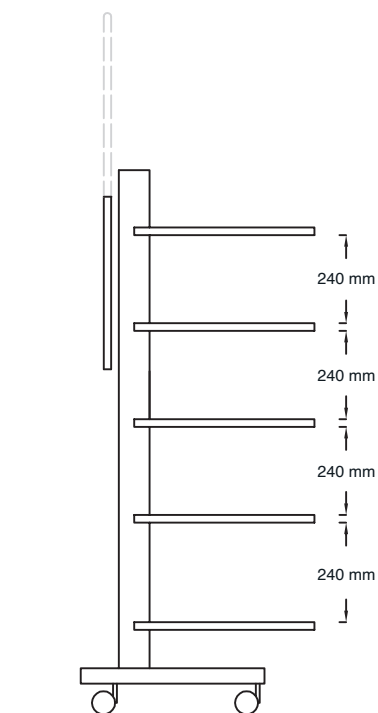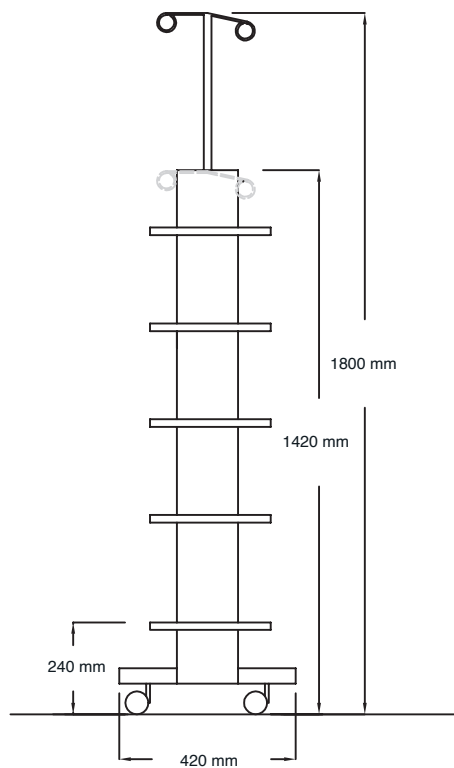

CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio: 230 VAC
 Potenza massima applicabile: 1150 W
 Ampere massimi erogabili: 5 A
 Condotta di alimentazione elettrica: presa con cavo
 230VAC 3 x 1,5 mm
 Peso: 25 KG

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 230 VAC
 Maximum power consumption: 1150 W
 Maximum output current: 5 A
 Electrical power supply: 230VAC outlet
 with 3 x 1.5 mm power cord
 Weight: 25 kg



APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE



ASPIROL

USA IL GRUPPO IDRICO SOLO QUANDO TI SERVE
USE THE WATER UNIT ONLY WHEN YOU NEED IT

Il gruppo idrico in acciaio Inox, equipaggiato con bicchiere, bacinella e supporti aspiranti, è stato studiato per aiutare il medico nel caso in cui si operi senza assistente. Può essere posizionato facilmente vicino o distante dall'area di intervento.

Nei normali riuniti l'aspirazione entra in funzione solo quando le cannule vengono estratte dal supporto: Aspirol, invece, è dotato di apposito pulsante di accensione che permette di spegnere e accendere l'aspirazione secondo necessità; durante l'utilizzo questo sistema si presta perfettamente all'utilizzo di cannule d'aspirazione rigida, tipo Jankauer / Yankauer.

The water unit made of stainless steel, equipped with glass, cuspidor and suction unit holders, has been designed to help the doctor if he/she is working without an assistant. It can be easily placed near or far from the operating area.

In regular dental units, suction is enabled only when the cannulae are removed from the holder: Aspirol, instead, is equipped with a special power button that allows you to turn the suction unit off and on as needed; during use, this system is perfectly suited for rigid suction cannulae, such as Jankauer / Yankauer.



Il pulsante accensione cannule permette di controllare l'accensione dell'aspirazione secondo necessità.

The cannula switch-on button allows you to control the suction process as needed.



Comandi bicchiere e bacinella in acciaio inox integrati nell'asta maniglia.

Rinsing glass and cuspidor controls in stainless steel integrated in the handle.

Il gruppo fontanelle, la bacinella e i terminali cannule, sono estraibili ed autoclavabili per assicurare un alto livello di igienizzazione dell'ambiente.

The irrigation unit, the cuspidor and the cannula e terminals are removable and autoclave compatible to ensure a high level of hygiene in the practice.



Particolare attenzione è stata riposta nei supporti delle cannule, solitamente fissi, anch'essi estraibili ed autoclavabili. Aspirol è completato dal sistema automatico Sanivac, che consente la perfetta detersione e disinfezione delle vie di aspirazione mediante un liquido specifico prelevato da un serbatoio dedicato.

Particular attention has been paid to cannulae fixtures, which are usually fixed, but can also be removed and sterilized in an autoclave. Aspirol is completed by the automatic Sanivac system, which allows for perfect cleansing and disinfection of the suction tubes by means of a specific liquid taken from a dedicated tank.



Supporti cannule estraibili ed autoclavabili.
Removable and autoclavable cannula support.



Sistema Sanivac, per la disinfezione delle vie di aspirazione.
Sanivac system for the disinfection of suction tubes.



Filtro secreti con ampia superficie filtrante per una corretta igienizzazione.
Secreti suction filter with large surface area for correct sanitation.



Valvola aspirazione scarico sotto bacinella Metasys: consente l'immissione dei liquidi della bacinella nella condotta di aspirazione dei sistemi di aspirazione ad umido.

Drain suction valve under the Metasys cuspidor: designed to introduce the liquids of the cuspidor into the suction tube of the wet suction systems.

NASCONDI GLI ELEMENTI CHE NON TI OCCORRONO CONCEAL THE ITEMS YOU DON'T NEED



Aspirol, se non utilizzato, ha la possibilità di essere inserito all'interno di un apposito mobile, che nasconde il carrello garantendo al tempo stesso un ampio piano di lavoro.
All'interno del mobile con anta sono inseriti tre ripiani in vetro temperato, regolabili in altezza ed estraibili, per garantire una maggior igiene sia dei ripiani stessi che dell'interno del mobile.

Aspirol, if not used, can be placed into a special cabinet, which conceals the cart, while providing you with a generous worktop. Inside the cabinet equipped with door, there are three tempered glass shelves, adjustable in height and removable, to ensure greater hygiene of both the shelves and the inside of the cabinet.




Tre ripiani in vetro temperato, regolabili in altezza ed estraibili, per garantire una maggior igiene sia dei ripiani stessi che dell'interno del mobile.

Inside the cabinet equipped with door, there are three tempered glass shelves, adjustable in height and removable, to ensure greater hygiene of both the shelves and the inside of the cabinet.





Le ante del mobile sono dotate di un'apposita apertura per il passaggio del tubo corrugato: quando Aspirol viene utilizzato, le ante possono essere comodamente chiuse evitando intralci durante le operazioni.

The cabinet doors are equipped with a special opening through which passes the corrugated tube: when Aspirol is used, the doors can be comfortably closed, avoiding any hindrances during operations.

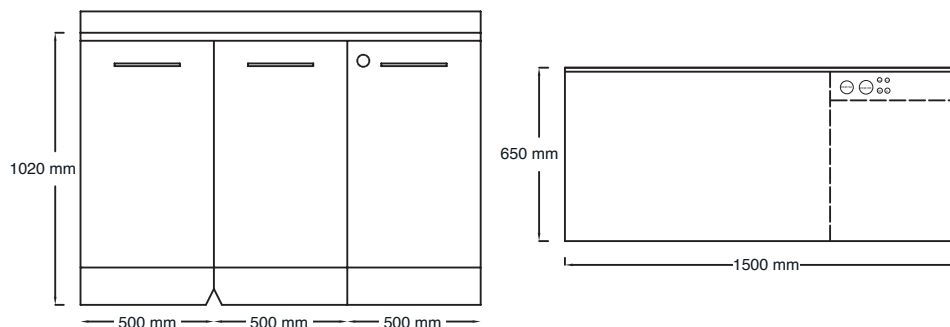

SCHEDA PRODOTTO

PRODUCT DATA SHEET

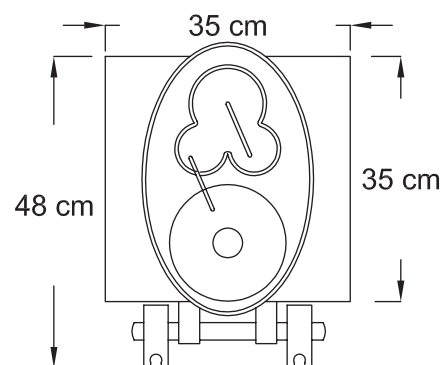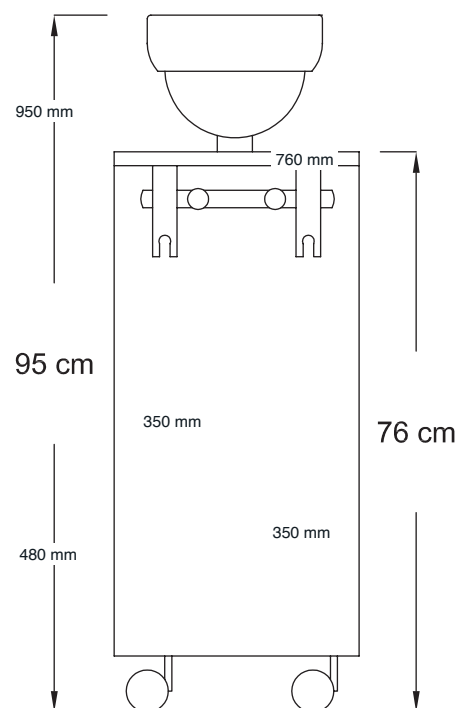

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza: 63 VA
Tensione: 230 Volt ~ 50-60HZ
Pressione massima acqua: 3 bar
Peso: 35 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power: 63 VA
Voltage: 230 Volt ~ 50-60HZ
Maximum water pressure: 3 bar
Weight: 35 Kg



APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE



CHIRUNOX

**PERSONALIZZAZIONI INFINITE,
IGIENIZZAZIONE ASSOLUTA**

**ENDLESS CUSTOMIZATIONS,
PERFECT HYGIENE**



L'ambiente di una sala chirurgica necessita di arredi professionali, che consentano una sterilizzazione ottimale delle superfici e un'ottimizzazione dello spazio per semplificare le operazioni di pulizia.

Grazie alle sue caratteristiche specifiche, la linea di mobili Chirunox è la risposta alle esigenze di ogni sala chirurgica ambulatoriale:

- **Inox:** per Chirunox, Tecnomed Italia ha scelto l'acciaio Inox, sinonimo di pulizia, linearità e robustezza.
- **Completamente modulare:** grazie alle innumerevoli varianti e funzionalità a disposizione, progettiamo con il cliente l'arredamento perfetto, che si adatti agli spazi e alle esigenze dello studio o del poliambulatorio.
- **High tech:** grazie agli optional all'avanguardia, potrai rendere la tua composizione iper-tecnologica, mantenendo la massima sterilizzazione.

The operating room needs professional furniture that allows for perfect sterilization of surfaces and also the optimization of space to simplify cleaning operations. Thanks to its specific features, the Chirunox furniture line is the answer to the needs of every operating room:

- **Stainless Steel:** for Chirunox, Tecnomed Italia has chosen the Stainless Steel, synonym with cleanliness, linearity and sturdiness.
- **100% modular:** thanks to the countless variants and functions available, we design with the customer the perfect furniture, which best suits the spaces and the needs of the practice or the clinic.
- **High tech:** thanks to the cutting-edge optional features and accessories, you can make your own super high-tech set-up, while ensuring impeccable sterilization.



All'interno del mobile con anta sono inseriti tre ripiani in vetro temperato, regolabili in altezza ed estraibili, per garantire una maggior igiene sia dei ripiani stessi che dell'interno del mobile.

Inside the cabinet equipped with door, there are three tempered glass shelves, adjustable in height and removable, to ensure greater hygiene of both the shelves and the inside of the cabinet.



I cassetti sono estraibili, per garantire la massima igiene; sono inoltre dotati di guide scorrevoli e con ammortizzatore integrato, che permette una chiusura lenta e silenziosa.

The drawers are removable to ensure perfect hygiene and are equipped with sliding guides and integrated shock absorbers, for a smooth, silent closing.



I cassetti sono forniti completi di bacinelle di tre tipologie (da 1, 2 e 4 comparti) che possono essere inserite indifferentemente nei vari cassetti, a seconda delle esigenze di organizzazione degli strumenti.

The drawers are supplied complete with instrument trays of three types (with 1, 2 and 4 compartments) that can be inserted in the various drawers, according to your organizational needs.



A completamento della configurazione può essere inserito anche il modulo con lavabo a vista, dotato di elettrovalvola.

To complete the configuration, the exposed washbasin module, equipped with a solenoid valve, can also be inserted.



VETRINETTE



GLASS CABINET

Per completare Chirunox, le vetrinette in acciaio Inox sono indispensabili: pratiche e funzionali, facilitano un'organizzazione dello studio ordinata ed efficiente. Tecnomed Italia propone due vetrine, caratterizzate da una solida e robusta struttura in acciaio Inox e dotate di vetri fumé a scorrimento; un ripiano centrale in vetro.

To complete the Chirunox line are Tecnomed Italia's indispensable glass cabinets, which offer practicality and functionality, and facilitate efficient and orderly organization. Two glass cabinets are available, characterized by a solid and sturdy stainless steel structure, and equipped with sliding frosted glass panels and a central glass shelf.

Internamente, le vetrine sono illuminate da una luce soffusa LED blu: questo colore contribuisce a creare un'atmosfera più rilassata per gli operatori e trasmette ai pazienti concetti di igiene e asepticità. È disponibile, inoltre, la versione con un pratico distributore di carta e guanti: questo sistema è stato progettato per ospitare due scatole di guanti e un rotolo di carta ed occupa uno spazio irrisorio, che non incide sulla capacità di stoccaggio del materiale.

From inside, the glass windows are illuminated by soft LED lighting, whose blue colour contributes to creating a more relaxed atmosphere for professional operators while transmitting the comforting sensation of hygiene and sterility to patients.
A model is also available with practical paper roll and glove dispensers. This system has been designed to support two glove boxes and paper roll, while maximizing the space for the storage of other materials.

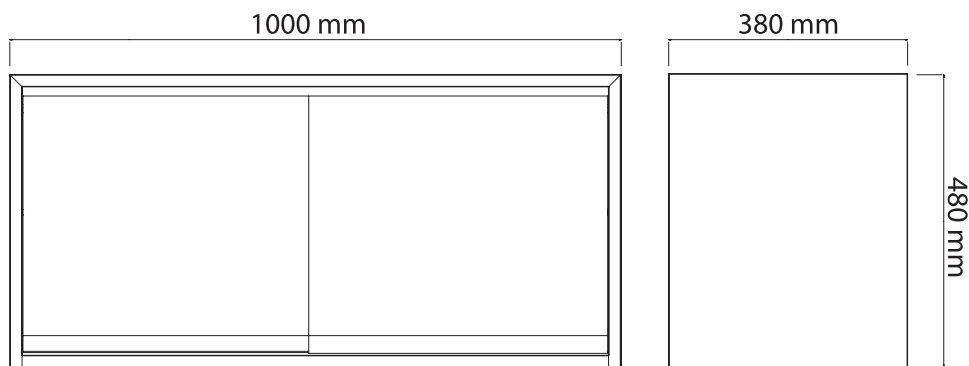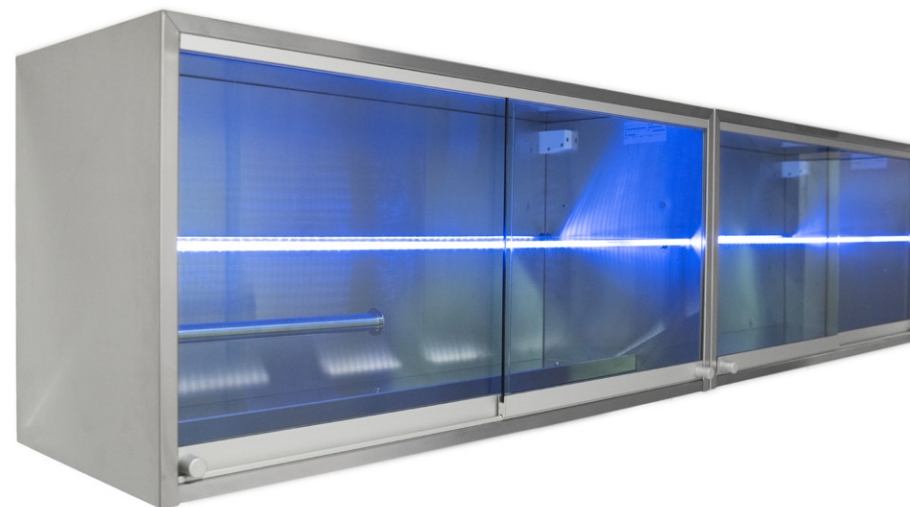

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE



MATRIX

**LA TECNOLOGIA
DIVENTA SPETTACOLO**

**TECHNOLOGY TURNS
INTO A SHOW**

Durante gli interventi chirurgici, l'equipe operatoria può avere la necessità di visualizzare cartelle cliniche, immagini ed informazioni relative al paziente. Per questo Tecnomed Italia ha ideato Matrix, il mobile con struttura interamente in acciaio Inox, che integra all'interno della sala operatoria monitor e PC: grazie alla connessione Wireless, il PC può essere collegato alla rete dello studio, consentendo al medico un facile accesso alle informazioni necessarie senza costringerlo ad abbandonare la sala operatoria. Matrix può essere completato da altre funzionalità all'avanguardia:

- Motorizzazione per monitor a scomparsa
- Tastiera e Mouse Wireless medicali

Attraverso queste funzionalità high tech sarà possibile conferire al proprio ambulatorio un tocco di alta tecnologia che aiuterà a preservare linearità nelle forme e sterilità nell'utilizzo.

During surgery, the operating team may need to view patient records, images and information. For this reason, Tecnomed Italia has created Matrix, the cabinet with a structure made entirely in Stainless Steel, which integrates the monitor and the PC inside the operating theatre: thanks to the Wireless connection, the PC can be connected to the intranet of the practice, granting the doctor easy access to the necessary information without having to leave the operating theatre. Matrix can be complemented by other cutting-edge features:

- *Concealed monitor motor*
- *Medical wireless keyboard and mouse*

These high-tech features will give your outpatient clinic a touch of cutting-edge technology that will help to keep linear shapes and a sterile workspace.



MOTORIZZAZIONE MONITOR A SCOMPARSA

Il monitor, grazie alla movimentazione motorizzata, viene nascosto all'interno del mobile e può essere sollevato solo in caso di utilizzo.

CONCEALED MONITOR MOTOR

The monitor features a motorized system that allows you to hide it inside of the cabinet and lift it only when you want to use it.



TASTIERA E MOUSE WIRELESS MEDICALI

Matrix può essere utilizzato in totale sicurezza con tastiera e mouse medicali, appositamente progettati per il controllo delle infezioni. Si tratta di apparecchiature facili da pulire e disinfettare. Il mouse è totalmente rivestito da una membrana in silicone bianco resistente ai disinfettanti e lavabile anche per immersione totale. Il rivestimento della tastiera, invece, è amovibile ed autoclavabile. L'assenza totale di spigoli e di fessure di entrambe le apparecchiature evita l'accumulo di sporcizia, la proliferazione di batteri e microbi, e la formazione di biofilm.

MEDICAL WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE



Matrix can be used in total safety with a medical keyboard and mouse, specially designed for infection control. These are devices that are easy to clean and disinfect. The mouse is totally covered by a white silicone membrane resistant to disinfectants and washable even through total immersion. The keyboard cover is removable and autoclavable. The total absence of edges and fissures in both devices avoids the accumulation of dirt, the proliferation of bacteria, microbes and of biofilms.

SCHEDA PRODOTTO

PRODUCT DATA SHEET

Il mobile Matrix può essere composto selezionando gli elementi a seconda delle proprie esigenze

The Matrix cabinet can be set up by selecting the elements that best suit your needs

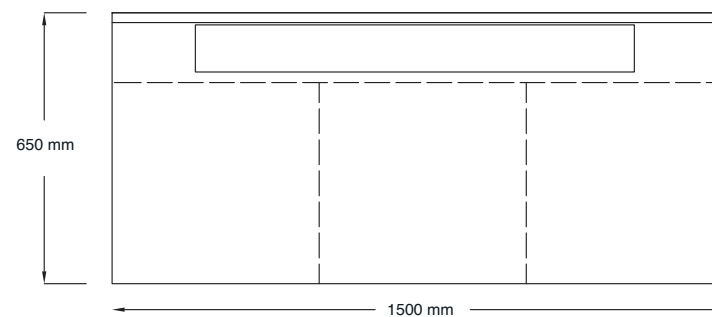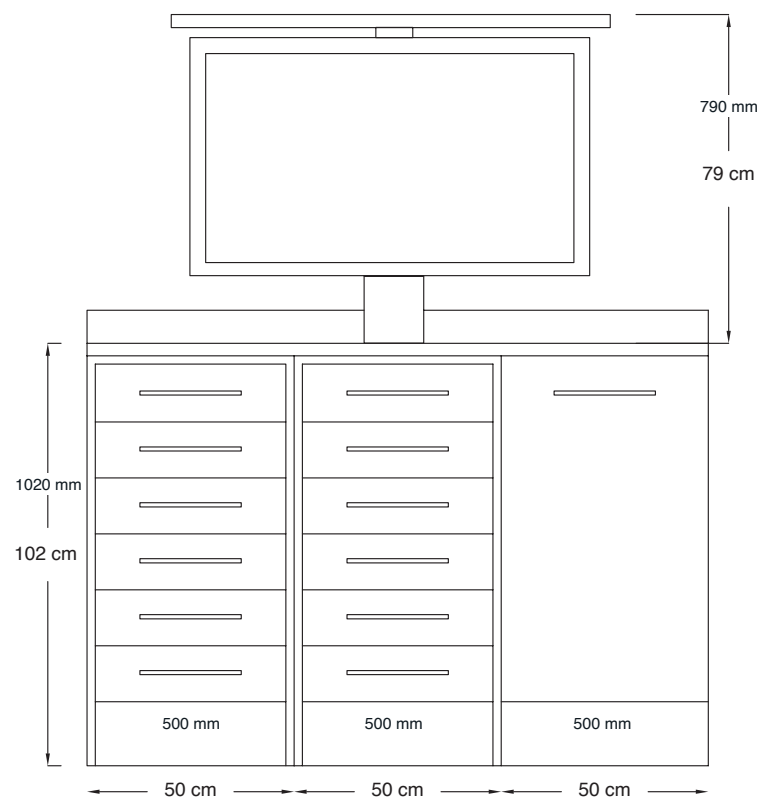

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE



STERILA

**INTEGRAZIONE PERFETTA
TRA TECNOLOGIA E STERILIZZAZIONE**

***PERFECT FUSION BETWEEN
TECHNOLOGY AND STERILIZATION***

Molti ambulatori non hanno a disposizione una zona lavamani pre-intervento posizionato all'esterno della sala; in questi casi è necessario inserire il lavabo all'interno dell'ambiente operatorio. Questo implica però un alto rischio di contaminazione e la necessità di disinfezione continua.

Per questo abbiamo ideato Sterila, un mobile capace di integrare il lavabo nella zona chirurgica mantenendo un altissimo livello di igienizzazione.

Grazie ad un sistema high-tech patent pending, la lampada ultravioletti con tecnologia UV-C inserita all'interno di Sterila, è un'innovazione senza precedenti: il mobile è in grado di effettuare cicli automatici di sterilizzazione di giorno, mantenendo bassa la carica batterica, per poi annientarla la notte, con un ciclo intensivo.

Il coperchio di cui è dotato Sterila, ne aumenta ulteriormente le funzionalità: alla chiusura esso si trasforma in un comodo piano di lavoro e la lampada entra in funzione in totale sicurezza.

Many outpatient clinics lack a dedicated area for pre-operative hand disinfection, outside the operating room; in these cases, it is necessary to insert the washbasin inside the operating room. However, this implies a high risk of contamination and the need for continuous disinfection.

This is why we have created Sterila, a cabinet that integrates the washbasin into the surgical area, while maintaining a very high level of hygiene.

Thanks to a high-tech patent pending system, the ultraviolet lamp with UV-C technology integrated into Sterila is an unprecedented innovation: the cabinet is able to carry out automatic sterilization during the day, keeping the bacterial load low, and then annihilating it over night, via an intensive sterilization cycle.

The Sterila lid further increases its functionality: when it closes, it turns into a comfortable worktop and the lamp works in total safety.



La lampada germicida di Sterila, grazie al processo fisico della luce ultravioletta di tipo UV-C, è efficace contro una grandissima quantità di virus, batteri e altri microorganismi: per un trattamento pari all'abbattimento del 99,9% dei batteri, basta pochissimo tempo. La lampada entra in azione automaticamente solo a completa chiusura del coperchio.

The germicidal lamp of Sterila, thanks to the physical process of UV-C ultraviolet light, is effective against a wide range of viruses, bacteria and other microorganisms: a treatment able to eliminate 99.9% of bacteria, takes very little time. The lamp is activated automatically only when the lid is completely closed.



L'erogazione dell'acqua viene attivata dall'interruttore a pedale.

The water is activated by the foot switch.



Il rubinetto può eseguire molteplici movimenti: abbassato completamente, permette la chiusura del coperchio; ruotando di 360° consente al raggio d'acqua di arrivare in ogni angolo per facilitare le operazioni di pulizia.

The tap can perform multiple movements: when all down, it closes the lid; when turned by 360°, it allows the water jet to reach every corner to facilitate cleaning operations.





La zona di lavaggio, una volta chiusa, fornisce un ulteriore piano di lavoro aumentando così l'area a disposizione.

The washing area, once closed, provides an additional work surface, thus increasing the available area.

SCHEDA PRODOTTO

PRODUCT DATA SHEET

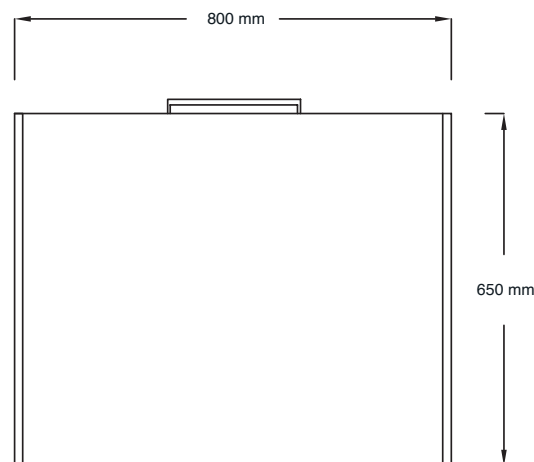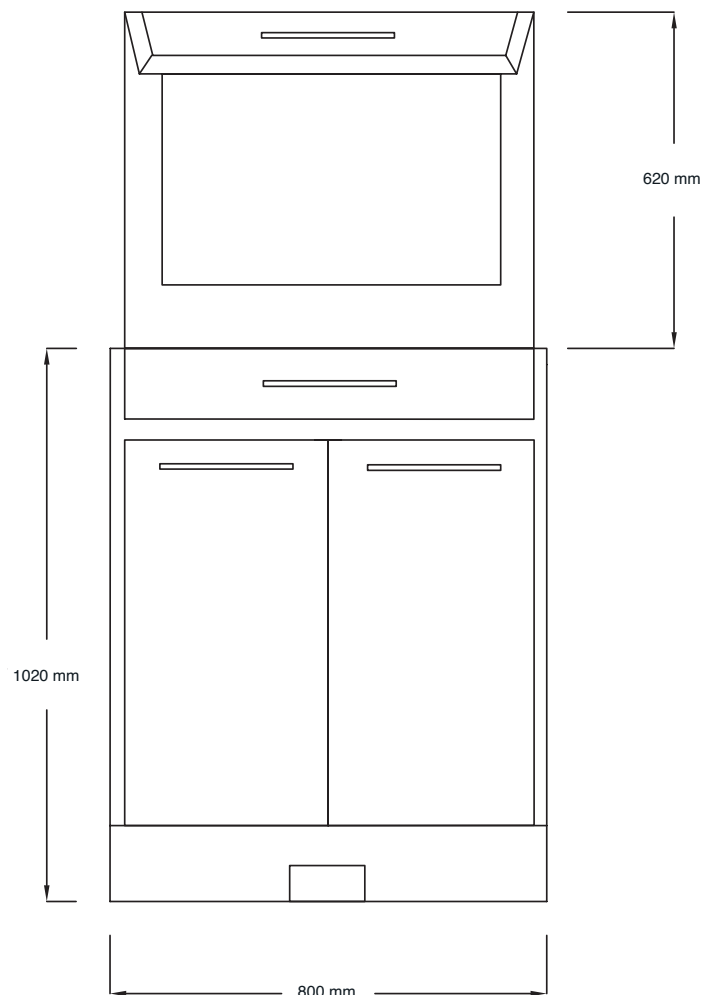

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza: 460 Watt
Tensione: 230 Vac
Pressione massima acqua: 3 bar

Lavabo Inox a scomparsa dim. 500x650x1020 mm (lpxh), con sterilizzazione uvc ed elettrovalvole

Ordine articolo: WASHCH-3

Lavabo Inox a scomparsa dim. 800x650x1020 mm (lpxh), con sterilizzazione uvc ed elettrovalvole

Ordine articolo: WASHCH-380

Lavabo Inox a scomparsa dim. 500x475x900 mm (lpxh), con sterilizzazione uvc ed elettrovalvole

Ordine articolo: WASHCH-4

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power: 460 Watt
Voltage: 230 Vac
Maximum water pressure: 3 bar

Recessed stainless steel washbasin, 500x650x1020(lpxh)mm (lpxh), with UVC sterilisation and solenoid valves

Order code: WASHCH-3

Recessed stainless steel washbasin, 800x650x1020mm (lpxh), with UVC sterilisation and solenoid valves

Order code: WASHCH-380

Recessed stainless steel washbasin, 500x475x900 mm (lpxh), with UVC sterilisation and solenoid valves

Order code: WASHCH-4



APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

...ED ORA COMPONI IL TUO CHIRUNOX

...AND NOW, SET UP YOUR OWN CHIRUNOX CABINET!

Ecco alcuni esempi!
Here are a few examples!



APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE


MOBILI componibili - Altezza 1020

(COME MOBILI MAYCART E ASPIROL)

MODULAR CABINETS - HEIGHT 1020


(SAME AS MAYCART AND ASPIROL CABINETS)

MOBILE INOX CON ANTA E 3 RIPIANI IN VETRO STAINLESS STEEL CABINET, DOOR AND 3 GLASS SHELVES

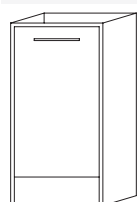


Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
DE9.32X	500	480	1020

MOBILE INOX CON 6 CASSETTI STAINLESS STEEL CABINET, 6 DRAWERS

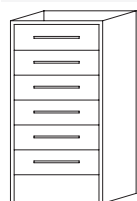

Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
DE9.31X	500	480	1020

LAVABO INOX A SCOMPARSA RECESSED STAINLESS STEEL WASHBASIN

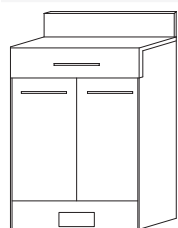

Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
WASHCH-3	500	650	1020
WASHCH-380	800	650	1020




APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

TOP MOBILI CABINET WORKTOPS



Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
DE9.33.50X	1000	500	30
DE9.33.65X	1000	650	30
DE9.38X	1500	500	30
DE9.38.65X	1500	650	30
DE9.35X	2000	500	30
DE9.35.65X	2000	650	30

VETRINETTA GLASS CABINET

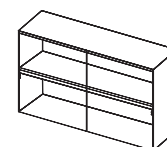

Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)	Distributore carta/guanti Paper/glove dispenser
DE0097X	1000	380	480	
DE0098X	1000	380	480	●
DE987ILX	Kit illuminazione luce led blu per vetrine 24vdc Blue LED lighting for glass cabinets - 24vdc			

MOBILI componibili - ALTEZZA 900

(ALTEZZA STANDARD)


MODULAR CABINETS - HEIGHT 900

(STANDARD HEIGHT)



APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE


MOBILE INOX CON ANTA E 3 RIPIANI IN VETRO STAINLESS STEEL CABINET, DOOR AND 3 GLASS SHELVES

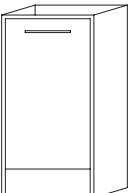	Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
	DE9.37X	500	480	900


MOBILE INOX CON 6 CASSETTI STAINLESS STEEL CABINET, 6 DRAWERS

	Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
	DE9.36X	500	480	900

LAVABO INOX A SCOMPARSA RECESSED STAINLESS STEEL WASHBASIN

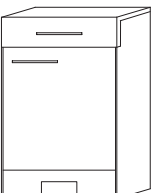	Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
	WASHCH-4	500	480	900


LAVABO INOX A VISTA RECESSED STAINLESS STEEL WASHBASIN

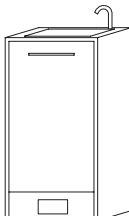	Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
	WASHCH-ST	500	480	900

TOP MOBILI CABINET WORKTOPS

	Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
	DE9.33.50X	1000	500	30
	DE9.38X	1500	500	30
	DE9.35X	2000	500	30

VETRINETTA GLASS CABINET

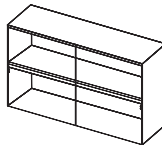	Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)	Distributore carta/guanti Paper/glove dispenser
	DE0097X	1000	380	480	
	DE0098X	1000	380	480	●
	DE987ILX	Kit illuminazione luce led blu per vetrine 24vdc Blue LED lighting for glass cabinets - 24vdc			

STANDARD SET



ORGANIZZA AL MEGLIO IL TUO LAVORO

ORGANIZE YOUR WORK FOR MAXIMUM PRODUCTIVITY

A completamento della sala chirurgica, Handy Surgery ha previsto anche una linea di mobili, elementi mobili e accessori standard, indispensabili per organizzare il lavoro e la disposizione dei materiali al meglio. Tutti gli elementi mantengono gli standard della linea: la pulizia dell'acciaio Inox unita allo stile moderno e professionale, rendono anche questi complementi unici ed efficienti.


To complete the surgical room, Handy Surgery has also planned a line of cabinets, mobile elements and standard accessories, indispensable for organizing the work and the materials in the best possible way. All the elements meet the standards of the line: the cleanliness of the Stainless Steel merged with the modern and professional style, make these accessories unique and efficient as well.

VETRINA FARMACEUTICA

PHARMACEUTICAL SHOWCASE

In un ambulatorio è sempre necessario mantenere una buona organizzazione e gestione dei farmaci all'interno di una vetrina farmaceutica essenziale e pratica. La vetrina farmaceutica di Handy Surgery è dotata di una struttura solida e robusta in acciaio inox, con porte in vetro per una consultazione immediata delle scorte. I quattro ripiani, regolabili in altezza, facilitano la ricerca dei farmaci, permettendo di reperirli in modo pratico e rapido.

In an outpatient clinic, you must always ensure a good organization and management of medications within a compact and practical pharmaceutical showcase. Handy Surgery's pharmaceutical showcase is equipped with a solid and sturdy Stainless Steel structure, with glass doors for an immediate check of the stock available. The four height-adjustable shelves allow you to find the medications quickly and easily.

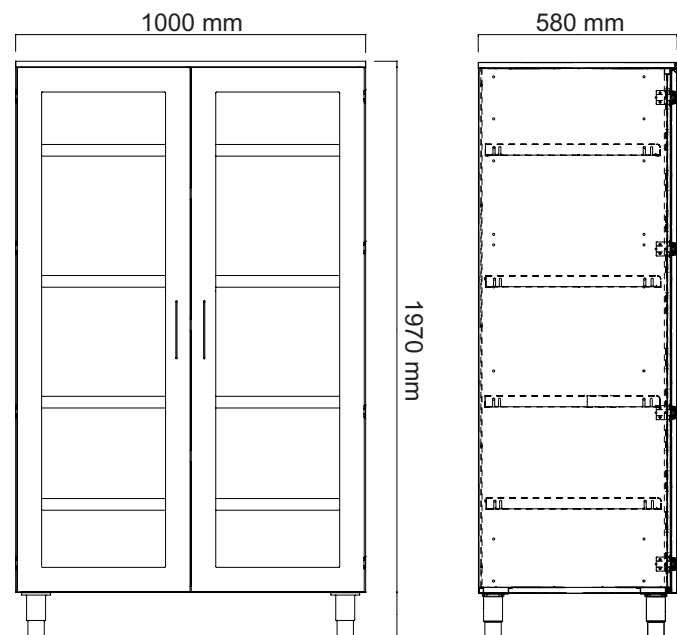

Codice articolo Order code	TM5020SM
Materiale <i>Material</i>	Acciaio inossidabile AISI 304 <i>AISI 304 Stainless Steel</i>
Larghezza (mm) <i>Width (mm)</i>	1000
Profondità (mm) <i>Depth (mm)</i>	580
Altezza (mm) <i>Height (mm)</i>	1970



LAVABI INDIPENDENTI STANDALONE WASHBASINS

Per le strutture che hanno a disposizione una zona lavamani esterna alla sala chirurgica, è possibile inserire un comodo lavabo indipendente, dove il chirurgo e l'equipe medica si preparano per l'intervento. Dato il suo particolare utilizzo, è dotato di tutti quegli accorgimenti atti a preservare l'utilizzatore da ogni contaminazione, riducendo al minimo il contatto. I lavabi della linea Handy Surgery sono costruiti interamente in acciaio Inox con finitura scotch brite e dotati di parete antispruzzo, spigoli arrotondati e bordi con doppia piega anti-taglio. Sono completi di miscelatori a leva clinica e dispenser di sapone, anche quest'ultimo interamente in acciaio Inox. Disponibili in due varianti, con lavabo singolo o doppio.

For clinics that have a hand-disinfection area outside the surgical room, it is possible to insert a comfortable standalone washbasin, where the surgeon and the medical team prepare for the operation. Given its particular use, the washbasin features all the functions required to protect the user from any contamination, by minimizing contact. The washbasins of the Handy Surgery line are made entirely of Stainless Steel with a Scotch Brite finish and are equipped with a splash-proof wall, rounded edges and a double fold to prevent cuts. They are complete with medical lever mixers and soap dispensers, the latter is also made entirely of Stainless Steel. There are two versions available: with single or double washbasin.




Dispenser di sapone in acciaio inox.

Stainless Steel soap dispenser.



SCHEDA PRODOTTO

PRODUCT DATA SHEET

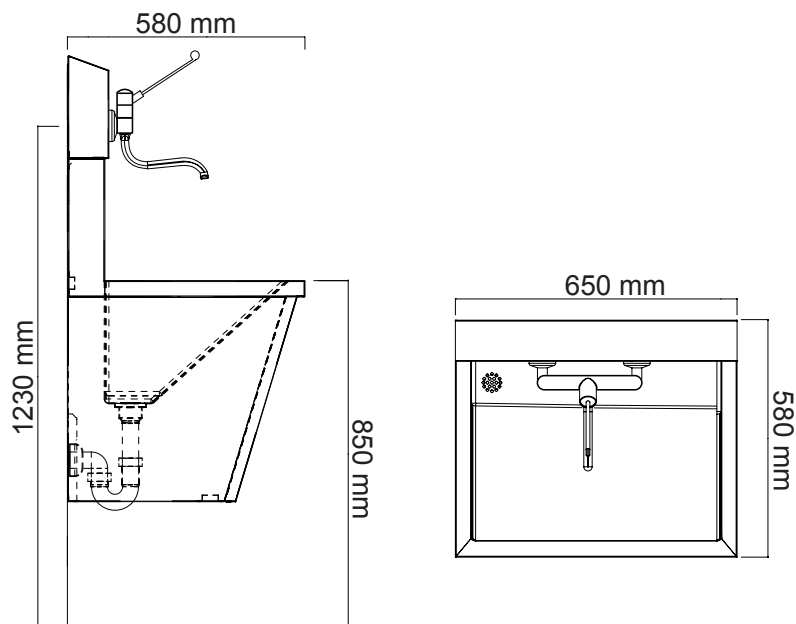


Lavabo singolo Inox con miscelatore a leva chirurgica e dispenser sapone.

Codice articolo: WASHCH-1

Single washbasin in stainless steel with surgical lever-operated mixer tap and soap dispenser.

Order code: WASHCH-1

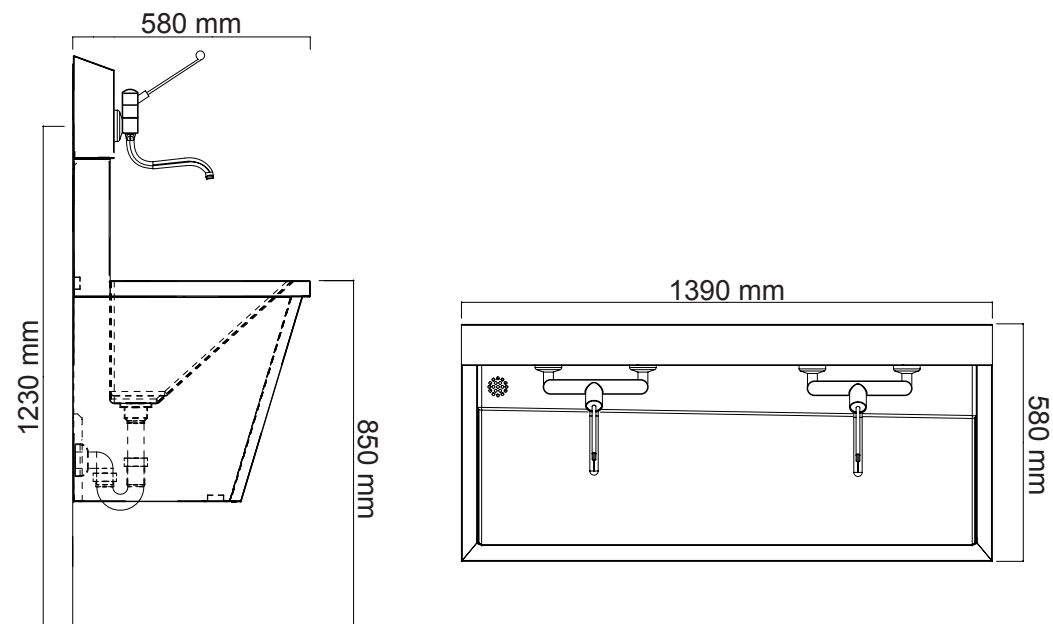

Lavabo doppio Inox con miscelatore a leva chirurgica e dispenser sapone.

Codice articolo: WASHCH-2

Double washbasin in stainless steel with surgical lever-operated mixer tap and soap dispenser.

Order code: WASHCH-2



APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE



ACCESSORI

ACCESSORIES

Per completare al meglio la tua sala chirurgica, sono disponibili diversi accessori, che si coordinano perfettamente al resto dei prodotti, sia dal punto di vista estetico che dell'usabilità.

To make the most out of your operating room, there are several accessories that match just perfectly with the other products, both in terms of design and functionality.

CARRELLO ARMADIO CABINET CART

All'interno della linea Handy Surgery è possibile trovare anche il carrello portacontainer, completamente in acciaio Inox AISI 304 con finitura scotch-brite, struttura antiribaltamento e paracolpi rotanti in gomma agli angoli. Il sistema di chiusura frontale a scomparsa è dotato di maniglie di spinta, per facilitare la movimentazione del carrello. La doppia anta battente, con apertura a 270°, attraverso l'uso di una guarnizione siliconica perimetrale permette una chiusura ermetica totale.

Questa caratteristica consente il trasporto sia di materiali sterili, salvaguardandoli da un'eventuale contaminazione, ma anche di materiali non sterili. All'interno dell'armadio si trovano due ripiani fissi, anch'essi completamente in acciaio Inox AISI 304, che possono portare tre container da 1/1 unità di sterilizzazione (600x300x300mm) affiancati.

The Handy Surgery line also features the container cart, made completely from AISI 304 Stainless Steel with Scotch-Brite finish, anti-tip structure and revolving rubber bumpers at the corners. The retractable front closing system is equipped with push handles, to facilitate the movement of the cart. The double hinged door, with 270° opening ensures hermetic seal by means of a perimeter silicone seal. This feature allows for the transport of both sterile materials, protecting them from possible contamination, and non-sterile materials. Inside the cabinet there are two fixed shelves, also entirely in AISI 304 Stainless Steel, which can carry three containers of 1/1 sterilization unit (600x300x300mm), side by side.



Due ripiani fissi porta container in acciaio AISI304.

Two fixed container shelves in AISI 304 steel.



Chiusura con maniglia a scomparsa.



Hideaway handle closing system.



Quattro ruote piroettanti antistatiche e antitraccia di cui due con freno.

Four anti-static, streak-free casters, two of which are equipped with brakes.

SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DATA SHEET

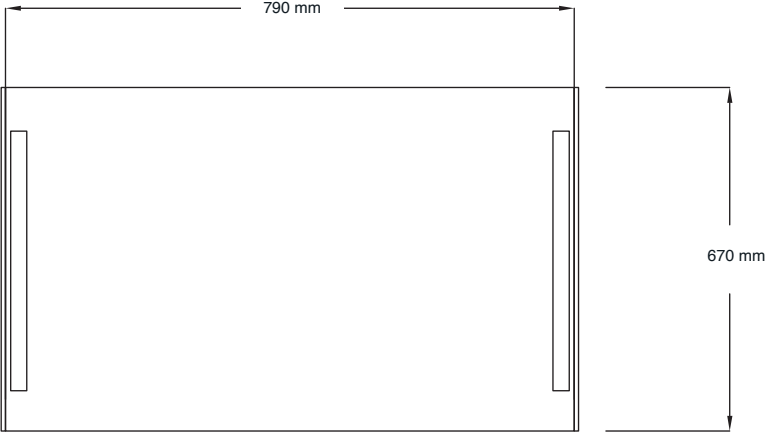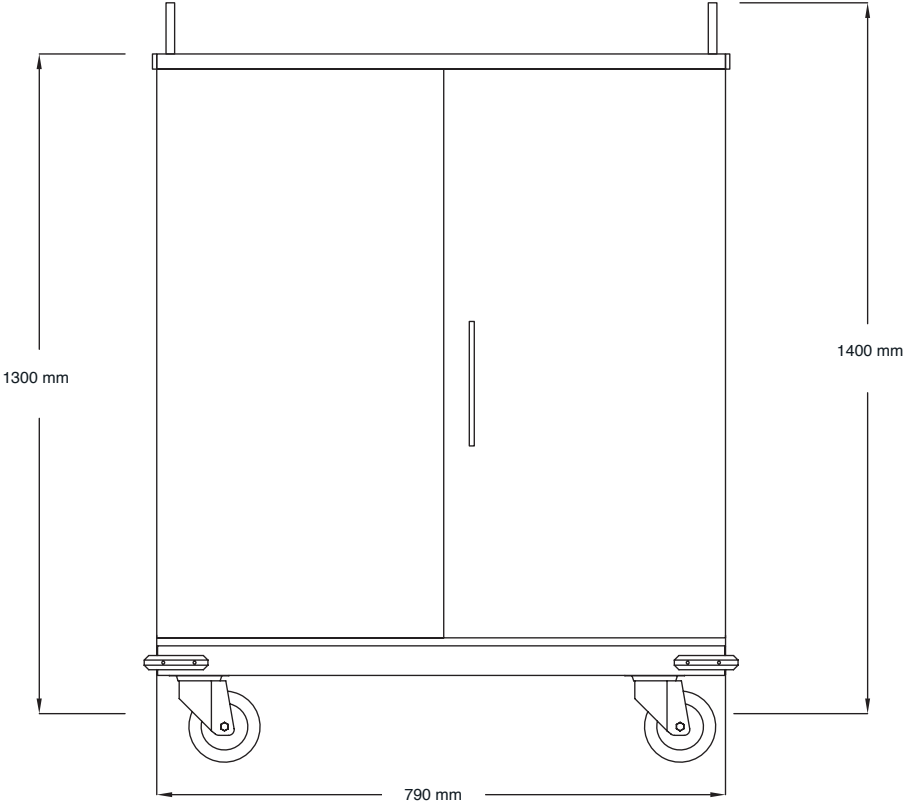

Codice articolo
Order code

TM2104

Materiale Material	Acciaio inossidabile AISI 304 AISI 304 Stainless Steel
Larghezza (mm) Width (mm)	790
Profondità (mm) Depth (mm)	670
Altezza (mm) Height (mm)	1400
Ruote antistatiche Antistatic wheels	●



APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

CARRELLO ANESTESIA


ANAESTHESIA CART

Un carrello anestesia deve essere pulito per ogni evenienza, rifornito di tutto quanto necessario in modo ordinato. Interamente realizzato in acciaio inossidabile AISI 304, il carrello anestesia di Handy Surgery non lascia nulla al caso: con sei cassetti, anta laterale a due ripiani e un ripiano aperto, ha tutto ciò che serve per mantenere l'ordine. È inoltre dotato di sistema di chiusura a chiave che blocca i cassetti e l'anta laterale. I vari compartimenti e cassetti permettono un'organizzazione in funzione della specifica area di lavoro; l'ordine e la logica devono essere ferree al fine di un uso adeguato.

Il carrello è dotato di quattro ruote snodate per facilitare gli spostamenti; il piano superiore è bordato sui quattro lati per un trasporto sicuro degli oggetti.


An anaesthesia cart must always be sanitized and prepared, filled with everything you need in an orderly manner. Made entirely of AISI 304 Stainless Steel, the Handy Surgery anaesthesia cart leaves nothing to chance: with six drawers, a side door with two shelves and an exposed shelf, it has all you need to keep everything in good order. It also features a key lock system that locks the drawers and the side door. The various compartments and drawers allow you to organize everything based on each specific work area; order and logic must prevail to ensure proper use.

The cart is equipped with four casters to facilitate movement; the upper shelf edge is protected on all four sides for safe transport of objects.

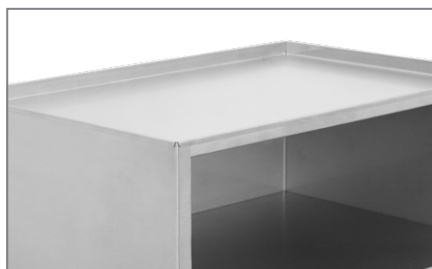

Ampia area di appoggio superiore bordata sui quattro lati per un trasporto sicuro degli oggetti.

Large worktop with edge protected on all four sides for safe transport of objects.

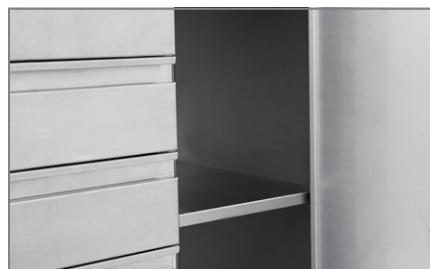



Ripiano fisso in acciaio AISI304.

Fixed shelf in AISI 304 steel.



SCHEDA PRODOTTO

PRODUCT DATA SHEET

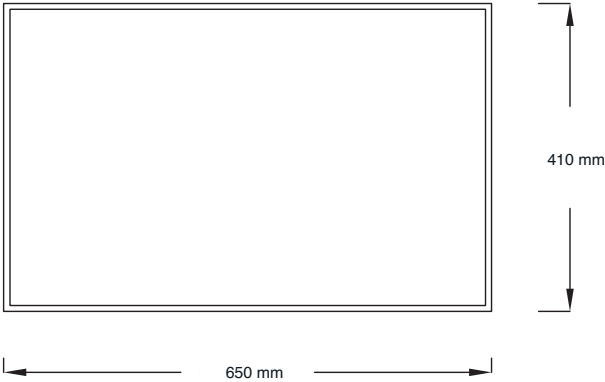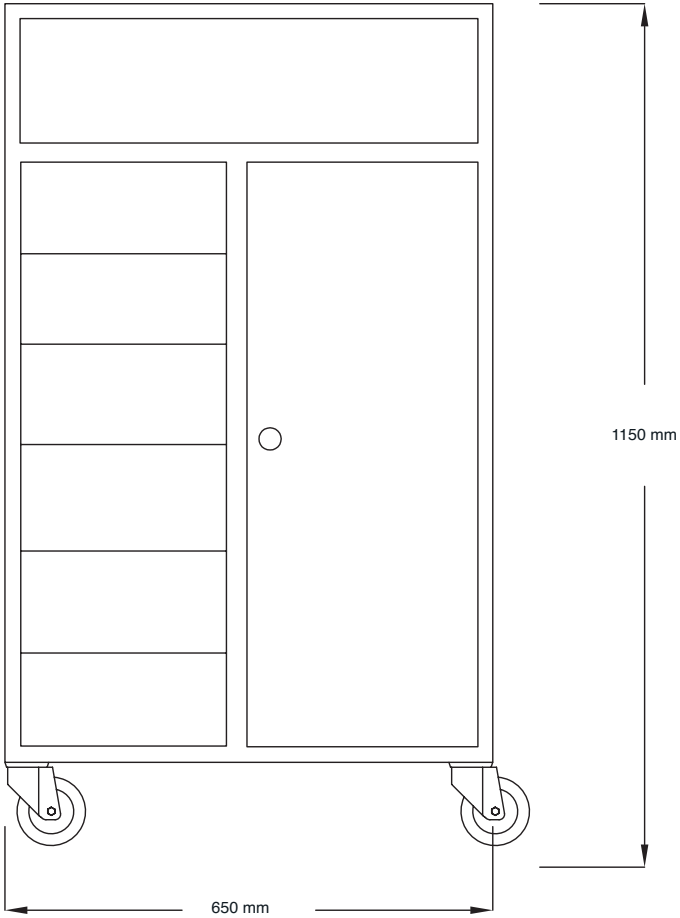

Codice articolo
Order code

TM5007

Materiale Material	Acciaio inossidabile AISI 304 AISI 304 Stainless Steel
Larghezza (mm) Width (mm)	650
Profondità (mm) Depth (mm)	410
Altezza (mm) Height (m)	1150



APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE



CARRELLO SERVITORE

L'ampio carrello servitore, proposto da Tecnomed Italia, è dotato di quattro ruote piroettante di cui due con freno. E esso ha una struttura saldata ed interamente in acciaio inox, con fiancate in tubo tondo.

Carrello servitore 3 ripiani 1000x500x935 mm.

Codice articolo: DE1005X

SERVICE CART

The large service cart designed by Tecnomed Italy, comes with four casters, two of which are equipped with brake. It has a welded body and is made entirely from Stainless Steel, with sides in round tube.

3-shelf utility cart 1000x500x935 mm .

Order code: DE1005X



CARRELLO PORTA-SACCO

Carrello porta-sacco, utilissimo per i prodotti di scarto che se non smaltiti immediatamente andrebbero ad occupare superfici di appoggio dello studio; grazie ad uno smaltimento immediato invece, lo studio risulta sempre in ordine, anche durante le procedure, e vengono inoltre ridotti i tempi di riorganizzazione tra un paziente e l'altro. Il carrello porta-sacco è dotato di 3 ruote piroettanti.

Carrello portasacco inox (coperchio non disponibile).

Codice articolo: TM5042/1

BAG HOLDER CART

Bag holder cart, useful for waste products that if not disposed of immediately would occupy the worktops of the practice; an immediate disposal instead, ensures that the practice is always in perfect order, even during procedures, and it also reduces the time of reorganization between a patient and the next. The bag holder cart is equipped with 3 casters.

Stainless steel bag cart (no lid available).

Order code: TM5042/1



APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

STERINOX



La linea di sterilizzazione Sterinox di Tecnomed Italia è stata progettata per garantire il massimo della professionalità e della pulizia. La serie di mobili in acciaio Inox, sinonimo di pulizia, linearità e robustezza, è studiata per riunire tutte le apparecchiature e gli strumenti necessari per svolgere il processo di sterilizzazione senza intralci. Si posiziona come prodotto top di gamma ed è adatta principalmente a cliniche orientate alla chirurgia odontoiatrica, ma anche a studi standard che richiedono la massima sicurezza in ambito di sterilizzazione.

Tecnomed Italia's Sterinox sterilization line has been designed to guarantee maximum professionalism and cleanliness. The stainless steel furniture series, synonymous with cleanliness, linearity and strength, is designed to bring together all the equipment and instruments necessary for the sterilization process without creating any hindrance or obstruction. Sterinox is a series of top-of-the-range products aimed at dental surgery clinics, but also suitable for ordinary dental clinics requiring utmost sterilization safety.



All'interno del mobile con anta sono inseriti tre ripiani in vetro temperato, regolabili in altezza ed estraibili, per garantire una maggior igiene sia dei ripiani stessi che dell'interno del mobile.

Inside the cabinet equipped with door, there are three tempered glass shelves, adjustable in height and removable, to ensure greater hygiene of both the shelves and the inside of the cabinet.



I cassetti sono estraibili, per garantire la massima igiene; sono inoltre dotati di guide scorrevoli e con ammortizzatore integrato, che permette una chiusura lenta e silenziosa.

The drawers are removable to ensure perfect hygiene and are equipped with sliding guides and integrated shock absorbers, for a smooth, silent closing.



I cassetti sono forniti completi di bacinelle di tre tipologie (da 1, 2 e 4 comparti) che possono essere inserite indifferentemente nei vari cassetti, a seconda delle esigenze di organizzazione degli strumenti.

The drawers are supplied complete with instrument trays of three types (with 1, 2 and 4 compartments) that can be inserted in the various drawers, according to your organizational needs.



Realizzato con vasca filo piano saldata, per la massima igiene, è dotato di azionamento elettrico a piede per l'erogazione dell'acqua. Il modulo lavello può essere predisposto per ospitare la pistola dispensatrice di acqua (codice DSR55XM).

Made with flush welded sink for utmost hygiene, and equipped with electric water supply foot pedal. The sink unit can be prepared to incorporate a water gun (code DSR55XM).



MOBILE COLONNA

La colonna è stata progettata per ospitare il termodisinfettore Miele, l'autoclave e la sigillatrice Termoseal 300.

COLUMN UNIT

The Sterinox column unit has been designed to house a Miele washer-disinfector, autoclave and Termoseal 300 sealer.

Come gli arredi della sala chirurgica Chirunox, anche gli elementi della sala di sterilizzazione Sterinox rappresentano una soluzione completamente modulare, grazie alle innumerevoli varianti e funzionalità a disposizione. Il team di Tecnomed Italia progetta insieme al cliente idee intelligenti e moderne e fornisce la soluzione migliore, in base alle esigenze operative e agli spazi disponibili.

Just as Chirunox operating theatre furnishings, Sterinox sterilization room elements are also completely modular, with countless variations and functionalities available. The Tecnomed Italia team creates, together with the customer, smart and modern designs for the very best solution according to operational needs and available space.



Il ripiano per la sigillatrice è estraibile, in modo da dare all'operatore la possibilità di posizionare l'apparecchiatura alla propria destra.

The shelf for the sealer is removable, so as to give the operator the possibility to place the equipment on his right side.



VETRINE

Le vetrine sono completamente in acciaio Inox, con vetri fumè scorrevoli; sono inoltre illuminate da una luce interna LED di colore blu. È disponibile anche la versione con distributore di carta e guanti.

GLASS CABINET

Sterinox line glass cabinets are made in stainless steel, with sliding frosted glass panels, lit from the inside by blue LED lighting. A version is also available with paper roll and glove dispensers.



PARETE ATTREZZATA INOX

Totamente in acciaio Inox, è dotata di una guida retroilluminata per lo scorrimento di quattro supporti. In questo modo non viene occupato spazio sul piano di lavoro, in modo da favorire la pulizia.

STAINLESS STEEL WALL RACK

Made from stainless steel and equipped with a backlit guide and four sliding supports, in order to free up work surface space and facilitate cleaning.

ALTEZZA PIANO DI LAVORO H 1020 MM

Progettato per ospitare tutte le attrezzature necessarie alla sterilizzazione e garantire il massimo ordine, l'aspetto più innovativo di questo modulo è rappresentato dall'altezza del piano di lavoro. Tecnomed ha progettato il piano ad un'altezza maggiore (1020 mm), in modo tale da favorire una postura corretta per l'operatore che esegue il processo di sterilizzazione: lavorando in piedi, infatti, l'altezza maggiore impedisce all'addetto di assumere posture sbagliate. È possibile comunque optare per un piano di lavoro di altezza standard (900 mm).

CABINET WORKTOPS HEIGHT H 1020 MM

Designed to accommodate all the equipment needed for sterilization and ensure maximum order, the most innovative feature of this module is the height of the worktop.

Tecnomed designed the top at a greater height (1020 mm), in order to promote a correct posture for the operator performing the sterilization process: working standing, in fact, a greater height prevents the operator from taking wrong postures. It is however possible to choose a standard height worktop (900 mm).

ILLUMINAZIONE


Analizzando l'indice di riflessione della superficie, Tecnomed ha realizzato il sistema di illuminazione ottimale dell'area di lavoro, con luce LED lineare a luce calda, filtrata da uno schermo a diffusione. L'illuminazione LED integrata è orientata con un'inclinazione di 45° eliminando la possibilità di abbagliamento indiretto o riflesso. Per l'operatore un'illuminazione ottimale, priva di abbagliamenti, è fondamentale, poiché favorisce la concentrazione e contribuisce ad evitare errori di distrazione, dovuti dalla stanchezza. Infine, sulla parte superiore della parete attrezzata si trovano prese per le apparecchiature satelliti e gli interruttori di comando illuminazione.

LIGHTING

Analyzing the reflection index of the surface, Tecnomed created the optimal lighting system of the working area, with linear LED light with warm light filtered by a diffusion screen.


The integrated LED lighting is placed behind the steel guide rail, in order to avoid direct glare of the operator; moreover, it is oriented at an inclination of 45°, eliminating the possibility of indirect or reflex glare.

Optimal, glare-free lighting is essential for the operator, as it promotes focus and helps to avoid distraction errors due to fatigue. Finally, on the top of the equipped wall, there are sockets for satellite equipment and light control switches.

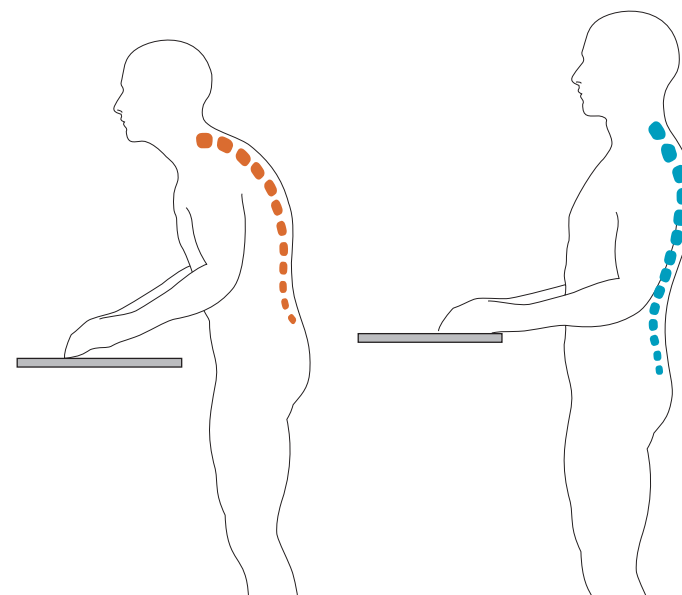


Abbagliamento diretto

Direct glare

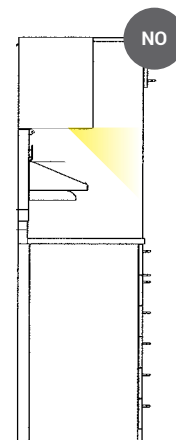


Abbagliamento riflesso

Reflection glare

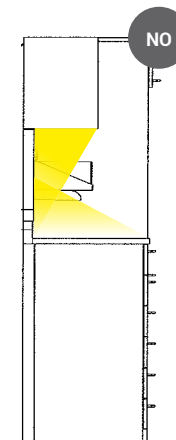

Illuminazione ottimale


Optimal lighting

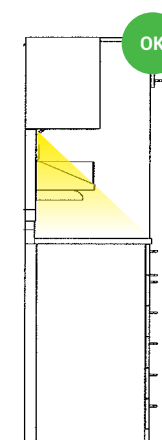

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

MOBILI componibili MODULAR CABINETS


MOBILE INOX CON ANTA E 3 RIPIANI IN VETRO STAINLESS STEEL CABINET, DOOR AND 3 GLASS SHELVES

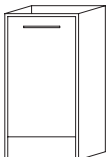	Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
	DE9.37X	500	480	900
	DE9.32X	500	480	1020

MOBILE INOX CON 6 CASSETTI STAINLESS STEEL CABINET, 6 DRAWERS

	Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
	DE9.36X	500	480	900
	DE9.31X	500	480	1020

LAVABO INOX A VISTA RECESSED STAINLESS STEEL WASHBASIN

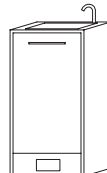	Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
	WASHCH-ST	500	480	900
	WASHCST-5	500	480	1020

TOP MOBILI CABINET WORKTOPS

	Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
	DE9.315.65X	500	650	30
	DE9.33.65X	1000	650	30
	DE9.38.65X	1500	650	30
	DE9.35.65X	2000	650	30




APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

MOBILI componibili

MODULAR CABINETS

VETRINETTA


GLASS CABINET

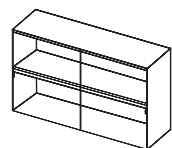

Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)	Distributore carta/guanti Paper/glove dispenser
DE0097X	1000	380	480	
DE0098X	1000	380	480	●
DE987ILX	Kit illuminazione luce led blu per vetrine 24vdc Blue LED lighting for glass cabinets - 24vdc			

MOBILE COLONNA

COLUMN UNIT

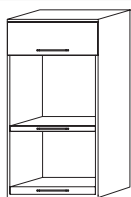

Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
DE9.41X	700	650	1200
DE9.41X.1	700	650	830



APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE

PARETE ATTREZZATA STANDARD

STANDARD WALL RACK

	Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
	DE9.40X.15.20	1500	20	480
	DE9.40X.20	2000	20	480

PARETE ATTREZZATA ELETTRIFICATA CON GUIDA ILLUMINATA + 2 PRESE + USB

ELECTRIFIED WALL RACK WITH ILLUMINATED GUIDE RAIL + 2 SOCKETS + USB

	Codice articolo Order code	Larghezza (mm) Width (mm)	Profondità (mm) Depth (mm)	Altezza (mm) Height (mm)
	DE9.40X.15	1500	20 / 50	480
	DE9.40X	2000	20 / 50	480

ACCESSORI PER PARETE ELETTRIFICATA

ACCESSORIES FOR ELECTRIFIED WALL RACK

	Codice articolo Order code	Descrizione prodotto Product description
	DE9.40X.4	Supporto inox per porta-sapone per parete attrezzata Soap dish support stainless steel for wall rack
	DE9.40X.3	Supporto inox per tablet per parete attrezzata Tablet support stainless steel for wall rack
	DE9.40X.5	Supporto inox stampante per parete attrezzata Print support stainless steel for wall rack
	DE9.40X.2	Supporto inox vasca ultrasuoni 3/5 litri per parete attrezzata Ultrasonic cleaner (3/5 litres) support stainless steel for wall rack

ESCLUSIVO - SISTEMA RINTRACCIABILITÀ SGT

EXCLUSIVE - SGT TRACEABILITY SYSTEM

Dalle continue richieste dei tuoi colleghi che, come te, esprimono l'esigenza di un sistema che consente un metodo di archiviazione del sicuro e veloce, nasce l'idea innovativa di Tecnomed Service (dipartimento di ricerca e sviluppo di Tecnomed Italia): creando un archivio informatico che tenga traccia e registri tutto il processo di sterilizzazione, tracciando e digitalizzando tutte le attività automaticamente salvate in Cloud, Tecnomed contribuisce così a tutelare ogni responsabile sanitario e l'intero studio odontoiatrico sotto l'aspetto medico legale.

SGT (Sistema di Gestione del Tracciamento del materiale sterile) è il sistema certificato e brevettato da Tecnomed per la registrazione forzata e l'archiviazione automatica di tutti gli step del processo di sterilizzazione, comprendente anche gli esiti delle apparecchiature sensibili.

Il sistema SGT registra e archivia:

- L'avvenuta sequenza degli step: nessun margine di errore
- Data e ora di inizio e fine processo: controllo dei tempi impiegati
- Report di autoclavi e termodisinfezioni in formato fotografico.

Questo sistema può essere gestito utilizzando qualsiasi device, PC (Windows o macOS) o mobile (Android, iOS); i dati vengono archiviati automaticamente sulla piattaforma Cloud Google Drive, un servizio web che garantisce la conservazione e la sicurezza dei dati; lo spazio di archiviazione è illimitato. I dati non vengono salvati sul disco locale, perché l'applicazione utilizzata risiede sul server Google e può essere quindi lanciata da qualsiasi device, senza bisogno di alcuna installazione di software su pc o mobile.

Following numerous requests from professionals expressing the need for a safe and quick data storage methodology, Tecnomed Service (Research and Development of Tecnomed Italia) has created an innovative IT archival system that keeps track of and records the whole process of sterilization, tracing and digitizing all activities automatically in the cloud, and therefore supporting and safeguarding healthcare managers and entire dental practices from a medical and legal point of view.

SGT (sterile material traceability management system) is a system certified and patented by Tecnomed for enforced recording and automatic archival of all steps in the sterilization process, including the results of sensitive equipment.

The SGT system records and archives:

- Effective execution of the sequence of steps: with no margin of error;
- Date and time of the start and end of the process: monitoring of times take;
- Autoclave and washer-disinfector reports, in both photographic formats.

This system can be managed using any device, such as a computer (Windows or Mac OS) or mobile device (Android or iOS). The data is automatically archived on the Google Drive cloud platform, a web service guaranteeing the storage and security of data. The data is not saved locally, since the application resides on a Google server so that it can be launched from any device, without the need for any software installation on the local computer or mobile device.



Il sistema SGT sistema gestione tracciamento
è conforme alle normative:

*SGT traceability system
complies with the regulations:*

ISO/TS 17665-2:2009
UNI/TR 11408:2011
UNI/EN 556
D.lgs 81/2008

Compatibile con:
Compatible with:



APPROFONDISCI
LEARN MORE

LICENZA SGT

Il sistema è di una semplicità estrema.

Dopo aver acquistato SGT Sistema Gestione Tracciamento riceverete una mail contenente 3 link. Trascinate o salvate il collegamento a questi 3 link sul desktop del vostro PC (Windows o macOS) o sulla home del vostro dispositivo mobile tablet/smartphone (Android, iOS).

In pochi passi il gioco è fatto: il sistema è pronto per l'utilizzo.

I tre link, infatti, sono collegati ai moduli e all'archivio dei dati che consentono il funzionamento di tutto il sistema di archiviazione.

Nel dettaglio:

- SGT DOC.01S è il modulo di censimento anagrafiche su Cloud;
- SGT DOC.02S è il modulo di registrazione del processo su Cloud;
- SGT-ARCHIVIO è l'archivio dati in formato Spreadsheet salvato su Cloud.

Dalla home del vostro device o dal desktop del vostro PC potrete quindi facilmente accedere al sistema e in pochi passi inizierete ad utilizzare l'archivio elettronico.

SGT LICENCE

The system stands out due to its extreme simplicity.

After purchasing SGT traceability system, you will receive an email containing 3 links and a personal password.

Drag or save the link to these 3 links to the desktop of your PC (Windows or macOS) or to the home page of your mobile device tablet/smartphone (Android, iOS).

In just a few steps, you're done: the system is ready to use.

The three links, in fact, are connected to the modules and the data archive that enable the operation of the entire storage system.

In detail:

- SGT DOC. 01S is the module for data recording to Cloud;
- SGT DOC.02S is the module of the process on Cloud;
- SGT-ARCHIVIO is the data archive in Google spreadsheet format saved to Cloud.

From the home page of your device or from the desktop of your PC you can easily access the system and in a few steps you will start using the electronic archive.



Prova subito la versione DEMO
Try the DEMO VERSION now

Codice articolo Order code	Descrizione prodotto Product description
DEA4.00SGT	Accesso singolo con account alla piattaforma SGT / Compatibile Android-iOS-Windows / Spazio di archiviazione 15.000 record Access to the SGT platform with a single account / Compatibility: Android-iOS-Windows / Storage:15.000 records
DEA4.00SGT.N	Accesso per un secondo operatore Access with a second operator account



STAMPANTE SGT-PRINT INTERACTIVE



Il generatore di etichette stand alone SGT-Print Interactive, assicura velocità e prestazioni di massimo livello. SGT-Print Interactive non è collegata ad alcun PC ma lavora in maniera autonoma. Grazie alla memoria intelligente permette di stampare con un solo comando il numero di etichette desiderate riportando automaticamente:

- Numero di lotto
- Data
- Data di scadenza
- Codice operatore
- Numero progressivo
- QR-code archivio SGT

PRINTER SGT-PRINT INTERACTIVE

The label generator stand alone SGT-Print Interactive stand alone, ensures top-level speed and performance. SGT-Print Interactive is not connected to any PC but works independently. Thanks to the intelligent memory it allows to print with a single command the number of labels you want, automatically reporting:

- Lot number
- Date
- Expiry date
- Operator code
- Progressive number
- QR-code SGT data archive

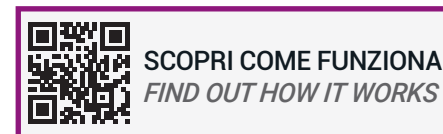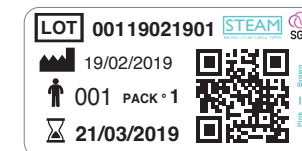

Codice articolo: DEA4.13SGT

Order code: DEA4.13SGT



Rotolo da 800 etichette. Dimensioni: 62x29 mm, Indicatore di processo classe 1. Doppio supporto adesivo. EN ISO 11140-1

Roll of 800 labels. Dimensions: 62x29 mm, class 1 process indicator. Double adhesive support. EN ISO 11140-1

Codice articolo: DEA4.14SGT

Order code: DEA4.14SGT

SGT-TABLET

Non hai un account Google? Non hai la rete Wi-Fi? Non hai uno smartphone? No problem, ci pensiamo noi. Con SGT-tablet e una sim dati di qualsiasi gestore telefonico sarai pronto ad utilizzare SGT e cambiarti in meglio il tuo modo di lavorare.

Già configurato:

- Account Google
- Link moduli SGT su Home
- Sim non inclusa

SGT-TABLET

Don't have a Google account? Don't have a Wi-Fi network? Don't have a smartphone? No problem, we'll do it. With SGT-tablet and a sim card of any telephone company you will be ready to use SGT and improve your way of working

Already configured:

- Google Account
- Link SGT modules on Home
- Sim card not included



Codice articolo: DEA4.00SGT.1

Order code: DEA4.00SGT.1



the best medical utilities

© 2026 Copyright Tecnomed Italia srl

Tecnomed Italia s.r.l. • Via Salvador Allende n.2, 61040 Monte Porzio (PU) • **Italy** • **Phone** +39 0721 955125 • **www.tecnomeditalia.com**

V.36.05
ITA/ENG